




People.Health.Care.

Suprasorb®

CNP EasyDress Fixateur Externe

Für Unterdrucktherapie an Extremitäten mit Fixateur Externe.

Patentiert.

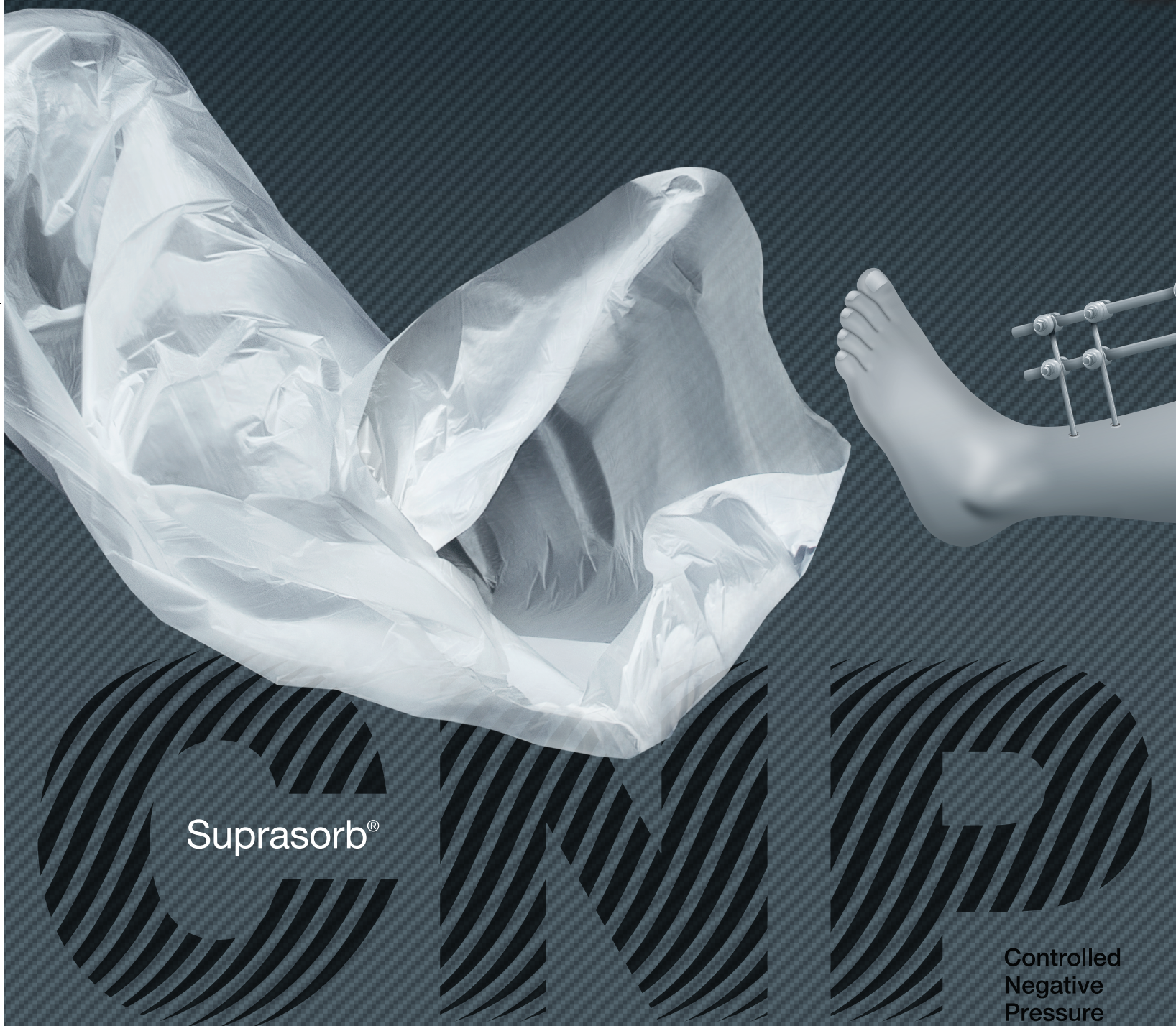

Suprasorb®

CNP EasyDress Fixateur Externe

Innovatives Abdichten durch einfaches Überziehen



Universell einsetzbar. Mit verschiedenen
Fixateur-Externe-Modellen.



EasyDress Fixateur Externe



ehen.

1,20 m Länge



Die 4. Dimension

EasyDress Fixateur Externe folgt als 4. Dimension den bekannten EasyDress Dimensionen S, M und L nach.

1,50 m Umfang

EasyDress Fixateur Externe erlaubt ein **einfaches, schnelles und zuverlässiges Abdichten von Wunden an Extremitäten**, die mit einem Fixateur Externe versorgt sind. Das bewährte EasyDress Prinzip „**Überziehen – fixieren – fertig**“ bleibt auch hier bestehen.

EasyDress Fixateur Externe ist ein **Sekundärverband** für die Unterdrucktherapie. Er lässt sich bei Wundlokalisationen an Extremitäten einsetzen, die mit Fixateur Externe versorgt sind.

- EasyDress Fixateur Externe ist die neue Dimension in der Unterdrucktherapie: Er ist 1,20 Meter lang und verfügt über einen Umfang von 1,50 Metern.
- EasyDress Fixateur Externe erlaubt Unterdrucktherapie an mit Fixateur Externe versorgten Extremitäten, wo sonst vielleicht keine möglich wäre.
- EasyDress Fixateur Externe ist deutlich schneller dicht als konventionelle Abklebmethoden. Dank seiner Geometrie und der flexiblen Spezialfolie.





Suprasorb®

CNP EasyDress Fixateur Externe

Die Anlage. Einfach, schnell & zuverlässig.*

1 Vorbereiten

- Den Wundbereich mit einem für die Unterdrucktherapie freigegebenen Wundfüller, wie z. B. Wundschaum, versorgen.
- Pin-Eintrittsstellen und heile Haut unter dem Fixateur Externe abdecken, wie hier z. B. mit antimikrobiellem Verbandmull (Abb. 1).
- Die Zwischenräume des Fixateur Externe mit Wundschaum auffüllen. Die Kanten mit Verbandmull umwickeln (Abb. 2).

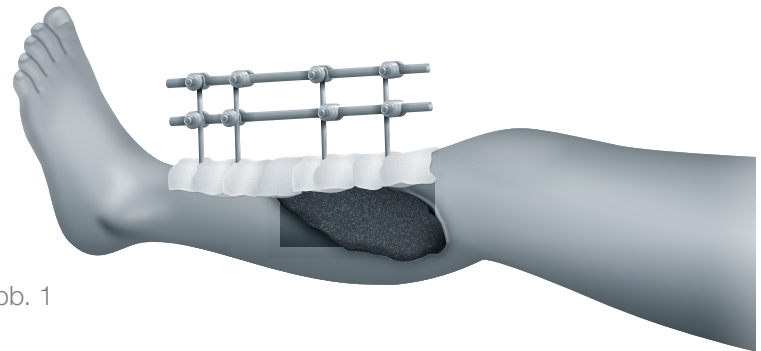


Abb. 1

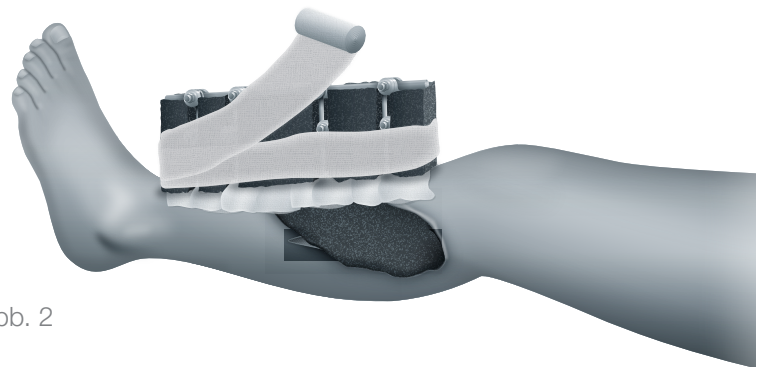


Abb. 2

2 Überziehen

- EasyDress Fixateur Externe über die Extremität ziehen (Abb. 3).
- Er soll locker über dem Fixateur Externe aufliegen (Abb. 4).

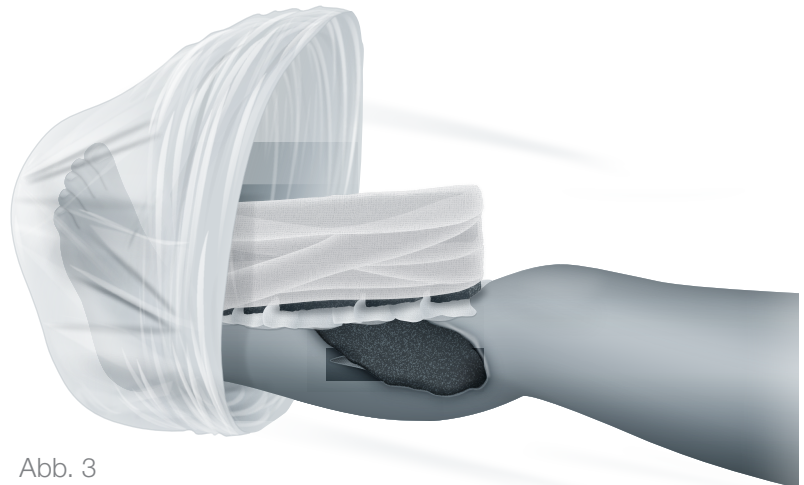


Abb. 3

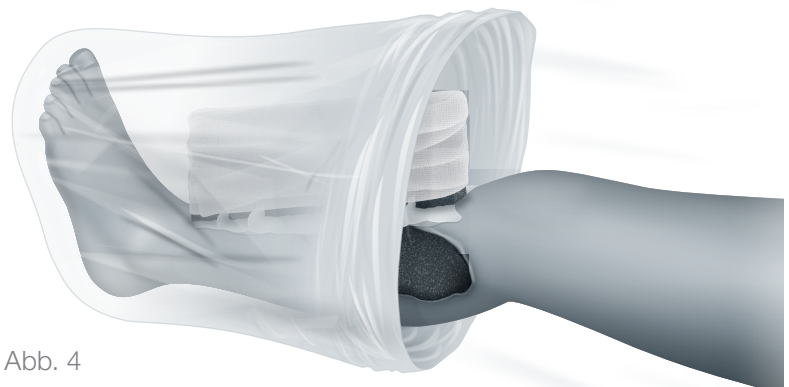


Abb. 4

* Der Überblick über die Anwendungsschritte ersetzt nicht die dem Produkt beiliegende Gebrauchsanweisung.





3 Fixieren und abdichten

- EasyDress Fixateur Externe mit Fixierstreifen zirkulär um die Extremität befestigen (Abb. 5, Punkt 1).
- Das übrige offene Ende des EasyDress Fixateur Externe wie einen Steg verschließen (Abb. 5, Punkt 2).
- Anschließend falten und an der Extremität fixieren (Abb. 6).

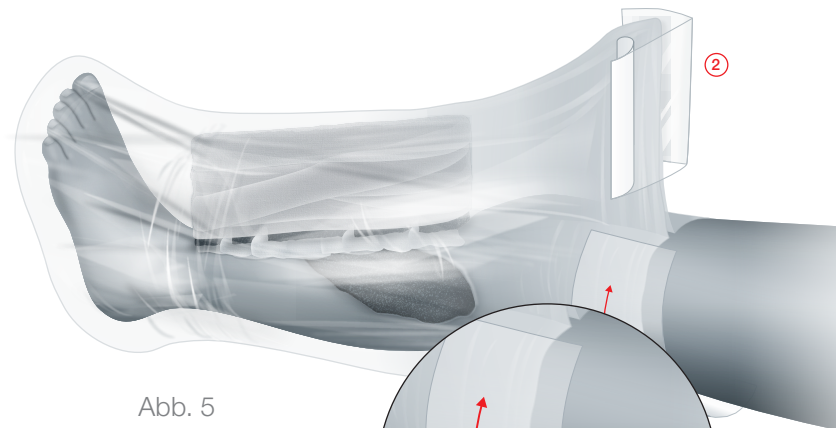


Abb. 5

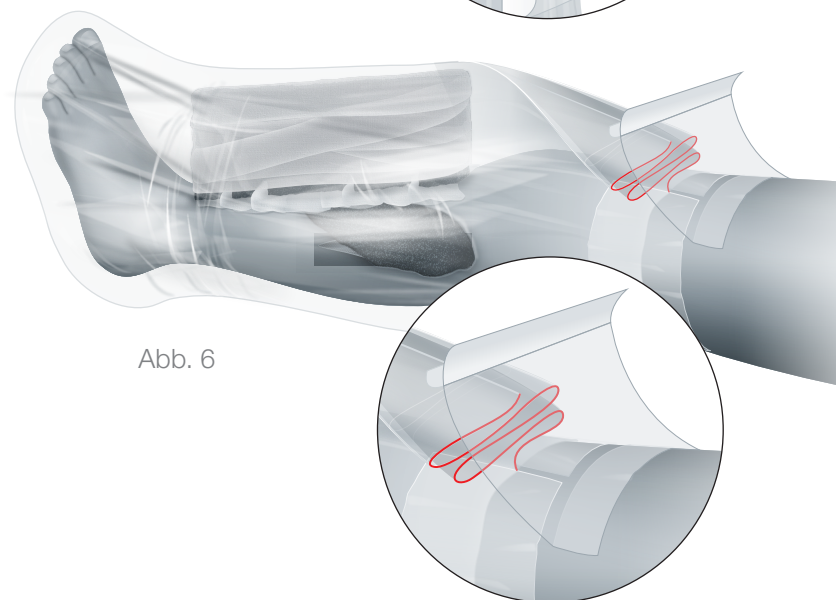


Abb. 6

4 Therapie starten

- Das Drainagepad auf das – in den EasyDress Fixateur Externe – geschnittene Loch über der Wundlokalisation setzen und mit dem Gerät verbinden.
- EasyDress Fixateur Externe während des Unterdruckaufbaus an Extremität und Fixateur-Gestänge anmodellieren.
- Unterdrucktherapie starten.

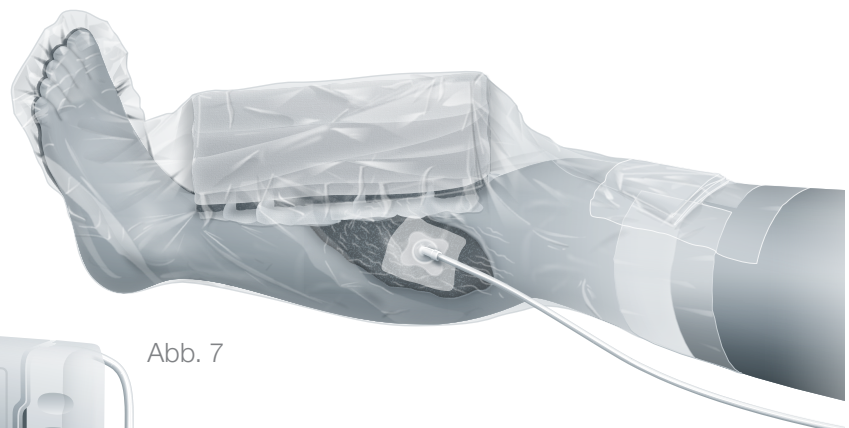


Abb. 7





Suprasorb®

CNP EasyDress Fixateur Externe

Keimdicht. Anpassungsfähig. Klebefrei.



Das Material des EasyDress Fixateur Externe ist identisch mit jenem der EasyDress Range S, M, L. Und damit bereits über Jahre erprobt.



Die Spezialfolie des EasyDress Fixateur Externe ist luftdicht und anpassungsfähig. Sie eignet sich sehr gut zum Anmodellieren und Abdichten.




Die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit des EasyDress Fixateur Externe unterstützt das Feuchtigkeitsmanagement unter dem Verband.




Das Material bietet einen vollflächigen Schutz gegen das Eindringen von Keimen.

EasyDress Fix



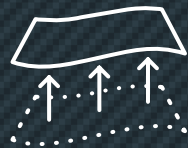

Der klebefreie Easy-Dress Fixateur Externe schonst die intakte Umgebungshaut. Ganz im Gegensatz zu konventionellen Abklebmethoden.

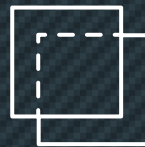

Die transparente Spezialfolie ermöglicht das Beobachten des Primärverbandes sowie der Umgebungshaut.



EasyDress Fixateur Externe ist ein zuverlässiger, reißfester Sekundärverband. Er lässt sich auf die benötigte Länge zuschneiden.

Fixateur Externe





People.Health.Care.

Suprasorb® CNP EasyDress Fixateur Externe

REF	Größe Size	Schlauchverband Tubular bandage		Fixierstreifen Retention strips
		1	2	10 cm x 25 cm
34905	One Size	150 cm	120 cm	6 Stk. · pcs

Suprasorb® CNP EasyDress

REF	Größe Size	Schlauchverband Tubular bandage			Fixierstreifen Retention strips
		1	2	3	10 cm x 12 cm
34901	S	50 cm	30 cm	70 cm	5 Stk. · pcs
34902	M	65 cm	40 cm	85 cm	7 Stk. · pcs
34903	L	80 cm	50 cm	95 cm	8 Stk. · pcs

Nach den Dimensionen S, M, L ist EasyDress Fixateur Externe die 4. Dimension in der EasyDress Produktrange.



Suprasorb®

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
 Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
 Lohmann & Rauscher AG · Oberstrasse 222 · CH-9014 St. Gallen

www.Lohmann-Rauscher.com

9508796 0323 d