

Die Vorteile von VivereX® auf einen Blick.

Zuverlässig

Der gebrauchsfertige Wundverband sorgt dafür, dass Exsudat aus der Wunde aufgenommen wird und Feuchtigkeit verdunsten kann. Er verhindert außerdem das Eindringen von Bakterien in die Wunde. Die Leuchtanzeigen am Gerät stellen dar, ob die Therapie wie gewünscht läuft oder ob Anpassungen nötig sind.



Einfach

Gebrauchsfertigen Wundverband anlegen. Knopf drücken. Therapie starten. Den Rest übernimmt VivereX. So einfach kann die Therapie sein!

Kosteneffizient

Dank der einfachen Handhabung können Patienten deutlich früher aus der Klinik entlassen werden, was die Kosten senkt. Dies gilt auch für die gebrauchsfertigen Wundverbände, die lange Wechselintervalle und schnellere Verbandwechsel ermöglichen. Für die ambulante Patientenversorgung stellt VivereX ebenfalls eine kosteneffiziente NPWT-Option dar.



People.Health.Care.

Das VivereX System bestellen Sie als Therapie Kit. Jedes Kit besteht aus einem Gerät zum Einmalgebrauch, das auf eine Behandlungsdauer von 10 Tagen ausgelegt ist, 2 AA-Batterien, 6 zusätzlichen Fixierstreifen und je 2 gebrauchsfertigen Wundverbänden in 8 optionalen Größen.

VivereX® Therapie Kits

Größe (cm)	Wundkissen (cm)	REF	SC/TC
10 x 20	5 x 15	159 520	1/22
10 x 30	5 x 25	159 521	1/22
10 x 40	5 x 35	159 522	1/22
16 x 16	10 x 10	159 523	1/16
16 x 21	10 x 15	159 524	1/16
16 x 31	10 x 25	159 525	1/16
21 x 21	15 x 15	159 526	1/13
26 x 26	20 x 20	162 927	1/13



Hier erfahren Sie mehr über die CNP-Therapie: cnp.lohmann-rauscher.com

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien

In Zusammenarbeit mit:



People.Health.Care.

Suprasorb® CNP präsentiert:

VivereX® 2. Generation

Unser handliches Single Use System für die Unterdrucktherapie.



www.Lohmann-Rauscher.com

9509716 0424 d

VivereX®

Mit dünnerem Verband und erhöhter Aufnahmekapazität.

Das von Sunmedic in Schweden entwickelte VivereX System wird von L&R zum Patienten gebracht. VivereX ist ein kanisterloses NPWT-System zum Einmalgebrauch. Das VivereX Therapie Kit ist auf eine Behandlungsdauer von 10 Tagen ausgelegt.


Die gebrauchsfertigen Wundverbände lassen sich ganz einfach anlegen und mit der kleinen VivereX Pumpe verbinden. Das Gerät selbst wird mit zwei Batterien betrieben und erzeugt einen Unterdruck von -120 mmHg.



Der zuverlässige, moderne Wundverband fördert die Heilung und reduziert Verbandwechsel auf ein Minimum. Die Auswahl von acht unterschiedlichen Verbandgrößen ermöglicht die Versorgung unterschiedlichster Wunden und sorgt für optimalen Patientenkomfort. Dank der schonenden selbsthaftenden Silikonschicht lässt sich der Verband nahezu schmerzfrei entfernen.

Das kleine, leichte Gerät passt problemlos in die Hosentasche. VivereX kann somit zu einer frühzeitigen Mobilisierung des Patienten beitragen. VivereX ist mit einem Clip an der Rückseite ausgestattet, sodass es sich am Hosenbund befestigen lässt.

VivereX® lässt sich mit nur wenigen Handgriffen anbringen.

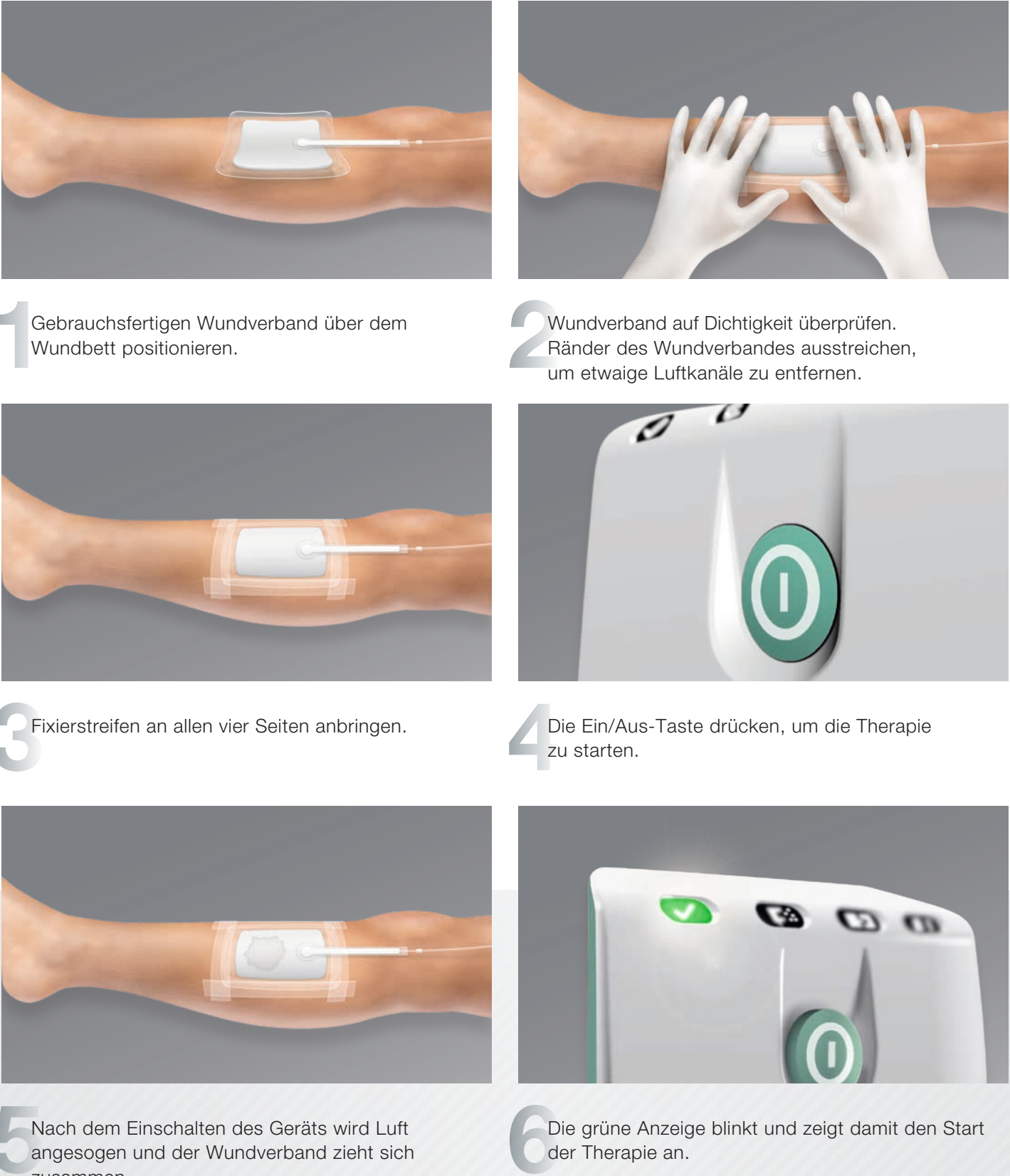

VivereX® lässt sich unauffällig unter der Kleidung tragen.



VivereX® ist ein zuverlässiges, einfach anzuwendendes und kosteneffizientes NPWT-System zum Einmalgebrauch. Die Anwendung wird empfohlen zur Prävention postoperativer Wundkomplikationen sowie für:

- akute Wunden
- schwach bis mittel exsudierende chronische Wunden
- Spalthautentnahmestellen
- Dekubitalulzera
- diabetische Ulzera
- Ulcus cruris venosum
- saubere, geschlossene postoperative Wunden
- subakute dehiszente Wunden
- traumatische Wunden
- Verbrennungen 1. und 2. Grades