

Productcatalogus 2025-2026



Wondverzorging

Suprasorb® CNP

Compressietherapie,
Ondersteunen & Fixatie

Bandages & Ortheses

Gipskamer

OK-Set-producten

Dermatologie

Oftalmologie

Oor, neus en keel

Hygiëne & Verzorging



People.

Focus op mensen.

Het welzijn van onze medewerkers,
klanten, gebruikers en patiënten
staat centraal bij alles wat we doen.

De 2025/26 productcatalogus biedt u informatie over producten, concepten en oplossingen in lijn met de bedrijfsfilosofie van L&R.



Health.

Ons vakgebied.
Gezondheid bepaalt
onze visie en waarden.



Care.

Wij zijn de leverancier van
oplossingen.
We ondersteunen onze
klanten, personeel, gebruikers
en patiënten met onze
expertise en aandacht voor
detail.

	Wondverzorging	Suprasorb® CNP	Compressietherapie, Ondersteunen & Fixatie	Bandages en Ortheses	Gipskamer	OK-Set-producten	Dermatologie	Oftalmologie	Oor, neus en keel	Hygiëne & Verzorging
Trefwoord, Product										
A										
Actico® UlcerSys Liner Onderkous			86-87							
Actico® UlcerSys-systeem			84-85							
B										
Crêpepapierverband				187						
C										
Cambric®			112							
Cellacare® Abdominal Classic				154						
Cellacare® Achillo				163						
Cellacare® Cervical Classic				130						
Cellacare® Cervical Plus Classic				131						
Cellacare® Clavicula Classic				135						
Cellacare® Dorsafit Comfort				146						
Cellacare® Dorsal Classic				147						
Cellacare® Dorsal F/M Comfort				148						
Cellacare® Epi Classic				136						
Cellacare® Epi Comfort				137						
Cellacare® Epi Control Expert				138						
Cellacare® Genu Classic				155						
Cellacare® Genu Comfort				156						
Cellacare® Genucast 0° Classic				157						
Cellacare® Genucast 20° Classic				158						
Cellacare® Genucast Modular Classic				159						
Cellacare® Gilchrist Classic				132						
Cellacare® Gilchrist Easy				133						
Cellacare® Gilchrist Sling Classic				134						
Cellacare® Lumbal Classic				151						
Cellacare® Malleo Akut Classic				164						
Cellacare® Malleo Classic				161						
Cellacare® Malleo Comfort				162						
Cellacare® Malleo Control Comfort				165						
Cellacare® Malleo Control Expert				166						
Cellacare® Manu Control Classic				141						
Cellacare® Manu Control Comfort				142						
Cellacare® Manus Classic				139						
Cellacare® Manus Comfort				140						
Cellacare® Materna Classic				149						
Cellacare® Materna Comfort				150						
Cellacare® Patella Control Expert				160						
Cellacare® Rhizo Classic				143						
Cellacare® Rhizocast Classic				144						
Cellacare® Tarsotec Expert				167						
Cellacare® Thorax F/M Classic				153						
Cellacast® Active					172					
Cellacast® Longuette					174					
Cellacast® Soft					173					
Cellacast® Xtra					170&176					
Cellacast® Xtra Longuette					171					
Cellona® Crème					187					
Cellona® Gipshak					189					
Cellona® Gipszwachtel					175					
Cellona® Longuette, Cellona® Brede longuette					177					
Cellona® Polster					185					
Cellona® Randpolster					186					
Cellona® Shoe					188					
Cellona® Shoecast					190					
Cellona® Synthetische watten			105		184					

	Wondverzorging	Suprasorb® CNP	Compressietherapie, Ondersteunen & Fixatie	Bandages en Ortheses	Gipskamer	OK-Set-producten	Dermatologie	Oftalmologie	Oor, neus en keel	Hygiëne & Verzorging
Trefwoord, Product										
Cotopads® by Velpeau®	47									
Crêpepapierverband					183					
Curafix® H	68									
Curafix® i.v. classic	54									
Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)	58									
Curafix® i.v. Control (6 x 7,5 cm)	57									
Curafix® i.v. Control (9 x 11 cm)	59									
Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm)	55									
Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm)	56									
Curaplast® Kids	65									
Curaplast® Sensitive	60-61									
Curaplast® Sensitive pleisterstrips	62									
Curaplast® Sensitive vingerverband	63									
Curaplast® Vochtbestendige pleisterstrips	64									
Curapor®	52									
Curapor® Transparent	53									
Curatest®							272			
D										
Dauerbinde® F			103							
Dauerbinde® K			102							
Debrisoft® Lolly	13									
Debrisoft® Duo Pad	12									
Deppers	40									
G										
Gazin® Deppers van verbandgaas	41									
Gazin® Gaaskompressen	35-36									
Geka® Gaasverband			111							
Gazin® Prepareerdeppers X-ray	42									
Gazin®-tamponverband	39									
Gynaecologische handschoenen						263				
H										
Haftan®			127		182					
Haftelast® Latexvrij			117-118							
I										
Idealbinde			126							
K										
Kitpack® Operatiecomponentensysteem						262-263				
Kitpack® Start						264-266				
Komprex® I/II			106-107							
L										
Lenkelast®			123							
Lenkelast® Color			124							
Lenkideal®			125							
Lomatuell® H	29									
Lomatuell® Pro	28									
M										
Metalline®	33-34									
Mollelast®			109							
Mollelast® Haft			115							
Mollelast® Haft latexvrij			116							
O										
Opraclean®	44									
Overige hygiëneproducten										294-295
P										
Panelast®			99							
Porelast®			100							
Porofix®	70									

	Wondverzorging	Suprasorb® CNP	Compressietherapie, Ondersteunen & Fixatie	Bandages en Ortheses	Gipskamer	OK-Set-producten	Dermatologie	Oftalmologie	Oor, neus en keel	Hygiëne & Verzorging
Trefwoord, Product										
Pro-ophta® Junior								276		
Pro-ophta®-lancetsteelpelottes								278		
Pro-ophta®-oogkompres								284		
Pro-ophta®-oogstaafjes								277		
Pro-ophta® Ooggatkompres								285		
Pro-ophta® Oogkussens								283		
Pro-ophta® Oogverband D								281		
Pro-ophta® Oogverband K								282		
Pro-ophta® Oogverband S								280		
Pro-ophta®-wiggelottes								279		
R										
Raucocel® Epistaxistamponnades									289	
Raucocel®-neustampons									288	
Raucodrape® Accessoires						241-242				
Raucodrape® Afdekdoeken						233				
Raucodrape® Apparaatafdekkingen						240				
Raucodrape® Artroscoopie-afdekkingen						219-221				
Raucodrape® Basissets						194-195				
Raucodrape® Cardiovasculaire doeken						232				
Raucodrape® Cardiovasculaire set						231				
Raucodrape® Cranioset						223				
Raucodrape® Doek voor cranio maxillofaciaal chirurgie						230				
Raucodrape® Extremitendoeken						218				
Raucodrape® Extremitensets						216-217				
Raucodrape®-Gatdoek met incisiefolie						204				
Raucodrape® Gatdoeken						237-238				
Raucodrape® Gynaecologie-cystoscopie- afdekkingen						209				
Raucodrape® Gynaecologie-urologie sets						211				
Raucodrape® Heupartroscopieset						215				
Raucodrape® Hoofdsets						225				
Raucodrape® Incisiefolie						243				
Raucodrape® LAP-sets						201				
Raucodrape® LAP-/wervelkolomdoek						224				
Raucodrape® Lithotomieset						210				
Raucodrape® OK-afdekdoeken						234				
Raucodrape® OK-instrumentafafdekken						235				
Raucodrape® OK-kleefdoeken						236				
Raucodrape® Oogdoeken						228-229				
Raucodrape® Oorgatdoek						227				
Raucodrape® Operatieafdeksysteem						193				
Raucodrape® Orthopedie-/heupsets						214				
Raucodrape® Pediatriebasisset						203				
Raucodrape® Pfannenstielset						205				
Raucodrape® Rectumsets						202&26				
Raucodrape® Sectio-afdekkingen						207-208				
Raucodrape®-Set voor kleine ingrepen						196				
Raucodrape® Splitdoeken						239				
Raucodrape® Spildoekest/Splitdoek						226				
Raucodrape® Spildoecktrays						199-200				
Raucodrape® TUR-sets						212				
Raucodrape® Universeelsets						198				
Raucodrape® Universeelsets voor kleine ingrepen						197				
Raucodrape® Universele spildoekest						213				
Raucodrape® Verticaal isolatielaken/verticaal isolatielakenset						222				

Trefwoord, Product	Wondverzorging	Suprasorb® CNP	Compressietherapie, Ondersteunen & Fixatie	Bandages en Ortheses	Gipskamer	OK-Set-producten	Dermatologie	Oftalmologie	Oor, neus en keel	Hygiëne & Verzorging
Raucolast®			110							
Raucoset®						267-270				
Rosidal® 1 C			94							
Rosidal® CC			92							
Rosidal® haft			90							
Rosidal® K			89							
Rosidal® Lymph			97-98							
Rosidal® SC			91							
Rosidal® Soft			104							
Rosidal® Sys			95-96							
Rosidal® TCS			93							
S										
Sentina® Ambidextrous Latex										292
Sentina® Ambidextrous Nitrile										293
Sentina®-bezoekersjassen										296
Sentina® Beschermafdekking, brancardlaken										297
Sentinex® OK-kleding						244-255				
Setpack® Deppers X-ray						259				
Setpack® Gaaskompressen X-ray						258				
Setpack® OK-verbandstoffsysteem						256&261				
Setpack® OK-verbandstoffsysteem Toptex® lite						257				
Setpack® Prepareerdeppers X-ray						260				
Silkafix®	69									
Stella® Crepe			113							
Stella® Plast	66									
Stella® Steriele kompressen	37-38									
Stella® Strip	67									
Stellaline®	32									
Stellastic®			114							
Suprasorb® A	14									
Suprasorb® A + Ag	16									
Suprasorb® A + Ag Pro	17									
Suprasorb® A Pro	15									
Suprasorb® CNP dieptedrainage		73								
Suprasorb® CNP Drainagefolie		74								
Suprasorb® CNP EasyDress		75								
Suprasorb® CNP Kits		76-78								
Suprasorb® CNP P3-behandelunit		72								
Suprasorb® CNP Verbanden		80								
Suprasorb® F® en Suprasorb® F® protect	18									
Suprasorb® H	19									
Suprasorb® Liquacel	20									
Suprasorb® Liquacel Ag	21									
Suprasorb® P	22									
Suprasorb® P + PHMB	25									
Suprasorb® P Sensitive	23-24									
Suprasorb® Wondschuim		79								
Suprasorb® X	26									
Suprasorb® X + PHMB	27									
T										
tg® Buisverband			120		178					
tg® Fix			121							
tg® Grip			119							
tg® Handschoen					181		273			
tg®-Kant-en-klaarverbanden			122							
tg® Soft			108		179					
Toptex® Lite	43									

	Wondverzorging	Suprasorb® CNP	Compressietherapie, Ondersteunen & Fixatie	Bandages en Ortheses	Gipskamer	OK-Set-producten	Dermatologie	Oftalmologie	Oor, neus en keel	Hygiëne & Verzorging
Trefwoord, Product										
Tricotkous, tricotkouszwachtel					180					
V										
Varicex® S			101							
Venosan® AES			88							
VivereX®		81								
Vliwaktiv®	50									
Vliwaktiv® Ag	51									
Vliwasoft®	45-46									
Vliwasorb® Pro	30									
Vliwasorb® Sensitive	31									
Vliwazell®	48									
Vliwazell® Pro	49									



Wondverzorging

Debrisoft® Duo Pad



Debrisoft® Duo Pad

Toepassingsgebieden

- acute en chronische wonden en ook voor de huid rondom de wond:
 - ◆ diabetische ulcers
 - ◆ arteriële en veneuze ulcers
 - ◆ decubituswonden
 - ◆ postoperatief secundair genezende wonden
 - ◆ traumatische en chirurgische wonden (schaafwonden, incisies, rijtwonden)
 - ◆ brandwonden en verbrandingen (3° graad: na chirurgisch débridement)
 - ◆ bultvormige epidermolysis
- geschikt voor droge, perkamentachtige, vette, seborroïsche of gezonde huid en hyperkeratotische huid zoals die bijvoorbeeld kan voorkomen bij lymfoedeem.

Eigenschappen

- efficiënte 2-in-1 débridementpad.
- ontwikkeld voor débridement van stevig vastzittende, fibrineuze weefselresten dat effectiever is dan standaard mechanisch débridement.
- de nieuwe ruwe beige zijde maakt stevig vastzittende, fibrineuze weefselresten eenvoudig los).
- de originele zachte, witte zijde verwijdert celdébris, exsudaat en biofilm van de wond.

Productsamenstelling

Polyester, polyacrylaat, styreen-butadieëncopolymeer, ethyleen-vinylacetaat, carboxymethylcellulose, polyamide.

Opmerkingen

- product voor débridement, blijft niet achter op de wond
- kan naar wens bij elke verbandwisseling worden gebruikt
- Debrisoft Duo hoeft niet op maat geknipt te worden

Tip

- verwijder lotions, gels, crèmes of zalven voordat u Debrisoft Duo gebruikt, omdat deze de werking van het product negatief kunnen beïnvloeden.
- zorg ervoor dat u de wond of huid niet overmatig irriteert en verminder indien nodig de druk of gebruik de andere kant van het product.
- Debrisoft Duo behaalt ook zeer goede resultaten op ernstig keratotische of necrotische oppervlakken wanneer deze eerder zijn behandeld met autolytisch débridement.
- de zachte vezelzijde kan worden bevochtigd met elke standaard wondspoeloplossing in overeenstemming met de nationale richtlijnen.

Debrisoft® Duo Pad

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 10	159990	4820601	5/50
13 x 20	159991	4820593	5/50

Debrisoft® Lolly

De gouden standaard bij mechanisch débridement.



Debrisoft® Lolly



- A** Reinig de wond en/ of moeilijk te bereiken wondlocaties onder zachte druk met de zachte vezelkop van de bevochtigde Debrisoft Lolly.
- B** De vezelverbinding neemt het losgemaakte necrotische en keratosemateriaal op en houdt het vast.

Toepassingsgebieden

- Débridement van diepe – ook chirurgisch-invasieve – tot oppervlakkige wonden zoals:
 - ◆ diabetische ulcers
 - ◆ arteriële en veneuze ulcers
 - ◆ decubituswonden
 - ◆ postoperatief secundair genezende wonden
 - ◆ traumata en brandwonden

Eigenschappen

- gepatenteerde hightech polyestervezels verwijderen effectief débris en exsudaat uit de wond, en huidschilfers en keratose van de huid rondom de wond
- de breukvaste steel van polypropyleen biedt eenvoudige toegang tot diepe wonden - ook chirurgisch-invasieve wonden - en moeilijk te bereiken wondlocaties
- het zachte vezelverband zorgt voor een nagenoeg pijnloos gebruik en biedt tegelijkertijd een hoog gebruikscomfort
- de hoogste gebruiksveiligheid wordt gegarandeerd door nauwkeurig aangebrachte fixatienaden, een ergonomische steel en traceerbare röntgencontrastdraden
- de stick met monofilamentvezels is eenvoudig te hanteren en daardoor een innovatief hulpmiddel voor uw débridement

Productsamenstelling

Zachte kop: bestaat uit monofilament-polyestervezel en is omnaaid met een blauwe röntgencontrastdraad van polypropyleen (bevat bariumsulfaat en polyester).
Binnenkant van de kop: gecoat met polyacrylaat.
Steel: polypropyleen.

Opmerkingen

- product voor débridement, blijft niet achter op de wond
- kan naar wens bij elke verbandwisseling worden gebruikt
- mag zo lang worden gebruikt tot de wond geheel gereinigd is en van de reinigingsfase naar de granulatiefase is overgegaan

Tip

- leidt ook bij sterk keratotische, necrotisch beleg tot een bijzonder goed resultaat als deze eerst autolytisch behandeld is
- de zachte vezelkant kan met elke gangbare wondspoeloplossing worden bevochtigd

Debrisoft® Lolly

steriel, afzonderlijk verpakt

REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
33224	3314879	5/50

Suprasorb® A

Calciumalginaatverband.



Suprasorb® A



- A** Overtollig wondexsudaat wordt in het verband opgenomen.
- B** Gelvorming door ionenuitwisseling.

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van niet-geïnfec-teerde wonden, als deze sterk exsuderend, oppervlakkig of diep zijn.
- indicaties:
 - ◆ arteriële ulcera
 - ◆ veneuze ulcers
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ split-skin-afnameplekken
 - ◆ decubitus

Eigenschappen

- hoge mate van comfort dankzij de bijzonder zachte structuur en het eenvoudige tamponneren
- bevordert de wondgenezing dankzij hoog absorptievermogen voor exsudaat
- aanpasbaar aan elke wondbodem
- binding van bacteriën en celdébris in de gel
- zorgt voor een vochtig wondmilieu

Productsamenstelling

Calciumalginaat-vezels

Opmerkingen

- interval tussen verbandwisselingen:
 - ◆ wordt op basis van de wondsituatie, de mate van exsudatie en het secundaire verband door de behandelend arts bepaald, uiterlijk na 5-7 dagen
- opmerking bij infectie:
 - ◆ occlusief secundair verband uitsluitend na beslissing van de arts, afhankelijk van de algehele situatie

Uitvoeringen

- kompres
- wiek

Suprasorb® A

steriel, afzonderlijk verpakt


Afmetingen (cm)	Gewicht (g)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
kompres				
5 x 5		20440 / 148147	1544444	10/100
10 x 10		20441 / 148148	1544451	10/100
10 x 20		20442 / 148149	1544469	10/100
wiek				
30	2	20445 / 148150	1544477	5/50

Suprasorb® A Pro

Verstevigd calciumalginaat-verband.



Suprasorb® A Pro

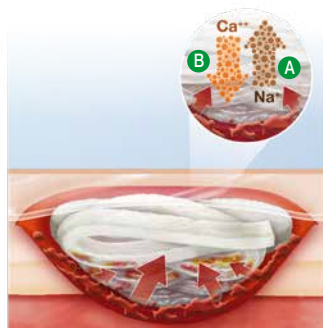

Wondexsudaat wordt geabsorbeerd. Bij contact met wondexsudaat ontstaat een gel die voor een vochtig wondmilieu zorgt en het autolytische débridement ondersteunt.

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van acute en chronische wonden, als deze sterk exsuderend, oppervlakkig of diep zijn.
- indicaties:
 - ◆ arteriële ulcera
 - ◆ veneuze ulcers
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ decubitus
 - ◆ postoperatieve wonden
 - ◆ split-skinafnameplekken en split-skin
- wondgenezingsfasen:
 - ◆ exsudatiefase
 - ◆ granulatiefase

Eigenschappen

- hoog absorptie- en retentievermogen
- bescherming van de wondrand
- ondersteuning van de wondgenezing door autolytisch débridement
- binding van bacteriën en celdébris in de gel
- in één geheel te verwijderen
- hemostatisch effect

Productsamenstelling

Calciumalginaat-vezels, cellulosevezels.

Opmerkingen

- interval tussen verbandwisselingen: Afhankelijk van de mate van exsudatie maximaal 7 dagen
- voorafgaand aan gebruik gemakkelijk op maat te knippen voor de wondgrootte
- kan worden gefixeerd met een hier-voor geschikt secundair verband, bv. Suprasorb P sensitive, afhankelijk van de mate van exsudatie
- onder compressie te gebruiken

Uitvoeringen

- kompres
- wiek

Suprasorb® A Pro

steriel, afzonderlijk verpakt


Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
kompres			
5 x 5	33932	4229720	10/120
10 x 10	33933	4229738	10/200
10 x 20	33934	4229746	5/45
wiek			
2 x 45	33935	4229753	5/20

Suprasorb® A + Ag

Antimicrobieel calciumalgiinaat-verband met zilver.



Suprasorb® A + Ag

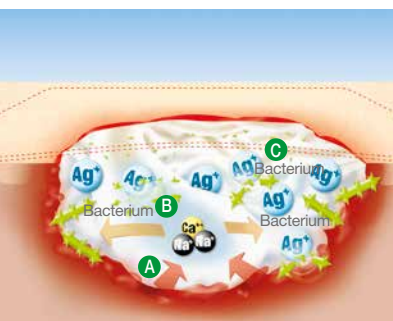

- A** Overtollig wondexsudaat wordt in het verband opgenomen.
- B** Gelvorming door ionenuitwisseling.
- C** Doding van bacteriën in het wondbed door vrijkomende zilverionen.

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van aan infecties blootgestelde of geïnfecteerde wonden, als deze sterk exsuderend, oppervlakkig of diep zijn.
- indicaties:
 - ◆ decubitus
 - ◆ arteriële ulcera
 - ◆ veneuze ulcers
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ postoperatieve wonden
 - ◆ split-skin-afnameplekken

Beoogd gebruik

Kompressen/wondtampons kunnen worden gebruikt voor het behandelen van aan infecties blootgestelde en geïnfecteerde wonden.

Eigenschappen

- brede antimicrobiële werking, ook tegen MRSA en VRE*
- bevordert de wondgenezing dankzij hoog absorptievermogen voor exsudaat
- aanpassing aan elke wondbodem
- vormt een gel die voor een vochtig wondmilieu zorgt en bijdraagt aan het verminderen van de kiembelasting

Productsamenstelling

Calciumalgiinaat-vezels, zilveralgiinaatvezel (1,5% ionisch zilver).

Opmerkingen

- interval tussen verbandwisselingen:
 - ◆ de intervallen tussen wisselingen van Suprasorb A+Ag worden door de behandelend arts bepaald. Afhankelijk van de mate van exsudatie kan het wondverband maximaal 7 dagen op/in de wond aangebracht blijven.
- bij infectie:
 - ◆ occlusief secundair verband uitsluitend na beslissing van de arts, afhankelijk van de algehele situatie

Uitvoeringen

- kompres
- wiek

Suprasorb® A + Ag

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	Gewicht (g)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
kompres				
5 x 5		20570 / 149265	2355279	10/100
10 x 10		20571 / 149266	2355261	10/50
10 x 20		20572 / 149267	2355253	5/20
wiek				
30	2	20573 / 149268	2355246	5/20


* Spectrum van ziekteverwekkers in vitro aangetoond, zie gebruiksaanwijzing

Suprasorb® A + Ag Pro

Antimicrobieel calciumalginaat-verband met zilver.



Suprasorb® A + Ag Pro

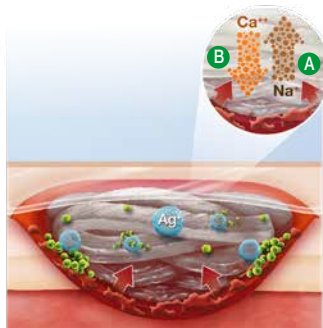

Wondexsudaat wordt geabsorbeerd. Door het absorberen ontstaat een uitwisseling tussen calciumionen en natriumionen waardoor een gel wordt gevormd. Het vrijkomen van de zilverionen draagt bij aan een antimicrobiële werking.

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van aan infecties blootgestelde of geïnfecteerde wonden, als deze sterk exsuderend, oppervlakkig of diep zijn.
- indicaties:
 - ◆ decubitus
 - ◆ arteriële ulcera
 - ◆ veneuze ulcers
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ postoperatieve wonden
 - ◆ split-skin-afnameplekken
- wondgenezingsfasen:
 - ◆ exsudatiefase
 - ◆ granulatiefase

Eigenschappen

- brede antimicrobiële werking, ook tegen MRSA en VRE
- vermindering van het aantal pathogenen
- hoog absorptie- en retentievermogen
- bescherming van de wondrand
- ondersteuning van de wondgenezing door autolytisch débridement
- binding van bacteriën en celdébris in de gel
- in één geheel te verwijderen
- hemostatisch effect

Productsamenstelling

Calciumalginaat-vezels, cellulosevezels, zilveralginaatvezel (1,5 % ionisch zilver).

Opmerkingen

- intervallen tussen wisselingen van Suprasorb A + Ag Pro worden door de behandelend arts bepaald
- Afhankelijk van de mate van exsudatie kan het wondverband maximaal 7 dagen op/in de wond aangebracht blijven
- voorafgaand aan gebruik gemakkelijk op maat te knippen voor de wondgrootte
- kan worden gefixeerd met een hier-voor geschikt secundair verband, bv. Suprasorb P sensitive, afhankelijk van de mate van exsudatie
- onder compressie te gebruiken

Uitvoeringen

- kompres
- wiek

Suprasorb® A + Ag Pro

steriel, afzonderlijk verpakt


Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
kompres			
5 x 5	33926	4230009	10/120
10 x 10	33927	4229761	10/200
10 x 20	33928	4229779	5/45
wiek			
2 x 45	33929	4229787	5/20

Suprasorb® F® en Suprasorb® F® protect

Folie-verband.



Suprasorb® F

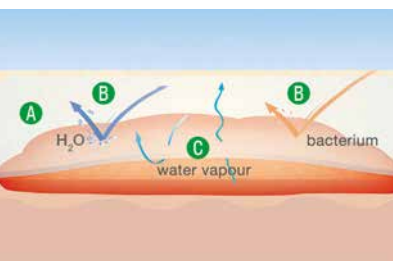

- A** transparant polyurethaanfolie.
- B** bacteriën- en vochtwerend.
- C** overtollig vocht verdampst.

Toepassingsgebieden

- voor de behandeling van niet-geïnfecteerde wonden met weinig exsudatie oppervlakkige wonden.
- indicaties:
 - ◆ graft oogstplaatsen
 - ◆ chirurgische wonden
 - ◆ schaafwonden
 - ◆ arteriële, veneuze en
 - ◆ diabetisch
 - ◆ 1° en 2° graads brandwonden

Eigenschappen

- eenvoudig aan te brengen
- uitstekend draagcomfort dankzij veilige en flexibele hechting
- rekbaar en soepel
- beschermt tegen verontreiniging van buitenaf
- bevordert een vochtig wondmilieu
- douchen is mogelijk
- maakt als primair verband wondcontrole mogelijk zonder het te moeten verwijderen
- waterdampdoorlatend

Productsamenstelling

Polyurethaanfilm
Polyacrylaatlijm.

Opmerkingen

- Suprasorb® F op rol is ontworpen voor de preventie (bijv. van decubitus) en fixatie van verbanden
- Interval tussen verbandwisselingen:
- wordt door de behandelende arts afhankelijk van wondsituatie, exsudatiegraad en mogelijk primair verband bepaald, uiterlijk na 5-7 dagen

Uitvoeringen

- steriel, bijgesneden folie-wondverband
- niet-steriel folieverband van de rol

Suprasorb® F®

Afmetingen	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
gerold, niet-steriel			
10 cm x 1 m	20467	2270965	1/16
10 cm x 10 m	20468	1799451	1/16
15 cm x 10 m	20469	1799444	1/10

Suprasorb® F® protect


Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
steriel, afzonderlijk verpakt			
5 x 7	162460	4794046	10/380
5 x 7	162461	4794053	100/1000
10 x 12	162462	4794061	10/100
10 x 12	162463	4794079	50/200
10 x 25	162464	4794087	10/140
15 x 20	162465	4794095	10/400
20 x 30	162466	4795456	10/180

Suprasorb® H

Hydrocolloïdverband.



Suprasorb® H

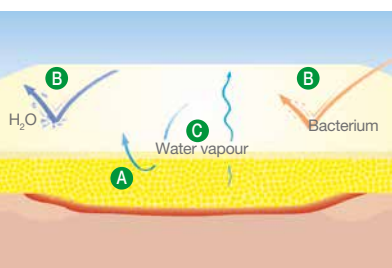

- A** Bij exsudaatabsorptie zwelt het hydrocolloïd op en vormt een gel, dat exsudaat en weefseldébris bindt.
- B** Bacteriën- en vochtwerend.
- C** Overtollig exsudaat verdamp.

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van niet-geïnficeerde wonden, als deze zwak tot matig exsuderend en oppervlakkig zijn.
- indicaties:
 - ◆ druk- en beenzweren
 - ◆ eerste- en tweedegraads brandwonden
 - ◆ huidaframeplekken en huidontvangende plekken
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ postoperatieve wonden
 - ◆ schaafwonden

Eigenschappen

- uitstekend absorberend vermogen
- luchtdoorlatend
- staat garant voor een optimaal vochtig wondmilieu
- minimaliseert het risico op beschadiging van de gezonde huid rondom de wond

Productsamenstelling

Polyurethaanfolie met hydrocolloïd gecoat.

Opmerkingen

Verbandwisselingsintervallen:

- hoe vaak het verband verwisseld moet worden, is afhankelijk van de toestand van de wond en de hoeveelheid uittreidend exsudaat. Het verband moet zo lang mogelijk blijven zitten. Als het wondexsudaat door het verband heen komt, moet het verband direct worden verwisseld. Het verband moet na maximaal 7 dagen of zodra het volgezogen is met exsudaat, worden verwisseld

Uitvoeringen

- standaard
- dun
- sacrum
- border

Suprasorb® H

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
standard			
10 x 10	108830	3945557	10/660
15 x 15	108831	3945565	5/50
20 x 20	108832	3945573	5/50
dun			
5 x 5	108860	3945581	10/1650
10 x 5	108861	3945599	10/480
20 x 5	108862	3945607	10/250
10 x 10	108863	3945615	10/720
15 x 15	108864	3945623	5/50
20 x 20	108865	3945631	5/50
border			
14 x 14	108866	3945649	5/200
sacrum			
16 x 14	108867	3945656	5/200

Suprasorb® Liquacel*

Hydroactief fiberverband.



Suprasorb® Liquacel*



- A** Vermindert risico op maceratie door verticale exsudaatabsorptie en -overdracht aan secundair verband.
- B** Geleert in contact met wondexsudaat tot een cohesieve gel.
- C** Sluit exsudaat, débris en bacteriën veilig in de gel in.

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van acute en chronische wonden, als deze zwak tot sterk exsuderend, oppervlakkig of diep zijn.
- indicaties:
 - ◆ ulcus cruris
 - ◆ decubitus
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ tweedegraads brandwonden
 - ◆ scheur-, snij- en schaafwonden
 - ◆ traumatische wonden en wonden met bloedingsneigingen zoals bv. na chirurgisch of mechanisch débridement
 - ◆ split-skin-afnameplekken

Eigenschappen

- werkt ondersteunend voor de wondrand en de omliggende huid
- effectief management van het exsudaat ondersteunt het genezingsproces
- ongecompliceerd gebruik in vochtige toestand omdat het in één stuk verwijderbaar is
- verticale exsudaatabsorptie en -overdracht aan secundair verband

Productsamenstelling

Cellulosevezels, Cellulose-ethyl-sulfonaatvezel.

Opmerkingen

- in droge toestand is Suprasorb Liquacel* gemakkelijk op maat te knippen voor de specifieke wond. Het verband moet de wond ongeveer 1 cm overlappen
 - diepe wonden tot 85 % tamponneren met de tamponnade en ca. 2,5 cm over de wondrand laten uitsteken
- Interval tussen verbandwisselingen:
- wordt op basis van de wondsituatie, de mate van exsudatie en het secundaire verband door de behandelend arts bepaald, uiterlijk na 7 dagen

Uitvoeringen

- kompres
- wiek

Suprasorb® Liquacel

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
kompres			
5 x 5	33435 / 180020	3042009	10/100
10 x 10	33436 / 180021	3041993	10/100
15 x 15	33437 / 180022	3041985	5/50
wiek			
45 x 2	33438 / 180023	3041977	5/50


* De boven genoemde eigenschappen hebben betrekking op huidige in-vitrogegevens.

Suprasorb® Liquacel Ag

Wondverband met antimicrobieel zilver en verstevigende cellulosevezels.



Suprasorb® Liquacel Ag

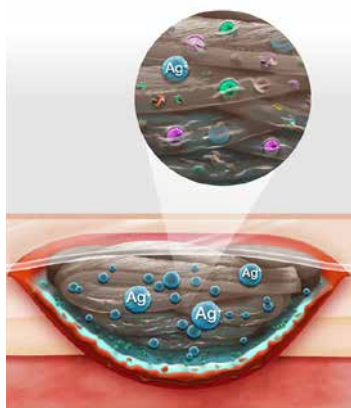

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van matig tot sterk exsuderende wonden als deze oppervlakkig of diep zijn.
- indicaties:
 - ◆ tweedegraads verbrandingen
 - ◆ ulcus cruris, decubitus en diabetische ulcers
 - ◆ postoperatieve wonden
 - ◆ wonden met een bloedingsneiging
- wondgenezingsfasen:
 - ◆ exsudatiefase
 - ◆ granulatiefase

Eigenschappen

- bevat nanozilvertechnologie die de biofilm vernietigt.
- werkzaam tegen een breed spectrum ziekteverwekkers, waaronder MRSA.
- geringe cytotoxiciteit door continu vrijkomen van de zilverionen.
- de structuur van het verband blijft ook behouden in vochtige toestand en maakt verwijdering in één geheel mogelijk.
- effectief exsudaatmanagement door hoge verticale absorptie en daardoor bescherming van de wondranden tegen maceratie.
- ondersteuning van het autolytisch débridement, en binding van bacteriën en celdébris in het verband

Productsamenstelling

60 % carboxymethylcellulose (CMC)-vezels, 40 % mix van Lyocell- en Lunar Ag-vezels (met 1,1 % nanozil-verdeeltjes).

Opmerkingen

- voorafgaand aan gebruik, gemakkelijk op maat te knippen voor de wondgrootte
- kan worden gefixeerd met een hiervoor geschikt secundair verband, (bv. Suprasorb P sensitive), afhankelijk van de mate van exsudatie
- onder compressie te gebruiken
- Interval tussen verbandwisselingen: mag niet langer dan 7 dagen zijn

Uitvoeringen

- kompres
- wiek

Suprasorb® Liquacel Ag

steriel, afzonderlijk verpakt


Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
kompres			
5 x 5	142503	4400743	10/200
10 x 10	142504	4400750	10/100
15 x 15	142505	4400768	5/50
wiek			
2 x 45	142506	4401261	5/100

Suprasorb® P

PU-schuimverband.



Suprasorb® P

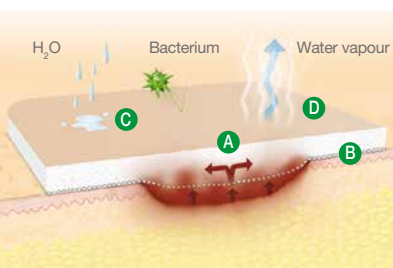

- A** Gelijkmatige verdeling van wondexsudaat.
- B** Geperforeerde wondcontactlaag.
- C** Bacteriën- en waterdicht.
- D** Waterdampdoorlatend.

Toepassingsgebieden

- matig exsuderende wonden
- oppervlakkige wonden
- niet-geïnfecteerde wonden
- in alle fasen van de wondgenezing, zoals:
 - ◆ decubitus- en andere ulcers
 - ◆ split-skin-afnameplekken
 - ◆ postoperatieve wonden

Eigenschappen

- zeer goede wondgenezing dankzij betrouwbaar exsudaatmanagement
- uitstekend draagcomfort dankzij de zachte en soepele structuur
- de geperforeerde wondcontactlaag voorkomt vastkleven aan de wond
- bacteriën- en vochtwerend PU-membraan*
- behoudt een vochtig wondmilieu en bevordert daarmee de natuurlijke genezing
- de anatomische vorm vereenvoudigt het behandelen van moeilijk bereikbare plaatsen zoals de hiel, elleboog of een amputatiestomp (Suprasorb P Heel non-adhesive)

Opmerkingen

Interval tussen verbandwisselingen:

- wordt op basis van de wondsituatie, de mate van exsudatie en het secundaire verband door de behandelend arts bepaald, uiterlijk na 5-7 dagen. Zodra de verkleuring de wondrand bereikt, moet het verband worden verwisseld
- Suprasorb P kan als secundair verband worden gebruikt in het kader van de reguliere antimicrobiële behandeling bij aan infecties blootgestelde wonden
- in droge toestand is Suprasorb P gemakkelijk op maat te knippen voor de specifieke wond. Het verband moet de wond ongeveer 2 cm overlappen

Uitvoeringen

- zelfklevend
- niet-klevend
- sacrum
- heil

Suprasorb® P

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
zelfklevend				
7,5 x 7,5	4 x 4	20416	2975936	10/100
10 x 10	6 x 6	20417	2975944	10/100
15 x 15	10 x 10	20418	2975951	5/50
20 x 15	15 x 10	20419	2975910	5/50
niet-klevend				
5 x 5	5 x 5	20405	2975860	10/100
7,5 x 7,5	7,5 x 7,5	20406	2975878	10/100
10 x 10	10 x 10	20407	2975886	10/100
15 x 15	15 x 15	20408	2975894	5/50
20 x 15	20 x 15	20409	2975902	5/50
sacrum, zelfklevend				
20,5 x 18	14,3 x 12	20415	2975928	5/50
talon (heel), niet-klevend				
13 x 10	13 x 10	180040	4393690	5/120

* Suprasorb® P niet-klevend.

Suprasorb® P Sensitive

Siliconenschuimverband.



Suprasorb® P Sensitive

Toepassingsgebieden

- voor het behandelen van de volgende wonden:
 - ◆ acute en chronische wonden
 - ◆ licht tot matig exsuderende wonden
 - ◆ oppervlakkige en diepe wonden (in combinatie met een primair wondverband)
- indicaties:
 - ◆ decubituswonden
 - ◆ been- en voetulcers
 - ◆ traumatische wonden
 - ◆ operatiewonden
 - ◆ huidafnameplekken en huidontvangende plekken
 - ◆ huidscheuren
 - ◆ eerste- en tweedegraads brandwonden
- kan in combinatie met gels ook op droge of necrotische wonden worden gebruikt.

Eigenschappen

- de wondcontactlaag van silicone is geschikt voor de gevoelige huid
- minimaliseert pijn bij de patiënt, en het trauma voor de wond en omliggende huid bij het verwijderen of opnieuw positioneren van het verband
- efficiënt exsudaatmanagement vermindert het maceratie-risico en zorgt voor een vochtig wondmilieu.
- bestand tegen douchen
- de eenvoudige toepassing met twee of drie aftrekbare beschermfolies voorkomt dat de kleeflaag met handschoenen wordt aangeraakt
- bijzonder soepel aan te brengen, ook op moeilijke plaatsen
- zacht voor de huid

Uitvoeringen

- border (met superabsorberende absorptiekern)
- border lite (zonder superabsorberende absorptiekern)
- non-border (zonder superabsorberende absorptiekern)
- heel (met superabsorberende absorptiekern)
- sacrum (met superabsorberende absorptiekern)
- multisite border (met superabsorberende absorptiekern)
- multisite border lite (zonder superabsorberende absorptiekern)

Suprasorb® P Sensitive

Siliconenschuimverband.

Suprasorb® P Sensitive

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
border (met superabsorberende absorptiekern)				
8,5 x 7,5	5 x 4,5	139068	3954971	10/200
10 x 10	6,2 x 6,2	139061	3954955	10/200
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	139062 / 168062	3954963	10/200
15 x 15	10,5 x 10,5	139069 / 168069	3954989	10/150
20 x 20	15 x 15	139070	3954997	10/100
border lite (zonder superabsorberende absorptiekern)				
5 x 5	2,5 x 2,5	139080	3955002	10/240
10 x 5	6 x 2,5	139081	3955010	10/200
8,5 x 7,5	5 x 4,5	139086	3955036	10/200
10 x 10	6,2 x 6,2	139083	3955028	10/200
15 x 9	10,5 x 5	139087 / 168087	3955044	10/200
20 x 10	15 x 5	139088	3955051	10/150
non-border (zonder superabsorberende absorptiekern)				
5 x 5		139350	3955069	10/240
7,5 x 7,5		139455	3955119	10/150
10 x 10		139351	3955077	10/100
20 x 10		139352	3955085	10/150
15 x 15		139353	3955093	10/100
20 x 15		139456	3955127	10/100
20 x 20		139354	3955101	10/100
sacrum (met superabsorberende absorptiekern)				
17,5 x 17	12,5 x 12	139355	3955135	10/100
23 x 23	17 x 16,5	139556	3955168	10/100
hiel (heel) (met superabsorberende absorptiekern)				
25 x 23,5	19 x 17,5	139356	3955143	10/100
multisite border (met superabsorberende absorptiekern)				
15 x 12	10 x 7	139357 / 168357	3955150	10/100
7,5 x 9,5	5,5 x 3,5	142075 / 168075	4344487	10/300
16 x 20	15,5 x 11,5	142076 / 168076	4344503	10/200
multisite border lite (zonder superabsorberende absorptiekern)				
7,5 x 9,5	5,5 x 3,5	142077 / 168077	4344511	10/300
tracheo				
10 x 9		146244	4843652	1/100

* in geval van diepe wonden, combineren met een geschikt vulmiddel.

Suprasorb® P + PHMB

Antimicrobieel PU-schuimverband.



Suprasorb® P + PHMB

Toepassingsgebieden

- matig tot sterk exsuderende wonden
- voor wonden met infectierisico en geïnfecteerde wonden
- voor oppervlakkige wonden
- indicaties:
 - ◆ been- en voetulcers
 - ◆ decubitus
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ postoperatieve chirurgische wonden

Eigenschappen

- betrouwbaar exsudaatmanagement
- brede antimicrobiële werking
- snelle en langdurige werking
- met geperforeerde wondcontactlaag
- vocht- en bacteriënwerend

Opmerkingen

- kan als secundair verband worden gebruikt in het kader van de reguliere antimicrobiële behandeling bij aan infecties blootgestelde en geïnfecteerde wonden.
- in droge toestand is Suprasorb P + PHMB gemakkelijk op maat te knippen voor de specifieke wond

Suprasorb® P + PHMB

steriel, afzonderlijk verpakt


Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 5	34540	3381738	10/100
7,5 x 7,5	34541	3381720	10/100
10 x 10	34542	3381712	10/100
10 x 20	34543	3381704	5/50
15 x 15	34544	3381696	5/50
20 x 20	34545	3381688	5/50

Suprasorb® X

HydroBalance-wondverband.



Suprasorb® X

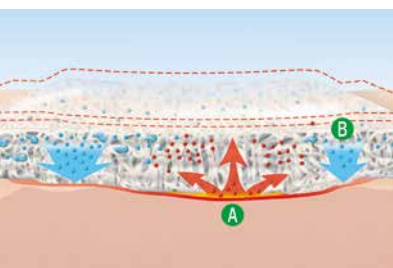

- A** Overtollig wondexsudaat wordt in het verband opgenomen.
- B** Vocht uit het verband wordt aan de licht exsuderende wond afgegeven.

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van niet-geïnfekteerde wonden, als deze zwak tot matig exsuderend, oppervlakkig of diep zijn.
- indicaties:
 - ◆ arteriële en veneuze ulcera
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ drukzweren
 - ◆ oppervlakkige tweedegraads brandwonden
 - ◆ postoperatieve chirurgische wonden
 - ◆ huidtransplantaties
 - ◆ split-skin-afnameplekken
 - ◆ schaafwonden, laceraties

Eigenschappen

- pijnvermindering zonder farmacologische toevoeging
- zeer goede wondgenezing door uniek HydroBalance-effect (vochtregulatie)
- hoog draagcomfort dankzij de bijzonder zachte en soepele structuur
- hoge kostenbesparing door langere intervallen tussen verbandwisselingen
- ondersteuning van de wondgenezing
- betere cosmetische resultaten (littekenvorming)

Productsamenstelling

Cellulose, water.

Opmerkingen

Interval tussen verbandwisselingen:

- wordt door de behandelend arts afhankelijk van de wondsituatie bepaald.

Uitvoeringen

- kompres
- wiek

Tip

Als het verband opdroogt, moet een afdoende rehydratatie plaatsvinden met een inwerktijd van minstens 10 minuten voordat het verband wordt verwijderd

Suprasorb® X

steriel, afzonderlijk verpakt


Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
kompres			
5 x 5	20534	2355329	5/90
9 x 9	20531	2355352	5/80
14 x 20	20532	2355345	5/65
wiek			
2 x 21	20533	2355337	5/130

Suprasorb® X + PHMB

Antimicrobieel HydroBalance-wondverband.



Suprasorb® X + PHMB

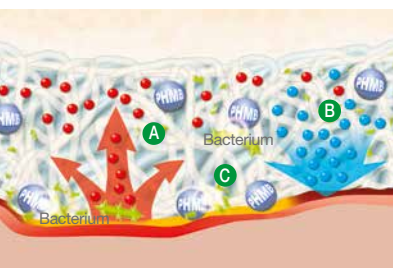

- A** Overtollig wondexsudaat wordt in het verband opgenomen.
- B** Vocht uit het verband wordt aan de licht exsuderende wond afgegeven.
- C** Doding van micro-organismen door het vrijkomende polyhexamethyleenbiguanide (PHMB).

Toepassingsgebieden

- voor de verzorging van wonden met een verhoogd infectierisico of geïnfecteerde wonden, als deze zwak tot matig exsuderend, oppervlakkig of diep zijn.
- indicaties:
 - ◆ arteriële en veneuze ulcera
 - ◆ diabetische ulcera
 - ◆ drukzweren
 - ◆ oppervlakkige tweedegraads brandwonden
 - ◆ postoperatieve chirurgische wonden
 - ◆ huidtransplantaties
 - ◆ split-skin-afnameplekken
 - ◆ schaafwonden, laceraties

Eigenschappen

- vocht kan aan de wond worden afgegeven of overmatig exsudaat kan worden opgenomen
- creëren van een vochtig wondmilieu
- atraumatische verbandwisseling
- eenvoudig aan te passen aan de betreffende wondvorm en wonddiepte
- bijzonder geschikt voor moeilijk te verzorgen lichaamsdelen
- het vochtige milieu heeft een verkoelend effect en wordt door patiënten als aangenaam en pijnstillend ervaren.
- antimicrobiële werking tegen een breed spectrum van ziekteverwekkers zoals MRSA en VRE*

Productsamenstelling

water, cellulose, 0,3% polyhexamethyleenbiguanide (PHMB/polyhexanide).

Opmerkingen

- bij de behandeling van geïnfecteerde wonden mag het wondverband niet als enige therapeutische maatregel worden ingezet, maar moet dit naar beoordeling van de behandelende arts in overeenstemming met de lokale klinische protocollen worden aangevuld met een medicamenteuze behandeling.

Wend u tot een arts of verpleegkundige als de volgende symptomen zich voordoen:

- verandering van kleur en/of geur van de wond
 - stagnerende wondgenezing
 - klinische tekenen van een infectie
- Interval tussen verbandwisselingen:
- de intervallen tussen wisselingen van Suprasorb X + PHMB worden afhankelijk van de wondsituatie door de behandelend arts bepaald

Uitvoeringen

- kompres
- wiek

Tip

Als het verband opdroogt, moet een afdoende rehydratie plaatsvinden met een inwerktijd van minstens 10 minuten voordat het verband wordt verwijderd

Suprasorb® X + PHMB

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
kompres			
5 x 5	20540	2355311	5/90
9 x 9	20541	2355303	5/80
14 x 20	20542	2355295	5/65
wiek			
2 x 21	20543	2355287	5/130

* Spectrum van ziekteverwekkers in vitro aangetoond.

Lomatuell® Pro

Gelvormend contactnetwerk.



Lomatuell® Pro

Toepassingsgebieden

- kan worden gebruikt tijdens alle fasen van exudatiefasen
- chronische wonden
 - ◆ ulcus cruris
 - ◆ diabetische voetulcers
 - ◆ decubitus
- acute wonden
 - ◆ scheur-, snij- en schaafwonden
 - ◆ tweedegraads verbrandingen
- postchirurgische wonden
 - ◆ secundair genezende operatiewonden
 - ◆ split-skin-afnameplekken
- met onderdruktherapie als wondafstandsgaas te combineren*

Eigenschappen

- opbouw van een laagje gel van vaseline en hydrocolloïddeeltjes
- atraumatische verbandwissel
- eenvoudige toepassing
- aan beide zijden te gebruiken
- kan op maat worden geknipt voor diverse wondafmetingen en lichaamsgebieden
- ondersteuning van de wondgenezing
- het risico van aan de wond kleven, wordt geminimaliseerd
- flexibel, soepel materiaal
- goede afvloeiing van exsudaat in het secundaire verband
- vrijwel pijnloze verbandwisseling

Productsamenstelling

Polyestervezel-netstructuur geïmpregneerd met een coatings-massa bestaande uit polymeermatrix (een elastische, vevormbare fixatie-massa), vaseline en hydrocolloïd.

Opmerkingen

- het aanbevolen interval tussen verbandwisselingen bedraagt over het algemeen 2-4 dagen. Afhankelijk van het type wond en het verloop van de wondgenezing kan het verband langer (maximaal 7 dagen) of korter op de wond blijven

Lomatuell® PRO

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 5	30870	3048758	10/360
10 x 10	30871	3048766	10/120
10 x 20	30872	3048774	10/120
10 x 30	30873	3048782	10/80
10 x 10	30874	3210309	50/450
10 x 40	220000	4135273	10/120
15 x 20	220001	4135281	10/50
15 x 30	220002	4135299	5/55

* gebaseerd op in-vitro-onderzoeken

Lomatuell® H

Zalftule, hydrofoob.



Lomatuell® H

Toepassingsgebieden

- skinafnameplekken
- ulcus cruris
- decubitus
- verbrandingen
- snijwonden
- schaafwonden

Eigenschappen

- bevordert de afvoer van exsudaat en beschermt oppervlakkige wonden tegen vastkleven
- vermindert het risico van vastkleven aan de wond*
- geïmpregneerd met witte vaseline
- ondersteunt het natuurlijke genezingsproces
- geeft rust aan de wond
- kan op maat worden geknipt

Productsamenstelling

Katoen (grofmazig geweven tule) en witte vaseline, afgedekt met pergamijs-papier.

Lomatuell® H

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 5	23314	1685197	10/360
10 x 10	23315	0433870	10/120
20 x 10	23316	0433888	10/120
30 x 10	23317	0433896	10/80
10 x 10	23318	0433904	50/450

* Gebaseerd op in-vitro-onderzoeken

Vliwasorb® Pro

Superabsorberend wondverband.



Vliwasorb® Pro

Toepassingsgebieden

Matig tot zeer sterk exsuderende wonden, oppervlakkige wonden die acuut of chronisch zijn zoals:

- decubituswonden, arteriële ulcera, veneuze ulcera aan het onderbeen, diabetische ulcera
- postoperatief secundair genezende wonden
- posttraumatische wonden
- split-skin-afnameplekken
- oncologische wonden
- ulcererende tumoren
- wonden met infectiegevaar
- oppervlakkige tweedegraads brandwonden
- en als secundair verband bv. op laparotomiewonden en op fistels

Eigenschappen

- zeer hoge resorptie- en bindingscapaciteit voor wondexsudaat en de zich daarin bevindende bacteriën
- effectief exsudaatmanagement ook onder compressie
- ergonomische vorm voor een goede modellering
- flexibele wondcontactlaag maakt atraumatische verbandwissel mogelijk
- blauwe bescherm laag beschermt kleding en beddengoed

Productsamenstelling

Polyethyleen, polypropyleen, cellulose, polyethyleentereftalaat, ethyleen-vinylacetaat-copolymeer, polyacrylaat.

Opmerkingen

- verband niet in stukken knippen

Vliwasorb® Pro

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 10	6 x 6	32640	3355997	10/300
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	32641	3359163	10/300
12,5 x 22,5	8,5 x 18,5	32642	3355989	10/350
22 x 22	18 x 18	32643	3355971	10/260
22 x 32	18 x 28	32644	3355963	10/90

Vliwasorb® Sensitive

Superabsorberend wondverband met silicone.



Vliwasorb Sensitive

Toepassingsgebieden

- matig tot sterk exsuderende wonden, waaronder:
 - ◆ ulcus cruris
 - ◆ decubitus
 - ◆ diabetische voetulcers
 - ◆ dehiscente postoperatieve wonden

Eigenschappen

- traumatische en pijnvrije verwijdering
- beschermt de wond en de wondomgeving
- hoog absorptie- en retentie-vermogen, ook onder compressie
- minder bacteriën door binding van het exsudaat in de superabsorber
- goede vormvastheid, ook bij verticale toepassing, door gecomprieeerde superabsorberende laag

Productsamenstelling

Silicone, vliesstof, polyacrylaat, cellulose.

Opmerkingen

- verband niet in stukken knippen

Vliwasorb® Sensitive

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7,5 x 7,5	5 x 5	141820	4258174	10/240
12,5 x 12,5	10 x 10	141821	4258182	10/160
10 x 20	7,5 x 17	141822	4258190	10/160
15 x 25	12 x 22	141823	4258208	10/80
20 x 20	17 x 17	141824	4258216	10/80
20 x 30	17 x 27	141825	4258224	10/80

Stellaline®

Niet klevend absorberend kompres.



Stellaline®

Toepassingsgebieden

- voor de bescherming van oppervlakkige wonden
- voor absorptie van wondexsudaat
- postoperatieve wondverzorging

Eigenschappen

- steriel
- niet klevend
- zacht en soepel
- zeer hoog absorptievermogen: nelle en verticale absorptie, dus risico op infectie sterk verminderd

Productsamenstelling

Dikke wattenlaag: 75 % viscose-25 % polyester

Laag die in contact komt met de wonde: een dunne micro geperforeerde, copolymeerfolie
Blauwe hydrofobe buitenlaag.

Stellaline®


steriel, afzonderlijk verpakt

	Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
Stellaline 1	5 x 5	36037	0452789	26/624
Stellaline 3	7,5 x 7,5	36038	0452797	12/288
Stellaline 5	10 x 10	36039	0452805	10/240
Stellaline 6	10 x 20	36045	0292573	5/120
Stellaline 1	5 x 5	36047	2091296	400/2400
Stellaline 5	10 x 10	36040	2091270	120/720
Stellaline 6	10 x 20	36041	2091288	50/300
Stellaline 1	5 x 5	17786	2225803	100/2900
Stellaline 3	7,5 x 7,5	17787	2225795	100/2500
Stellaline 5	10 x 10	17788	2225811	100/1600

Metalline® Kompres.



Metalline® Kompres

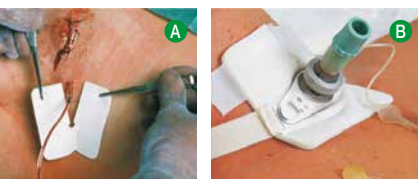

A Metalline® Drainkompres

B Metalline® Tracheokompres

Toepassingsgebieden

- ter afdekking van alle wonden, vooral aanbevolen voor:
 - ◆ schaafwonden
 - ◆ verbrandingen
 - ◆ brandwonden door zuur
 - ◆ operatiewonden
 - ◆ in het kader van de eerste hulp

Eigenschappen

- vermindert het risico van vastkleven aan de wond
- vrijwel pijnloze verbandwisseling
- ontziet de wond
- lucht- en waterdampdoorlatend
- soepel en zacht
- goede drainage

Productsamenstelling

Viscose (versterkt met acrylaat), de bovenlaag van het kompres is met aluminium gecoat.

Metalline® kompress

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
steriel, individueel verpakt, voor op recept en voor handverkoop			
8 cm x 10 cm	23083	0179671	10/560
10 cm x 12 cm	23084	0179689	10/300
steriel, individueel verpakt, voor op de OK, in de polikliniek of de praktijk, in dispenserdoos			
8 cm x 10 cm	23081		50/600
10 cm x 12 cm	23082		50/300
10 cm x 20 cm	23087		50/300

Metalline® Tracheo-kompres

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
steriel, individueel verpakt, in dispenserdoos			
8 x 9	23094	0845735	50/600

Metalline® Drainkompres

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
steriel, individueel verpakt, in dispenserdoos			
6 x 7	23093	0845727	50/600



Metalline® verbanddoek

Toepassingsgebieden

Metalline-verbandpakjes

- voor eerste hulp bij wonden met een groot oppervlak, bij spoedeisende hulp

Metalline-doek

- als onderlaag en voor afdekken van wonden met een groot oppervlak (voor gebruik steriliseren)

Metalline-laken

- als onderlaag bij open behandeling van brandwonden met een groot oppervlak, corrosiewonden en schaafwonden

Metalline-verbanddoek

- voor het verzorgen van letsels, brandwonden, corrosiewonden en schaafwonden met groot oppervlak, op de eerstehulpafdeling of bij spoedeisende hulp

Eigenschappen

- aluminiumgecoat vlies
- vermindert het risico van vastkleven aan de wond
- vrijwel pijnloze verbandwisseling
- ontziet de wond en is absorberend
- lucht- en waterdampdoorlatend
- soepel en zacht

Productsamenstelling

Viscose (versterkt met acrylaat)
De bovenlaag van het kompres is met aluminium gecoat, polyester.

Opmerkingen

Metalline-verbanddoek

- voor het fixeren van de doek zijn vier bandjes aangebracht.

Uitvoeringen

Metalline-verbandpakjes

Combinatie van:

- een Metalline-kompres (35 x 45 cm)
- een gaasverband (6 cm x 3 cm, viscose, katoenen naaigaren)

Metalline® -verbanddoek

steriel, in foliezak

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
40 x 60	23012	2204543	1/100
60 x 80	23010	0845693	1/100
80 x 120	23011	0845685	1/100

Metalline®-laken

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
2.5 x 73.0	23050	0845701	1/20

Metalline®-doek

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 73	23070		1/10

Gazin® Gaaskompressen

Gaaskompressen.



Gazin® Gaaskompressen

Toepassingsgebieden

- voor wondreiniging
- voor wondbedekking
- voor het afzuigen van lichaamsvloeistoffen

Eigenschappen

- van verbandgaas volgens DIN EN 14079
- 17- en 20-draads
- alle zelfkanten liggen aan de binnenzijde, dus geen randdraden
- goed absorptievermogen

Productsamenstelling

100% katoen
Röntgencontrastdraad (blauw gekleurd, polypropyleen, polyestergeren, bariumsulfaat).

Gazin® Gaaskompressen

niet-steriel, steriliseerbaar met waterdamp (134°C), in papieren zak

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
zonder röntgencontrastdraad, 17-draads, 8-voudig			
5 x 5	18500	1754555	100/1000
7,5 x 7,5	18503	1754589	100/1000
7,5 x 9	18522		100/1000
10 x 10	18506	1754605	100/1000
18 x 8	18524		100/600
zonder röntgencontrastdraad, 17-draads, 12-voudig			
5 x 5	18501	1754563	100/1000
7,5 x 7,5	18504	1754597	100/1000
10 x 10	18507	1754613	100/1000
10 x 12,5	18509		100/1000
zonder röntgencontrastdraad, 17-draads, 16-voudig			
5 x 5	18502		100/1000
7,5 x 7,5	18505		100/1000
7,5 x 9	18525		100/1000
10 x 10	18508	1754621	100/1000
10 x 12,5	10956		100/800
18 x 8	18526		100/600
met röntgencontrastdraad, 17-draads, 12-voudig			
7,5 x 7,5	18511	1754662	100/1000
10 x 10	18514	1754647	100/1000
10 x 12,5	18516		100/1000
met röntgencontrastdraad, 17-draads, 16-voudig			
5 x 5	10972	1754571	100/1000
7,5 x 7,5	18512		100/1000
10 x 10	18515	1754639	100/1000
10 x 12,5	10957		100/800
18 x 8	10961		100/600

Gazin® Gaaskompressen

Gaaskompressen.

Gazin® Gaaskompres

steriel, zonder röntgencontrastdraad

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
verpakkingen à 2 kompressen, 8-voudig, 17-draads			
5 x 5	13620	4499570	100/1800
7,5 x 7,5	13621	4499588	100/1800
10 x 10	13622	4499596	100/2000
10 x 20	13623	4499604	100/800
verpakkingen à 5 kompressen, 16-voudig, 17-draads			
5 x 5	13670		250/3000
7,5 x 7,5	13671		100/1200
10 x 10	13673		100/1000
18 x 8	13675		125/1000
verpakkingen à 10 kompressen, 16-voudig, 17-draads			
5 x 5	13680		300/3600
7,5 x 7,5	13681		100/1200
10 x 10	13683		100/1000
18 x 8	13685		120/960
splitkompressen met Y-vormige split, verpakkingen à 2 kompressen, 8-voudig, 17-draads			
7,5 x 7,5	13521	4499612	100/1800
10 x 10	13522	4499620	100/2000

Stella® Steriele kompressen

Kompressen apotheek: individueel verpakt.



Stella® Steriele kompressen

Toepassingsgebieden

- gaaskompressen voor wondbedekking en reinigen van wonden

Eigenschappen

- kompressen van 8 en 12 lagen
- bij deze kompressen zijn alle losse naden naar binnen geplooid, zodat het kompres na éénmalige (8 lagen) of tweemaalige (12 lagen) ontplooiing geen rafelkant vertoont

Productsamenstelling

100% katoen, chirurgisch geplooid met ingeslagen rafelkant peelpack zakjes.

Stella® Steriele kompressen

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
Stella 1: 5 x 5	35001	0825240	40/960
Stella 3: 7,5 x 7,5	35003	0825265	20/480
Stella 5: 10 x 10	35005	0825281	12/288
Stella 1D: 5 x 5	36301	0198440	30/720
Stella 5D: 10 x 10	36305	0198465	10/240
Stella 6D: 10 x 20	36306	0016196	5/120

Stella® Steriele kompressen

Gegroepeerde steriele kompressen.

Toepassingsgebieden

- gaas kompressen voor wondbedekking, reinigen van wonden

Productsamenstelling

100 % katoen.

Eigenschappen

- in een zachte of harde blisterverpakking die zich zeer makkelijk laat openen, zonder dat er losse vezeltjes vrijkomen
- gesteriliseerde kompressen met verschillende afmetingen en lagen, met of zonder bariumdraad

Stella® Steriele kompressen

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
Stella 1/1: 5 x 5	35867	1446673	100/2900
Stella 1/2: 5 x 5	35801	0398479	180/1080
Stella 1/3: 5 x 5	35804	0398487	120/720
Stella 1D/3: 5 x 5	35805	1446665	120/720
Stella 1/5: 5 x 5	35807	0398495	80/480
Stella 1DXR5: 5 x 5	35809	2191304	80/480
Stella 3/1: 7,5 x 7,5	35835	1446681	100/2500
Stella 3/2: 7,5 x 7,5	35965	0398529	140/840
Stella 3/3: 7,5 x 7,5	35932	0398545	80/480
Stella 3/5: 7,5 x 7,5	35968	0398503	55/330
Stella 3/10: 7,5 x 7,5	35969	1446699	26/156
Stella 3DXR/5: 7,5 x 7,5	35812	2091312	40/240
Stella 3DXR/10: 7,5 x 7,5	35863	2091353	20/120
Stella 4/5: 7,5 x 10	35864	1446707	40/240
Stella 5/1: 10 x 10	35845	1446731	100/1600
Stella 5/2: 10 x 10	35935	0398586	80/480
Stella 5/3: 10 x 10	35937	0398602	60/360
Stella 5/5: 10 x 10	35813	0398560	30/180
Stella 5D/5: 10 x 10	35814	0398578	30/180
Stella 5D/10: 10 x 10	35816	1446715	15/90
Stella 5DXR/5 DE: 10 x 10	35850	2091346	24/48
Stella 5DXR/5: 10 x 10	35815	2091320	30/180
Stella 5DXR/10: 10 x 10	35865	2091361	15/90
Stella 5DXR/10 DE: 10 x 10	35918	2091379	12/24
Stella 6DXR/10 DE: 10 x 20	35921	2205318	12/24
Stella 6D/5: 10 x 20	35947	0248609	15/90
Stella 6DXR/5: 10 x 20	35991	2091403	15/90
Stella 6DXR/10: 10 x 20	35995	2091411	8/48

Legende

Stella 5 S XR/ 10 DE

a b c d e

a

formaat van het kompres

- 1 = 5 x 5 cm
- 2 = 5 x 7,5 cm
- 3 = 7,5 x 7,5 cm
- 4 = 7,5 x 10 cm
- 5 = 10 x 10 cm
- 6 = 10 x 20 cm

b

dikte van het gaas

- D = 12 lagen
- S = 16 lagen

c

XR = met radio-detecteerbare draad

d

/10 = aantal kompressen in een zakje of blister

e

DE = dubbele verpakking

Gazin®-tamponverband



Toepassingsgebieden

- voor chirurgisch-invasieve, kortdurende wondverzorging bij operatieve ingrepen
- voor tamponnade van wondholtes en fistelgangen

Eigenschappen

- van verbandgaas volgens DIN EN 14079
- goed absorptievermogen

Productsamenstelling

100 % katoen.

Gazin® -tamponverband

steriel, gerold, in kunststof dispenser, 1-voudig

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 1	13470	3768207	1/216
5 x 2	13471	4117321	1/120
5 x 5	13473	4117339	1/60

Deppers

Deppers van hydrofiel gaas.

Toepassingsgebieden

- absorptie van lichaamsvocht en toepassing met antiseptische oplossing
- tijdens chirurgische ingrepen,
- postoperatieve verzorging van wonden in het ziekenhuis of thuis
- verzorging van chronische wonden (been ulcus, doorligwonden...)

Eigenschappen

- ronde deppers
- samengehouden met een elastiek om de vorm te bewaren en contact van vrije vezels met de wonde te voorkomen
- de structuur van de depper zorgt voor een maximale absorptie van lichaamsvocht, evenals een optimale verdeling van de antiseptische of medicamenteuze oplossingen
- ronde vorm vergemakkelijkt het vastnemen met het verzorgingsinstrument en vermindert het risico op contact van het instrument met de wonde
- verkrijgbaar in bulk (niet steriel) of verpakt in soepele of rigide blisterverpakking (steriel)

Productsamenstelling

van hydrofiel gaas, bestaande uit twee lagen gaas.

Deppers van hydrofiel gaas

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet steriel, non woven			
tampon N/W 62: 30 - 35	35614	2091452	1000/3000
tampon N/W 64: 50 - 55	35616	2091460	500/1500
steriel, gegroepeerd			
tampon 63/2: 40 - 45	35911	1461284	6/240
tampon 62/3: 30 - 35	35925	1461300	6/240
tampon 62/5: 30 - 35	35941	1378751	6/240
tampon 63/5: 40 - 45	35943	1461326	6/210

Gazin® Deppers van verbandgaas



Gazin® Deppers van verbandgaas

Toepassingsgebieden

- voor wondreiniging
- voor desinfectie van de huid
- steriele deppers voor het absorberen van bloed en afscheiding bij kleinere operatieve ingrepen

Eigenschappen

- van verbandgaas volgens DIN EN 14079
- met veiligheidsring van silicone
- 20-draads
- absorberend

Productsamenstelling

100% katoen
Röntgencontrastdraad (blauw gekleurd, polypropyleen, polyester, bariumsulfaat)
De veiligheidsring bestaat uit silicone.

Uitvoeringen

- met röntgencontrastdraad
- zonder röntgencontrastdraad

Gazin® Deppers van verbandgaas

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet-steriel, zonder röntgencontrastdraad, 20-draads, in foliezak			
walnootgroot	15175	3185733	1000/5000
pruimgroot	15176	3185725	1000/5000
eigroot	15177	3185782	500/2500
extra groot	15179	3185774	500/2000
vuistgroot	15180		250/1000
steriel, zonder röntgencontraststreep, 20-draads, in papier/folie			
pruimgroot, à 2+3	14962		125/1250
niet-steriel, met röntgencontrastdraad, 20-draads, in foliezak			
walnootgroot	15183	3244100	1000/5000
pruimgroot	15184	3185766	1000/5000
eigroot	15185	3185758	500/2500
extra groot	15186	3185741	500/2000
vuistgroot	15223		250/1000

Gazin® Prepareerdeppers X-ray



Gazin® Prepareerdeppers

Toepassingsgebieden

- na voorafgaande sterilisatie bedoeld voor gebruik in de OK
- voor het prepareren van weefsellagen en anatomische structuren

Eigenschappen

- niet-steriel
- van verbandgaas volgens DIN EN 14079
- 24-draads
- stevig en sterk absorberend

Productsamenstelling

100 % katoen, röntgencontrastdraad (blauw gekleurd, polypropyleen, polyester garens, bariumsulfaat).

Gazin® Prepareerdeppers

niet-steriel, met röntgencontrastdraad, 24-draads, steriliseerbaar met waterdamp (134°C), in foliezak

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
maat 2, klein	15155		1000/3000/45000
maat 3, middel	15156		1000/2000/30000
maat 4, groot	15157		500/1000/15000



Toepassingsgebieden

- na voorafgaande sterilisatie bestemd voor gebruik in de OK
- voor het vasthouden en terugtrekken van organen en lichaamsweefsels
- voor bloedstelping en het absorberen van lichaamsvocht tijdens operatieve ingrepen

Eigenschappen

- onsteriel
- van verbandgaas volgens DIN EN 14079
- voorgewassen
- zacht en absorberend
- 20-dradig

Productsamenstelling

100 % katoen; röntgencontrastchip (polyvinylchloride en bariumsulfaat).

Opmerkingen

- contra-indicatie: gebruik het medische hulpmiddel tijdens een cardio-thoracale chirurgie in combinatie tegelijkertijd met een extracorporale machine voor extracorporale circulatie (ECC)

Uitvoeringen

- wit
- 4- en 6-lagig

Toptex® Lite buikdoeken RK

niet steriel

Inhoud	Afmetingen (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
wit			
4 diktes	40 x 40	10923	90/180
6 diktes	40 x 40	10924	75/150
4 diktes	20 x 30	10922	80/480
4 diktes	50 x 60	10925	60/120
4 diktes	8 x 90	10921	100/600

* opgerold in een strook van 5 stuks



Opraclean®

Toepassingsgebieden

- voor de antiseptische tamponnade en drainage na chirurgische infectiesanering, met fistels gepaard gaande abscessen, zweren, wond- en lichaamsholtes

Eigenschappen

- antiseptische werking bevestigd voor *Stafylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Candida albicans*
- ondersteunt wondreiniging dankzij absorberen van wondexsudaat en celdébris
- diepe wonden en wondholtes kunnen worden uitgetamponneerd
- geen resistentieontwikkeling bekend
- snel en eenvoudig in het gebruik

Productsamenstelling

100% katoen (gaas), geïmpregneerd met jodoform.

Opmerkingen

- in dispenser
- jodoform vervluchtigt aan de lucht, daarom na opening zo snel mogelijk opgebruiken

Uitvoeringen

- Opraclean-gaasverband voor tamponnade, met jodoform (23 mg/100 cm²)
- Opraclean Verbandgaas met jodoform (57 mg/100 cm²)

Opraclean® Gaasverband voor tamponade met jodoform

gerold in doorzichtige dispenser, in speciale zak

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 1	13580	1508019	1/216
5 x 2	13581	1508027	1/120
5 x 5	13582	1508035	1/60

Opraclean® Verbandgaas met jodoform

4-voudig gevouwen, in rolhouder, in speciale zak

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 6	13584		1/30
5 x 8	13585		1/30



Vliwasoft®

Toepassingsgebieden

- voor het verzorgen van licht tot matig exsuderende wonden
- als wondverband
- voor wondreiniging
- als zalfdrager
- als polster tussen tenen en vingers

Eigenschappen

- van niet-rafelende vliesstof met fijne poriën
- behoedzame wondreiniging
- goede absorptie

Productsamenstelling

Viscose, polyester.

Vliwasoft®

Fleecekompressen

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet-steriel, 4-laags, 100 stuks in papieren zak			
5 x 5	12075	2085413	100/5000
7,5 x 7,5	12081	2085421	100/2500
10 x 10	12064	2085405	100/2000
20 x 10	12070		100/1000
niet-steriel, 6-laags, 100 stuks in papieren zak			
5 x 5	12078		100/5000
7,5 x 7,5	12084		100/2000
10 x 10	12067		100/2000
20 x 10	12072		100/1000
steriel, 4-laags, verpakkingsinhoud: 75 x 2 kompressen, per paar verzegeld			
5 x 5	12076	2761583	150/3000
7,5 x 7,5	12082	2761617	150/3000
10 x 10	12065	2761682	150/3000
20 x 10	12071	2761740	150/1500
steriel, 6-laags, verpakkingsinhoud: 50 x 2 kompressen, per paar verzegeld			
5 x 5	12079		100/2000
7,5 x 7,5	12085		100/2000
10 x 10	12068	4499562	100/2000
20 x 10	12073	3785136	100/1000

Vliwasoft®

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
steriel, 4-laags, verpakkingsinhoud: 50 x 5 kompressen			
5 x 5	12077	2837862	250/6750
7,5 x 7,5	12083	2837847	250/4500
10 x 10	12066	2837854	250/2500

Vliwasoft® Splitkompressen met Y-vormige split

steriel, per paar verzegeld, 50 x 2 kompressen

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7,5 x 7,5	12099	2337897	100/2000
10 x 10	12098	2337889	100/2000

Cotopads® by Velpeau®

Katoenen vierkanten en rechthoeken.



Cotopads® by Velpeau®

Toepassingsgebieden

- voor verpleegkundige verzorging en persoonlijke hygiëne : reinigen van de huid, aanbrengen van zalf, in dermatologie en voor het absorberen van lichaamsvloeistoffen bij oppervlakkige wonden of injectieplaatsen

Productsamenstelling

100 % katoen.

Eigenschappen

- zacht
- geurloos
- minimaal absorptievermogen : 10 g/g.
- producten die niet zijn gemaakt van grondstoffen die natuurlijke latex bevatten



Cotopads® by Velpeau®

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 5	90000	4297933	500/12000
8 x 10	90001	4297941	200/3200

Sterk absorberend wondverband.



Vliwazell®

Toepassingsgebieden

- voor absorptie van wondexsudaat bij oppervlakkige, matig tot sterk exsuderende wonden
- voor het behandelen van acute en chronische wonden

Eigenschappen

- sterk absorberend wondverband
- geïntegreerde verdeellaag voor gelijkmatige verdeling van wondexsudaat
- een kledingbeschermend vlies vermindert het doordringen van wondexsudaat
- vermindert het risico van vastkleven aan de wond
- is zacht en flexibel
- beschermt tegen doordringen van wondexsudaat

Productsamenstelling

Polypropyleen, cellulose.

Vliwazell®

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
steriel, individueel verpakt, inhoud doos: 25 kompressen			
10 x 10	20320	1741156	25/400
steriel, individueel verpakt, inhoud doos: 30 kompressen			
10 x 20	30451	2430585	30/300
15 x 20	30452	2430593	30/180
15 x 25	30453	2430619	30/240
20 x 20	30454	2430627	30/120
20 x 25	30455	2430635	30/150
niet steriel, 25 stuks in foliezak			
10 x 10	30430	2204329	25/900
10 x 20	30431	2271443	25/450
15 x 20	30432		25/200
15 x 25	30433		25/200
20 x 20	30434	2430544	25/200
20 x 25	30435		25/150
20 x 40	30436	2430569	25/200
steriel, individueel verpakt, inhoud doos: 60 kompressen			
10 x 10	30450	2430577	60/360
steriel, individueel verpakt, inhoud doos: 30 kompressen			
20 x 40	30456	2550135	30/180

Vliwazell® Pro

Absorberend verband met superabsorber.



Vliwazell® Pro

Toepassingsgebieden

- voor het behandelen van acute en chronische wonden, matig tot sterk exsuderende, oppervlakkige en diepe** wonden, bij:
 - ◆ arteriële en veneuze ulcers, diabetische ulcers
 - ◆ decubitus
 - ◆ posttraumatische wonden
 - ◆ postoperatief secundair genezende wonden
 - ◆ split-skinafnameplekken
 - ◆ oncologische wonden
 - ◆ ulcererende tumoren
 - ◆ wonden met infectiegevaar
 - ◆ oppervlakkige tweedegraads brandwonden
 - ◆ lymfatische wonden
 - ◆ en als secundair verband op laparotomiewonden en op fistels.

Eigenschappen

- zeer goede absorberende prestaties
- zeer hoge absorptiecapaciteit (ook onder compressie te gebruiken)
- atraumatische verbandwissel*
- hoge resorptiecapaciteit - daardoor een hoge absorptie- en bindingscapaciteit voor wondexsudaat en de zich daarin bevindende bacteriën
- stabiel vormbehoud leidt tot meer comfort bij de patiënt
- eenvoudig te modelleren en fixeren
- praktische beschermklaag beschermt kleding en beddengoed voor doorlekken

Productsamenstelling

Viscose, polyamide, celstof, polyethyleen, polyethyleentereftalaat, ethyleen-vinylacetaat-copolymeer, polyacrylaat, polypropyleen, Hotmelt-kleefstrips.

Opmerkingen

- verband niet in stukken knippen

Vliwazell® Pro

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 10	109460	3697893	10/240
10 x 20	109461	3697901	10/120
15 x 20	109462	3697919	10/80
20 x 25	109463	3697927	10/100
20 x 40	109464	3706587	10/100

* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens.

** Vliwazell Pro kan ook als secundair verband in combinatie met een geschikte wondvulling (bv. Suprasorb Liquacel, Suprasorb A Pro, Suprasorb A+ Ag Pro) worden gebruikt voor het behandelen van diepe wonden.

Absorberend kompres met actieve kool.



Vliwativ®

Toepassingsgebieden

- oppervlakkige wonden
- matig tot sterk exsuderende wonden
- stinkende en/of geïnfecteerde wonden
- als secundair verband in combinatie met Suprasorb Liquacel hydroactief vezelverband, Suprasorb A Pro-calciumalginaatverband, Suprasorb A+Ag Pro antimicrobiële calciumalginaatwondtampoon en Vliwaktiv Ag-wondtampoon met actieve kool en zilver.

Eigenschappen

- verminderd geur
- antibacteriële werkzaamheid tegen grampositieve bacteriën*
- goed absorptievermogen
- zacht en flexibel
- huidvriendelijk en luchtdoorlatend

Productsamenstelling

Actieve-koolvezels, viscose, polyamide, cellulose, polypropyleen, hotmeltlijm (synthetisch polymeer met harsen en wassen).

Opmerkingen

- niet knippen, anders kunnen partikels actieve kool in de wond terechtkomen

Vliwativ®

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 10	20254	1544774	20/400
10 x 20	20255	1544782	20/200

* Gebaseerd op in-vitro-gegevens

Vliwaktiv® Ag

Absorberend kompres, wondtampon en zilver.



Vliwaktiv® Ag

Toepassingsgebieden

- voor kritisch gekoloniseerde, geïnfecteerde en/of onwelriekende wonden
- voor wonden met verhoogd infectierisico
- absorberend kompres:
 - ◆ voor sterk exsuderende oppervlakkige wonden
- wiek:
 - ◆ voor het tamponneren van diepere wonden
 - ◆ als wondbedekking bij oppervlakkige wonden

Eigenschappen

- bindt wondgeur en wondexsudaat
- werkt antibacterieel in het wondverband dankzij het zilveraandeel (Ag)
- bindt endotoxines

Productsamenstelling

Actiefkool-vezels, geïmpregneerd met zilver, polyester/polyethyleen
Tevens in het absorberend kompres: polypropyleen, celstof, hotmeltlijm (synthetisch polymeer met harsen en wassen).

Opmerkingen

- niet knippen, anders kunnen partikels actieve kool in de wond terecht komen

Uitvoeringen

- absorberend kompres
- wiek

Vliwaktiv® Ag

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
wiek met actieve kool en zilver			
6,5 x 10	20700	2356947	10/300
10 x 10	20701	2356939	10/300
10 x 15	20702	2356921	10/340
absorberend kompres met actieve kool en zilver			
10 x 10	20705	2356905	10/150
10 x 20	20706	2356913	10/110
20 x 20	20707	2356897	10/130

Chirurgisch wondverband, steriel.



Curapor®

Toepassingsgebieden

- voor behandeling van postoperatieve, acute en oppervlakkige wonden, en ook snij- en scheurwonden
- licht tot matig exsuderende wonden

Eigenschappen

- luchtdoorlatend*
- huidvriendelijk
- gemakkelijk aan te brengen
- verlaagd risico op infectie (hechting rondom)
- afgeronde hoeken voor langere hechting
- bescherming tegen verontreinigingen en mechanische invloeden

Productsamenstelling

Steunvlies: wit, 100% polyester, polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten)
Wondkussen: absorptielaag van viscose en polyethyleen/polypropyleen, wondcontactlaag van polyethyleen.

Curapor®

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7 x 5	4 x 2,5	32902	3183407	5/100
7 x 5	4 x 2,5	32912	3178316	100/600
10 x 8	6 x 4	32903	3183399	5/100
10 x 8	6 x 4	32913	3178308	50/300
10 x 15	5 x 11	32914	3178290	50/300
10 x 20	5 x 16	32915	3178282	50/450
10 x 25	5 x 20	32916	3178274	50/250
10 x 30	5 x 25	32917	3178266	50/250
10 x 34	5 x 29	32918	3178258	50/300


*Gecontroleerd op waterdampdoorlaatbaarheid

Curapor® Transparent

Chirurgisch wondverband, steriel.



Curapor® Transparent

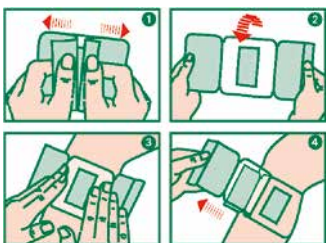

Wondverband is gemakkelijk aan te brengen.

- A** Eenvoudig het afdekpapier optillen en uit elkaar trekken ...
- B** Product omdraaien ...
- C** Zachtjes op de gereinigde huid aandrukken ...
- D** Steunfolie aftrekken — klaar!!

Toepassingsgebieden

- voor de steriele verzorging van postoperatieve wonden, verwondingen na een ongeluk en kleine snij- en schaafwonden
- voor minimaal invasieve chirurgie
- ter bescherming tegen secundaire infecties
- geschikt als afdekking bij douchen of zwemmen

Eigenschappen

- gebruiksklaar
- transparant en waterdicht
- luchtdoorlatend
- impermeabel voor bacteriën
- bestand tegen gebruikelijke desinfectiemiddelen
- hecht stevig en nauwsluitend
- restloos en relatief pijnloos te verwijderen
- gering risico van vastkleven aan de wond
- ook geschikt voor gevoelige huid

Productsamenstelling

Steunfolie: 100 % polyurethaan, huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten)
Wondkussen: absorptielaag van viscose/polyester, wondcontactlaag van polyester/polyethyleen.

Opmerkingen

- de afmetingen van 7x5cm en 10x8cm hebben afgeronde hoeken


Curapor® Transparent

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7 x 5	4 x 2,5	13099	2173003	5/120
10 x 8	6 x 4	13100	2172989	5/170
7 x 5	4 x 2,5	13101	2172997	50/500
10 x 8	6 x 4	13102	2172971	25/200
15 x 10	11 x 5	13103	2172963	25/225
20 x 10	16 x 5	13104	2172955	25/225
25 x 10	20 x 5	13105	2172948	25/225

Curafix® i.v. classic

Katheterfixatiepleister van textiel.

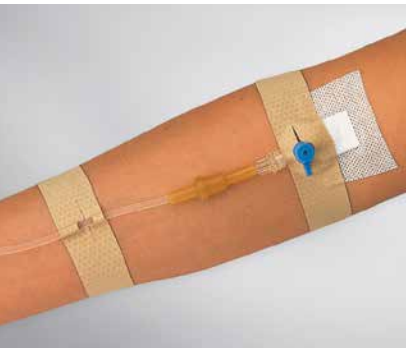

Curafix® i.v. classic

Toepassingsgebieden

- ter fixatie van infuuskatheters van uiteenlopende aard, en bijbehorende aanvoerslangen

Eigenschappen

- niet-steriel
- niet rekbaar
- hoge luchtdoorlaatbaarheid
- gestanst centraal gat en spleet, voor eenvoudige en snelle fixatie

Productsamenstelling

Steunweefsel: lichtbruin, viscose, huidvriendelijke synthetische rubberlijm.

Curafix® i.v. classic

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
12,5 x 2,5	30102	2462463	20/2000

Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm)

Pleister met zichtvenster voor het fixeren van canules.



Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm)

Toepassingsgebieden

- voor het fixeren van canules en katheters op de huid en als mechanische barrière als bescherming van de punctieplaats
- geschikt voor perifeer veneuze toegangen (PVK) in de pediatrie.

Eigenschappen

- vliesstof-folielaminaat met zichtvenster ter controle van de punctielocatie
- met extra steriel polsterkussen
- met contrafixatie
- hoge waterdampdoorlatendheid
- bevat geen latex
- pleister kan zonder resten worden verwijderd
- huidvriendelijk**
- afwasbaar met desinfectiemiddelen*
- kiem- en bacteriewerend
- laat geen water door
- goede en betrouwbare fixatie op de huid*

Productsamenstelling

Vliesstof: wit, polyester
Folie: polyurethaan, huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten).

Curafix® i.v. Junior (4,3 x 5 cm)

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
4,3 x 5	31883	3738382	100/600

* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens.

** De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens en gegevens uit de literatuur.

Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm)

Pleister van vliesstof voor het fixeren van canules.



Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm)

Toepassingsgebieden

- voor het fixeren van canules en katheters op de huid en als mechanische barrière als bescherming van de punctieplaats
- geschikt voor perifeer veneuze toegangen (PVK)

Eigenschappen

- met extra steriel polsterkussen
- goede en betrouwbare fixatie op de huid*
- huidvriendelijk**
- hoge waterdampdoorlatendheid
- bevat geen latex
- pleister kan zonder resten worden verwijderd
- rekbaar non-woven materiaal
- soepel
- veilige fixatie

Productsamenstelling

Vliesstof: wit, polyester, huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten)
Wondkussen: viscose/polypropyleen/polyethyleen, polyethyleenfolie.

Curafix® i.v. Soft (6 x 7,5 cm)

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
6 x 7,5	33696	3738390	50/400

* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens.

** De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens en gegevens uit de literatuur.

Curafix® i.v. Control (6 x 7,5 cm)

Pleister met zichtvenster voor het fixeren van canules.



Curafix® i.v. Control (6 x 7,5 cm)

Toepassingsgebieden

- voor het fixeren van canules en katheters op de huid en als mechanische barrière als bescherming van de punctieplaats
- geschikt voor perifeer veneuze toegangen (PVK)

Eigenschappen

- met extra steriel polsterkussen
- vliesstof-folielaminaat met zichtvenster ter controle van de punctielocatie
- hoge waterdampdoorlatendheid
- ademende folie
- bevat geen latex
- afwasbaar met desinfectiemiddelen
- kiem- en bacteriewerend
- laat geen water door
- veilige fixatie
- goede en betrouwbare fixatie op de huid*

Productsamenstelling

Vliesstof: wit, polyester
Folie: polyurethaan, huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten).

Curafix® i.v. control (6 x 7,5 cm)

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
6 x 7,5	33697	3738408	50/400

* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens.

Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)

Pleister met zichtvenster voor het fixeren van canules.



Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)

Toepassingsgebieden

- voor het fixeren van canules en katheters op de huid en als mechanische barrière als bescherming van de punctieplaats
- geschikt voor perifeer veneuze toegangen (PVK)

Eigenschappen

- vliesstof-folielaminaat met zichtvenster ter controle van de punctieplaats; met extra steriel polsterkussen; met contrafixatie
- hoge waterdampdoorlatendheid
- veilige fixatie
- bevat geen latex
- laag maceratiesisco*
- huidvriendelijk**
- pleister kan zonder resten worden verwijderd
- afwasbaar met desinfectiemiddelen
- kiem- en bacteriewerend
- laat geen water door
- goede en betrouwbare fixatie op de huid*

Productsamenstelling

Vliesstof: wit, polyester
Folie: polyurethaan, huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten).

Curafix® i.v. Control (5,5 x 6,5 cm)

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5,5 x 6,5	31886	3738416	100/400

* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens.

** De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens en gegevens uit de literatuur.

Curafix® i.v. Control (9 x 11 cm)

Pleister met zichtvenster voor het fixeren van canules.



Curafix® i.v. Control (9 x 11 cm)

Toepassingsgebieden

- voor het fixeren van canules en katheters op de huid en als mechanische barrière als bescherming van de punctieplaats
- geschikt voor centraal veneuze toegangen (CVK)

Eigenschappen

- vliesstof-folielaminaat met zichtvenster ter controle van de punctieplaats; met contrafixatie
- hoge waterdampdoorlatendheid
- röntgentransparant
- bevat geen latex
- laag maceratie-risico*
- huidvriendelijk**
- pleister kan zonder resten worden verwijderd
- afwasbaar met desinfectiemiddelen*
- kiem- en bacteriewerend
- laat geen water door
- goede en betrouwbare fixatie op de huid*

Productsamenstelling

Vliesstof: wit, polyester
Folie: polyurethaan, huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten).

Curafix® i.v. Control (9 x 11 cm)

steriel, afzonderlijk verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
9 x 11	34870	3738424	50/600

* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens.

** De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens en gegevens uit de literatuur.

Curaplast® Sensitive

Wondsnelverband.



Curaplast® Sensitive

Toepassingsgebieden

- ter verzorging van klein letsel in de kliniek, praktijk, in het huishouden en onderweg

Eigenschappen

- voor de gevoelige huid
- zacht en soepel
- enigszins elastisch overdwers
- past zich goed aan de lichaamscontouren aan
- fixeert het wondkussen stevig op de huid
- verlaagd risico van vastkleven aan de wond dankzij netfolie
- vrijwel pijnloze verbandwisseling
- doorlopend wondkussen
- kan op maat worden geknipt

Productsamenstelling

Steunlaagmateriaal: 100 % polyester, huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten)
Wondkussen: viscose, polypropyleen/polyethyleen, Netfolie van polyethyleen.

Curaplast® Sensitive Wondsnelverband

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
rol à 5 m, in dispenserdoos			
5 x 4	30616	2116853	1/36
5 x 6	30617	2116861	1/40
5 x 8	30618	2116879	1/24
10 stuken à 10 cm			
1 x 4	17077	2116820	1/47
1 x 6	17078	2116838	1/47
1 x 8	17079	2116846	1/36

Curaplast® Sensitive

Injectiepleister.



Curaplast® Sensitive

Toepassingsgebieden

- na puncties, injecties enz.

Eigenschappen

- huidvriendelijk
- zacht en soepel
- past zich aan lichaamscontouren aan
- zelfklevend steunmateriaal fixeert het wondkussen op de wond
- gering risico van vastkleven aan de wond dankzij netfolie
- klaar voor gebruik of voorgestanst
- los in doos of op rol in dispenserdoos



Curaplast® Sensitive, rond wondpleister

1 rol met 100 stuks

Diameter (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
2,3	1,2	30626	2392256	1/24

Curaplast® sensitive, injectiepleister

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 rol met 250 stuks				
2 x 4	1,5 x 2	30625	2337954	1/16
500 stuks, los in de doos				
4 x 2		142284	4340006	500/8000

Curaplast® Sensitive pleisterstrips



Curaplast® Sensitive pleisterstrips

Toepassingsgebieden

- ter verzorging van het kleinere dagelijkse letsel

Eigenschappen

- voor de gevoelige huid
- zacht en soepel
- enigszins elastisch overdwars
- past zich aan lichaamscontouren aan
- fixeert het wondkussen stevig op de huid
- gering risico van vastkleven aan de wond dankzij netfolie
- vrijwel pijnloze verbandwisseling
- diverse afmetingen
- centraal wondkussen

Productsamenstelling

Steunlaagmateriaal: lichtbruin, 100% polyester, huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten)
Wondkussen: viscose, polypropyleen/polyethyleen, Netfolie van polyethyleen.

Curaplast® Sensitive strips

Aantal	Component	Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid
20 strips in vouwdoos, afzonderlijk verzegeld						
10	strips	1,9 x 7,2	1,1 x 2,5	17083	3541554	1/45
4	strips	2,5 x 7,2	1,5 x 2,5			
4	strips	Ø 2,2	1,1 x 1,1			
2	strips	3,8 x 3,8	2 x 2			
500 strips in vouwdoos						
500	strips	2,5 x 7,2	1,5 x 25	30631	4262457	1/38

Curaplast® Sensitive vingerverband



Curaplast® Sensitive vingerverband

Toepassingsgebieden

- ter verzorging van het kleinere dagelijkse letsel

Eigenschappen

- voor de gevoelige huid
- zacht en soepel
- enigszins elastisch overdwers
- past zich aan lichaamscontouren aan
- fixeert het wondkussen stevig op de huid
- gering risico van vastkleven aan de wond dankzij netfolie
- vrijwel pijnloze verbandwisseling

Productsamenstelling

Steunlaagmateriaal: lichtbruin, 100 % polyester, huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten)
Wondkussen: viscose, polypropyleen/polyethyleen, netfolie van polyethyleen.

Curaplast® Sensitive vingerverband

10 stuks in vouwdoos

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
2 x 18	2 x 3	147540	2680015	1/40

Curaplast® Vochtbestendige pleisterstrips



Toepassingsgebieden

- eerstehulpproduct voor absorptie van exsudaat, en bescherming van wonden en wondoppervlakken

Eigenschappen

- vochtwerend
- luchtdoorlatend
- goede flexibiliteit
- plakt goed
- geschikt voor zwemmen en baden

Productsamenstelling

Steunlaagmateriaal: transparant, folie, met lijmcoating: polyurethaanfolie, gecoat met een polyacrylaatlijm
Wondkussen: wit, met lichtbruine stippen, viscose, polypropyleen, netfolie van polyethyleen.

Curaplast® Vochtbestendige pleisterstrips



Curaplast® Vochtbestendige pleisterstrips

20 stuks in vouwdoos, afzonderlijk hygiënisch verpakt

Aantal	Component	Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
12	strips	2,5 x 7,2	1,9 x 2,5	145150	4499901	1/196
8	strips	1,9 x 7,2	1,3 x 2,5			

Curaplast® Kids



Toepassingsgebieden

- ter verzorging van het kleinere dagelijkse letsel

Eigenschappen

- centraal wondkussen
- fixeert het wondkussen stevig op de huid
- gering risico van vastkleven aan de wond dankzij netfolie
- met leuke ontwerpen voor kinderen
- water- en vlekbestendig
- soepel en resistent

Productsamenstelling

Steunlaagmateriaal: polyethyleen, zelfklevend en synthetisch rubber (zonder colofonium en colofoniumderivaten)
Wondkussen: viscose, polypropyleen/polyethyleen, netfolie van polyethyleen.

Curaplast® Kids

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 stuks in vouwdoos, om af te knippen				
10 x 6	10 x 2,2	144932	4492344	1/12

Stella® Plast

Eerstehulp wondpleister.



Stella® Plast

Toepassingsgebieden

- bedekken en beschermen van kleine oppervlakkige wonden
- snelle toepassing op alle lichaamsdelen

Eigenschappen

- klevend elastisch snelverband met doorlopende kompres
- soepel en luchtdoorlatend
- kleeft niet in de wonde

Productsamenstelling

Basismateriaal: cremekleurig, 70% viscose – 30% polyamide
Wondkussen: viscose non woven 2 lagen
Adhesief: zinkoxide - latex.

Stella® Plast

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel verpakt			
6 x 1	36477	0864637	1/40
8 x 5	36333	0233619	1/40
6 x 5	36334	0641092	1/40
rol			
6 x 40	36345	0398701	1
8 x 40	36346	0398719	1

Stella® Strip

Eerstehulp wondpleister.



Stella® Strip



Toepassingsgebieden

- bedekken en beschermen van kleine oppervlakkige wonden
- snelle toepassing op alle lichaamsdelen

Eigenschappen

- vochtdoorlatend
- kleeft niet aan de wonde
- gebruiksklaar
- individueel verpakt

Productsamenstelling

Kompres uit viscosewatten, overdekt met dunne polyethyleenfilm.

Stella® Strip

individueel verpakt

Afmetingen (mm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
standard 19 x 72	37240	0640672	200/8000
large 25 x 72	37241	0640664	200/8000
spot Ø 22,5	37242	0640680	500/2000

Curafix® H

Brede fixatiepleisters.



Curafix® H

Toepassingsgebieden

- voor fixatie van wondverbanden over het hele vlak op verbandtechnisch moeilijke plekken, zoals gewrichten en hals
- o.a. ter fixatie en bevestiging van drains, katheters, sondes, meetinstrumenten

Eigenschappen

- lucht- en waterdampdoorlatend
- huidvriendelijk
- dwars en in de lengte rekbaar
- aangenaam draagcomfort
- eenvoudige en snelle fixatie

Productsamenstelling

Vliesstof: wit, 100% polyester, polyurethaanmembraan met huidvriendelijke polyacrylaatlijm (zonder colofonium en colofoniumderivaten).

Curafix® H

individueel, in vouwdoos

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
rol à 2 m			
2 x 10	138946	3912334	1/96
2 x 15	138940	3912342	1/96
rol à 10 m			
10 x 5	138941	3912359	1/48
10 x 10	138942	3912367	1/24
10 x 15	138943	3912375	1/24
10 x 20	138944	3912383	1/16
10 x 30	138945	3912391	1/16



Silkafix®

Toepassingsgebieden

- voor het vastzetten en fixeren van kompressen, zwachtels, slangen, katheters, canules, drainages of sondes
- voor het fixeren van wondkompressen en verbanden van iedere soort en maat

Eigenschappen

- eenvoudig overdwars en in de lengte te scheuren
- huidvriendelijk
- beschikt over een goede directe en langdurige kleefkracht
- zeer goede en veilige fixatie
- in het bijzonder geschikt voor patiënten met een gevoelige huid

Productsamenstelling

Kunstzijdetaft, wit, 100 % acetaat, huidvriendelijke polyacrylaatlijm.

Silkafix®

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
rol op kunststof klikrol			
5 x 1,25	143853	4440772	1/18/450
5 x 2,5	143854	4440780	1/12/336
5 x 5	143855	4440798	1/6/150
rol op kartonnen kern			
5 x 2,5	143856	4440806	12/300
9,2 x 1,25	143857	4440814	24/480
9,2 x 2,5	143858	4440822	12/240
9,2 x 5	143859	4440830	6/120

Porofix®

Hechtpleister.



Porofix®

Toepassingsgebieden

- ter fixatie van kompressen, verband, veneuze katheters, canules, drainages of sondes
- voor het fixeren van wondkompressen en verbanden van iedere soort en maat

Eigenschappen


- overdwars scheurbaar
- vertoont een goede directe en langdurige kleefkracht
- huidvriendelijk
- zeer goede en veilige fixatie
- fixatiepleister voor de normaal gevoelige huid

Productsamenstelling

Geweven, lichtbruin, 100 % katoen, Hotmelt-kleefstrips.

Porofix®

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
rol op kunststof klikrol			
5 x 1,25	143870	4440848	1/18/450
5 x 2,5	143871	4440855	1/12/336
5 x 5	143872	4440863	1/6/150
rol op kartonnen kern			
9,2 x 1,25	143873	4440871	24/720
9,2 x 2,5	143874	4440889	12/360
9,2 x 5	143875	4440897	6/180

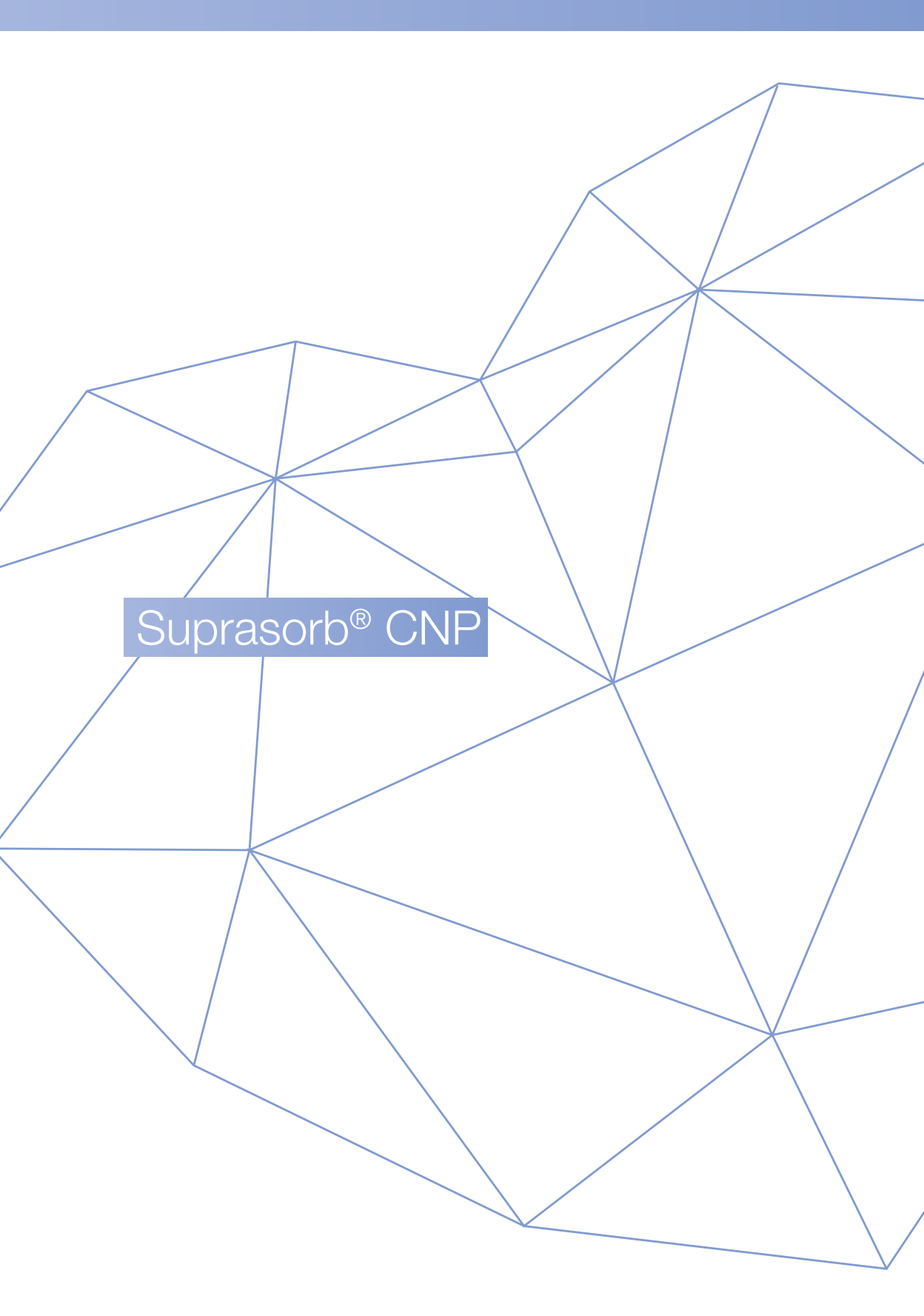

Suprasorb® CNP

Suprasorb® CNP P3-behandelunit

Intuïtief. Tijdbesparend. Betrouwbaar.



Toepassingsgebieden

- kan universeel worden gebruikt – klinisch en poliklinisch

Eigenschappen

- bijzonder gebruiksvriendelijk
- laat zich eenvoudig bedienen
- intuïtieve, goed leesbare schermen
- duidelijke kleurcodes
- staat garant voor een intuïtief gebruik, bespaart tijd en geeft zekerheid
- geluidsarm
- licht



Suprasorb® CNP P3-behandelunit



Suprasorb® CNP P3-behandelunit

Inhoud	REF	Verpakkingseenheid
Systeem voor CNP-behandeling met houder voor aan een bed, tas en reservoirs (250 ml en 1000 ml) in transportkoffer	34780	1/1

Suprasorb® CNP Accessoires van P3-behandelunit

Inhoud	REF	Verpakkingseenheid
Suprasorb CNP-reservoir 250 ml	32910	1/6
Suprasorb CNP-reservoir 1,000 ml	32911	1/10
Suprasorb CNP houder voor aan een bed	32885	1/1
Suprasorb CNP universele houder	32886	1/1
Suprasorb CNP-tas, voor mobiel gebruik	32888	1/30
Suprasorb CNP-transformator	32988	1/36

Suprasorb® CNP P3 Componenten

afzonderlijk steriel verpakt

Inhoud	REF	Verpakkingseenheid
Suprasorb CNP exsudaatzak 250 ml	32900	4/24
Suprasorb CNP exsudaatzak 1,000 ml	32901	4/24
Suprasorb CNP-drainagepad	33600	10/60
Suprasorb CNPY-connector	33200	10/80

Suprasorb CNP Kit Connector

Inhoud	REF	Verpakkingseenheid
stand alone	142240	7/56

Suprasorb® CNP-dieptedrainage

De nieuwe speciale oplossing voor diep in de wond.



Suprasorb® CNP-dieptedrainage

Toepassingsgebieden

- de CNP-dieptedrainage voert exsudaat en andere vloeistoffen direct uit de diepte van de wond af

Eigenschappen

- de voordelen in één oogopslag:
 - ◆ begint duidelijk sneller dan alternatieve oplossingen met het afvoeren van exsudaat
 - ◆ in dezelfde tijdsperiode wordt duidelijk meer exsudaat uit de wond afgevoerd dan met alternatieve oplossingen.
 - ◆ maakt het mogelijk een blokkade op te sporen in het gehele verloop, ook in de diepte van de wond
- eenvoudig af te korten aan de kant van de wond
- houdt de druk in de diepte constant

Suprasorb® CNP-dieptedrainage

afzonderlijk steriel verpakt

Inhoud	REF	Verpakkingseenheid
90 cm lengte, waarvan 30 cm geperforeerd, 24 CH	33700	10/60

Suprasorb® CNP Drainagefolie

Hightech oplossing. Voor de open buik. Voor extremiteiten.




Toepassingsgebieden

- voor de open buik.
- voor extremiteiten.
- voor bescherming
- voor drainage

Eigenschappen

- beschermt organen en gevoelige structuren
- effectieve afzuigverdeling door exsudaatafvoer over het gehele oppervlak
- kan individueel op maat worden geknipt en gemodelleerd
- identieke geometrie van de zijkanalen zorgt voor veiligheid bij het inzetten

Suprasorb® CNP Drainagefolie

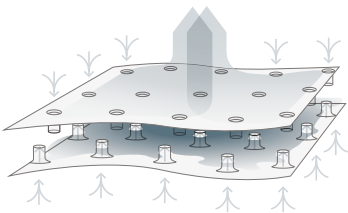

Suprasorb® CNP Drainagefolie

afzonderlijk steriel verpakt

Inhoud	Afmetingen	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
dubbellaags drainagefolie ter bescherming van gevoelige structuren en voor een effectieve afvoer van exsudaat	Abdominaal 77 x 60 cm	39400	5/40
	20 x 25 cm	39395	12/144

Suprasorb® CNP EasyDress

Negatieve drukbehandeling aan de extremiteiten.



Suprasorb® CNP EasyDress



Toepassingsgebieden


- bij wondgebieden op de extremiteiten
- als secundair verband in het kader van negatieve druktherapie

Eigenschappen

- eenvoudig: bij het aantrekken en fixeren
- snel: zonder tijdsintensief vastplakken
- universeel: te gebruiken bij wondgebieden op de extremiteiten
- zacht voor de huid: door het lijmvrrije, waterdampdoorlaatbare materiaal

Suprasorb® CNP EasyDress

afzonderlijk steriel verpakt

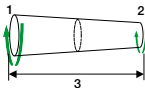

	Afmetingen (cm)			Fixatiestroken 10 x 12 cm	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
	Omvang 1	Omvang 2	Lengte 3				
S	50	30	70	5 stuks	34901	4758561	5/40
M	65	40	85	7 stuks	34902	4758579	5/40
L	80	50	95	8 stuks	34903	4758587	5/40

Suprasorb® CNP Kits

De maatconfectie voor de kliniek.



Suprasorb® CNP Kits - Wondschuim

Eigenschappen

- vereenvoudigt tijdsbesparende werkprocessen
- maakt nauwkeurige behoefteplanning mogelijk
- zorgt voor efficiënte hantering
- biedt meer veiligheid
- garandeert grote kosten transparantie

Suprasorb® CNP Kits

Maat	Aantal	Inhoud	Afmetingen	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
wondschuim					
S	1	Raucodrape®-omslagdoek	68 cm x 70 cm	170000	6/30
	3	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	1	Suprasorb® CNP-wondschuim M, dun	100 mm x 100 mm x 10 mm		
M	1	Raucodrape®-omslagdoek	68 cm x 70 cm	170001	5/25
	3	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	1	Suprasorb® CNP-wondschuim M	100 mm x 150 mm x 30 mm		
L	1	Raucodrape®-omslagdoek	68 cm x 70 cm	170002	5/15
	5	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	1	Suprasorb® CNP-wondschuim L	250 mm x 150 mm x 30 mm		
antimicrobieel verbandgaas					
S	1	Raucodrape®-omslagdoek	68 cm x 70 cm	170004	6/30
	3	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	2	Antimicrobieel verbandgaas	15 cm x 17 cm		
M	1	Raucodrape®-omslagdoek	68 cm x 70 cm	170005	5/25
	4	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	5	Antimicrobieel verbandgaas	15 cm x 17 cm		
L	1	Raucodrape®-omslagdoek	68 cm x 70 cm	170006	5/15
	1	Suprasorb® F Foliewondverband, gerold	15 cm x 200 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	1	Antimicrobieel verbandgaas, aerold	11,4 cm x 370 cm		

Suprasorb® CNP Kits

De maatconfectie voor de kliniek.



Suprasorb® CNP Kits Plus -
Wondschuim

Suprasorb® CNP Kits Plus

Maat	Aantal	Inhoud	Afmetingen	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
wondschuim					
S	1	Raucodrape® OK-instrumententafel-afdek	120 cm x 140 cm	170007	5/15
	1	Pincet, anatomisch	13 cm		
	1	Chirurgische schaar spits/stomp recht	14,5 cm		
	5	Gazin® Gaaskompressen X-ray, 8-voudig	10 cm x 10 cm		
	1	Huid markeerstift met liniaal			
	1	Tablet	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	3	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
M	1	Suprasorb® CNP-wondschuim M, dun	100 mm x 150 mm x 10 mm	170008	5/15
	1	Raucodrape® OK-instrumententafel-afdek	120 cm x 140 cm		
	1	Pincet, anatomisch	13 cm		
	1	Chirurgische schaar spits/stomp recht	14,5 cm		
	5	Gazin® Gaaskompressen X-ray, 8-voudig	10 cm x 10 cm		
	1	Huid markeerstift met liniaal			
	1	Tablet	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	3	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
L	1	Suprasorb® CNP-drainagepad		170009	5/15
	1	Suprasorb® CNP Wondschuim M	100 mm x 150 mm x 30 mm		
	1	Raucodrape® OK-instrumententafel-afdek	120 cm x 140 cm		
	1	Pincet, anatomisch	13 cm		
	1	Chirurgische schaar spits/stomp recht	14,5 cm		
	5	Gazin® Gaaskompressen X-ray, 8-voudig	10 cm x 10 cm		
	1	Huid markeerstift met liniaal			
	1	Tablet	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	5	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	1	Suprasorb® CNP Wondschuim L	250 mm x 150 mm x 30 mm		

Suprasorb® CNP Kits

De maatconfectie voor de kliniek.



Suprasorb® CNP Kits Plus Abdominaal

Suprasorb® CNP Kits Plus

Maat	Aantal	Inhoud	Afmetingen	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
abdominaal					
	1	Raucodrape®-omslagdoek	80 cm x 100 cm	170003	5/15
	1	Raucodrape® Incisiefolie	40 cm x 35 cm		
	1	Suprasorb® CNP Drainagefolie	77 cm x 60 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	1	Antimicrobieel verbandgaas, gerold	11,4 cm x 370 cm		
	1	Suprasorb® CNP Wondschuim, abdomen	380 mm x 250 mm x 15 mm		
antimicrobieel verbandgaas					
S	1	Raucodrape® OK-instrumententafel-afdek	120 cm x 140 cm	170010	5/15
	1	Pincet, anatomisch	13 cm		
	1	Chirurgische schaar spits/stomp recht	14,5 cm		
	5	Gazin® Gaaskompressen X-ray, 8-voudig	10 cm x 10 cm		
	1	Huid markeerstift met liniaal			
	1	Tablet	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	3	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	2	Antimicrobieel verbandgaas	15 cm x 17 cm		
M	1	Raucodrape® OK-instrumententafel-afdek	120 cm x 140 cm	170011	5/15
	1	Pincet, anatomisch	13 cm		
	1	Chirurgische schaar spits/stomp recht			
	5	Gazin® Gaaskompressen X-ray, 8-voudig	10 cm x 10 cm		
	1	Huid markeerstift met liniaal			
	1	Tablet	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	4	Suprasorb® F Foliewondverband	10 cm x 25 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	5	Antimicrobieel verbandgaas	15 cm x 17 cm		
L	1	Raucodrape® OK-instrumententafel-afdek	120 cm x 140 cm	170012	5/15
	1	Pincet, anatomisch	13 cm		
	1	Chirurgische schaar spits/stomp recht	14,5 cm		
	5	Gazin® Gaaskompressen X-ray, 8-voudig	10 cm x 10 cm		
	1	Huid markeerstift met liniaal			
	1	Tablet	24,5 cm x 14 cm x 5 cm		
	1	Suprasorb® F Folieverband, gerold	15 cm x 200 cm		
	1	Suprasorb® CNP-drainagepad			
	1	Antimicrobieel verbandgaas, gerold	11,4 cm x 370 cm		

Suprasorb® Wondschuim



Suprasorb® Wondschuim

Eigenschappen

- maakt het behandelen van grote wondvolumes in korte tijd mogelijk
- vereenvoudigde hantering door verschillende vormen en maten
- kan op maat worden geknipt

Suprasorb® CNP-wondschuim

afzonderlijk dubbelsteriel verpakt

Maat	Afmetingen (mm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
M, dun/antraciet	150 x 100 x 10	31800	1/10/40
M, antraciet	150 x 100 x 30	31801	1/10/20
L, antraciet	150 x 250 x 30	31802	1/10/20
XL, antraciet	300 x 250 x 30	31803	1/10/20
2 stuks, Abdomen, antraciet	250 x 380 x 15	31804	10/20

Suprasorb® CNP Verbanden



Suprasorb® CNP Verbandgaas

Suprasorb® CNP Antimicrobieel verbandgaas

antimicrobieel verbandgaas, gerold, steriel

Afmetingen (m x cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
3.7 x 11,4	25283		5/40

Suprasorb® CNP Bandes de gel

afzonderlijk, steriel verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7 x 10	39394		1/10/100

Ons handige systeem voor eenmalig gebruik voor negatieve druktherapie.



VivereX®



Toepassingsgebieden

Het wordt aanbevolen voor de preventie van postoperatieve wondcomplicaties en ook voor :

- acute wonden
- wonden met weinig tot matig van exsudaat
- donorplaatsen van huidtransplantaten
- decubituswonden
- diabetische ulcera
- veneuze beenulcera
- chirurgische schone gesloten incisie
- subacute gedehisieerde wonden
- traumatische wonden
- 1° en 2° graads brandwonden

Eigenschappen

- **betrouwbaar** : het gebruiksklare wondverband biedt exsudaat-beheersing en helpt voorkomen dat bacteriën in de wond binnengaan.
De indicatoren van het apparaat laten u zien of de therapie werkt zoals vereist
- **gemakkelijk** : breng het verband aan. Druk op de knop. Start de therapie. En laat VivereX zijn werk doen. Zo eenvoudig is het
- **costeneffectief** : omdat het zo gebruiksvriendelijk is, kunnen patiënten eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen of poliklinisch worden behandeld.
De gebruiksklare wondverband-wissels maken lange verbandwisselintervallen en snellere verbandwissels

Opmerkingen


Inhoud : één apparaat, twee verbanden voor 10 dagen therapie.

Uitvoeringen

Elke kit bestaat uit een apparaat voor eenmalig gebruik dat behandeling voor maximaal 10 dagen, 2 AA-batterijen, 6 extra fixatiestrips om het verband vast te zetten en 2 kant-en-klare wondverbanden in één van de 8 mogelijke maten.

VivereX® Kits voor behandeling

Afmetingen (cm)	Wondkussen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stucks)
10 x 20	5 x 15	143020	4759676	1/23
10 x 30	5 x 25	143021	4759684	1/23
10 x 40	5 x 35	143022	4759692	1/23
16 x 16	10 x 10	143023	4759700	1/20
16 x 21	10 x 15	143024	4759718	1/20
16 x 31	10 x 25	143025	4759726	1/20
21 x 21	15 x 15	143026	4759734	1/13
26 x 26	20 x 20	143027	4759742	1/13

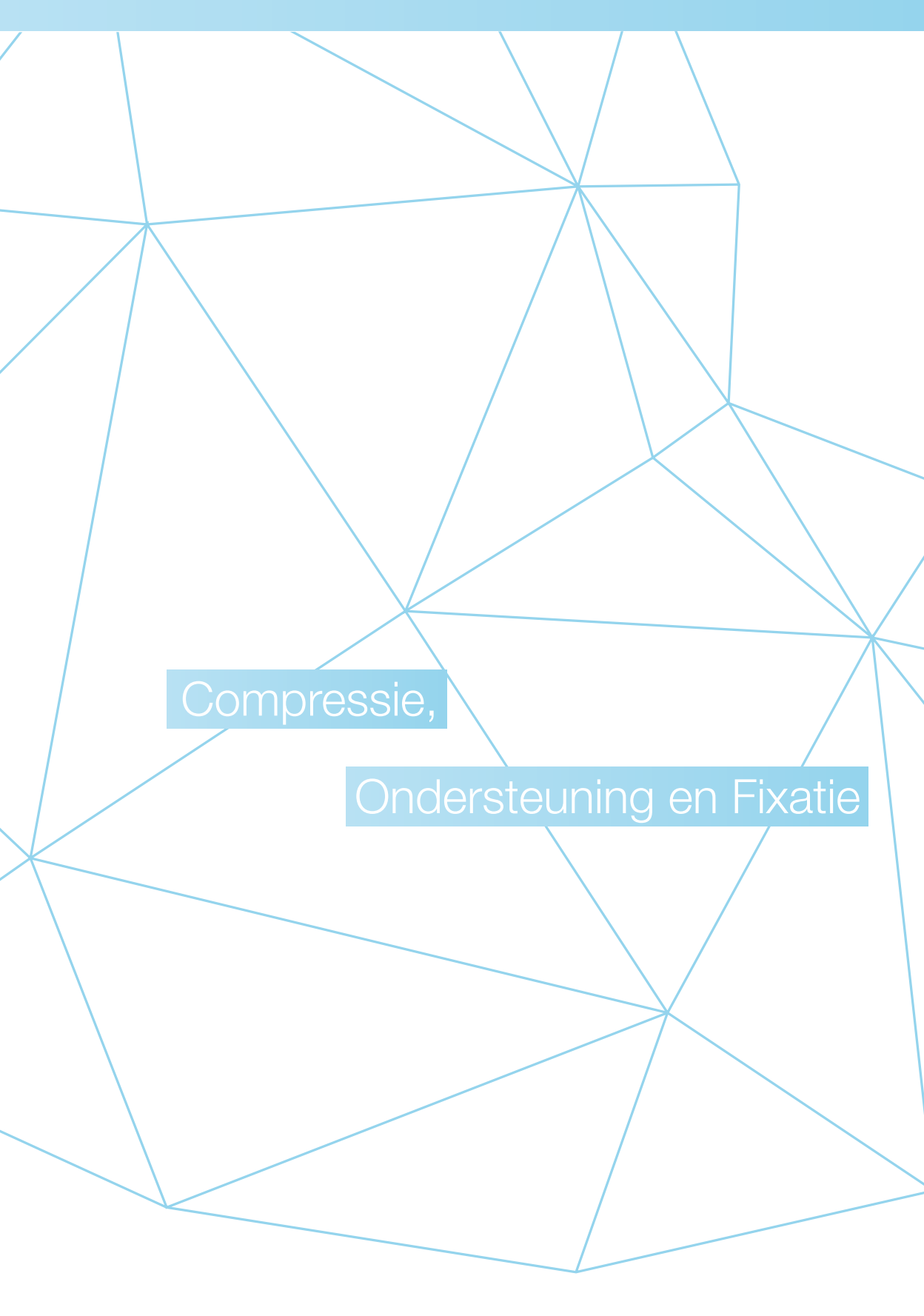

Compressie,

Ondersteuning en Fixatie

Actico® UlcerSys-systeem

Compressiekoussysteem.



Actico® UlcerSys-systeem

Toepassingsgebieden

- voor het behandelen van ulcus cruris venosum ('open been') na oedeemvermindering
- als preventie van een recidiverend chronisch open been
- bij huidontsteking met stuwung zoals eczeem, pigmentatie, lipodermatosclerose, atrophie blanche
- bij veneus oedeem
- voor het behandelen van een posttrombotisch syndroom
- voor de nabehandeling bij sclerotherapie en varicesoperaties
- na het uitnemen van een ader voor een bypassoperatie (hartoperatie)

Eigenschappen

- compressiekoussysteem bestaande uit twee lagen
- onderkous:
 - ◆ plat boordje blijft goed op zijn plaats
 - ◆ de speciale tricotconstructie zorgt voor een blijvend goede pasvorm
 - ◆ platte naad bij de tenen voor een uitstekend draagcomfort
 - ◆ verstevigde hielconstructie
 - ◆ fixeert wondverbanden
 - ◆ voor benodigde druk ook in twee of drie lagen over elkaar te dragen
 - ◆ 10-14 mmHg
- bovenkous:
 - ◆ subtiele look
 - ◆ fijne oppervlaktestructuur
 - ◆ plat boordje voor een perfecte pasvorm
 - ◆ goede pasvorm
 - ◆ 26-34 mmHg

Productsamenstelling

Onderkous: 70 % polyamide, 30 % Lycra®
Bovenkous: 65 % polyamide, 35 % Lycra®.

Opmerkingen

- compressieklasse III (ca. 40 mmHg)
- RAL en Öke-Tex Standaard 100 getest

Uitvoeringen

- lengte: kous voor het onderbeen
- set in twee kleurcombinaties verkrijgbaar:
 - ◆ 1 bovenkous beige + 2 onderkousen wit
 - ◆ 1 bovenkous zwart + 2 onderkousen beige

Tip

- onderkous wasbaar op 60°C
- bovenkous wasbaar op 40°C

Actico® UlcerSys-systeem

Compressiekoussysteem.

Actico® UlcerSys (beige/wit)

1 bovenkous beige + 2 onderkousen wit

Maat	Enkelomvang cB (cm)	Kuitomvang (cm)	Beenlengte (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
lengte: standaard						
S	19 - 21	31 - 39	38 - 42	32510	3553781	1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	32512	3553807	1/16
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	32514	3553823	1/16
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	32516	3553849	1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	32518	3553864	1/16
lengte: lang						
S	19 - 21	31 - 39	>42	32511	3553799	1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	>42	32513	3553815	1/16
L	23 - 27	35 - 44	>42	32515	3553831	1/16
XL	27 - 32	39 - 48	>42	32517	3553856	1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	>42	32519	3553872	1/16

Actico® UlcerSys (zwart/beige)

1 bovenkous zwart + 2 onderkousen beige

Maat	Enkelomvang cB (cm)	Kuitomvang (cm)	Beenlengte (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
lengte: standaard						
S	19 - 21	31 - 39	38 - 42	39710	3553880	1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	39712	3553906	1/16
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	39714	3553922	1/16
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	39716	3553948	1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	39718	3553963	1/16
lengte: lang						
S	19 - 21	31 - 39	>42	39711	3553898	1/16
M	21 - 23,5	33 - 41	>42	39713	3553914	1/16
L	23 - 27	35 - 44	>42	39715	3553930	1/16
XL	27 - 32	39 - 48	>42	39717	3553955	1/16
XXL	32 - 37	43 - 52	>42	39719	3553971	1/16

Actico® UlcerSys Liner Onderkous

Onderkous.



Actico® UlcerSys Liner Onderkous

Toepassingsgebieden

- voor het behandelen van ulcus cruris venosum ('open been') na oedeemvermindering
- als preventie van een recidiverend chronisch open been
- bij huidontsteking met stuwing zoals eczeem, pigmentatie, lipodermatosclerose, atrophie blanche
- bij veneus oedeem
- voor het behandelen van een posttrombotisch syndroom
- voor de nabehandeling bij sclerotherapie en varicesoperaties
- na het uitnemen van een ader voor een bypassoperatie (hartoperatie)

Eigenschappen

- plat boordje blijft goed op zijn plaats
- de speciale tricotconstructie zorgt voor een blijvend goede pasvorm
- platte naad bij de tenen voor een uitstekend draagcomfort
- verstevigde hielconstructie
- fixeert wondverbanden
- voor benodigde druk ook in twee of drie lagen over elkaar te dragen
- 10-14 mmHg

Productsamenstelling

70 % polyamide, 30 % Lycra®.

Opmerkingen

- navulpak voor Actico UlcerSys Compressiekoussysteem
- RAL en Öke-Tex Standaard 100 getest

Uitvoeringen

- lengte: Kous voor het onderbeen onderkous (set van drie) in twee kleuren verkrijgbaar:
 - ◆ wit
 - ◆ beige

Tip

- onderkous wasbaar op 60°C

Actico® UlcerSys Liner Onderkous

Onderkous.

Actico® UlcerSys Liner (wit)

3 onderkousen, wit

Maat	Enkelomvang cB (cm)	Kuitomvang (cm)	Beenlengte (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
lengte: standaard						
S	19 - 21	31 - 39	38 - 42	32530	3552817	3/150
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	32532	3552833	3/150
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	32534	3552858	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	32536	3552874	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	32538	3552890	3/150
lengte: lang						
S	19 - 21	31 - 39	>42	32531	3552825	3/150
M	21 - 23,5	33 - 41	>42	32533	3552841	3/150
L	23 - 27	35 - 44	>42	32535	3552866	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	>42	32537	3552882	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	>42	32539	3552908	3/150

Actico® UlcerSys Liner (beige)

3 onderkousen, beige

Maat	Enkelomvang cB (cm)	Kuitomvang (cm)	Beenlengte (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
lengte: standaard						
S	1 - 21	31 - 39	38 - 42	39740	3552916	3/1506
M	21 - 23,5	33 - 41	38 - 42	39742	3552932	3/150
L	23 - 27	35 - 44	38 - 42	39744	3552957	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	38 - 42	39746	3552973	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	38 - 42	39748	3552999	3/150
lengte: lang						
S	19 - 21	31 - 39	>42	39741	3552924	3/150
M	21 - 23,5	33 - 41	>42	39743	3552940	3/150
L	23 - 27	35 - 44	>42	39745	3552965	3/150
XL	27 - 32	39 - 48	>42	39747	3552981	3/150
XXL	32 - 37	43 - 52	>42	39749	3553005	3/150

Venosan® AES

Anti-emboliekousen.



Venosan® AES

Toepassingsgebieden

- pre- en postoperatieve preventie van trombose en embolie
- algemene immobiliteit, bedlegerigheid

Eigenschappen

- licht en luchtdoorlatend voor maximaal comfort
- eenvoudig aan te trekken
- anatomisch model en uitgebreide maatkeuze
- constante drukvermindering van de enkel tot de knie of het bovenbeen stimuleert zo de veneuze afvoer bij bedlegerige patiënten en draagt zo bij aan trombosepreventie
- inspectieopening bij de tenen voor meer veiligheid
- kunnen gewassen en opnieuw gebruikt worden
- door de kleurcodering aan de inspectieopening boven de tenen en onder de bovenste afsluiting kan de maat direct herkend worden

Productsamenstelling

- AD/AGH 91 % Nylon Polyamid, 9 % LYCRA® Elastan
- AGG 89 % nylon polyamide, 11 % LYCRA®-elastaan.

De bovenbeenkousen zijn bovendien voorzien van een heupbevestiging van nylon, elastaan en silicone.

Opmerkingen

- 25 keer wasbaar bij 60°C
- kleur: wit

Uitvoeringen

- AD-kous voor het onderbeen
- AGH-bovenbeenkous met zelfklevend band
- AGG-bovenbeenkous met heupbevestiging

Venosan® AES

Maat	Enkelomvang (cm)	Kuitomvang (cm)	Beenlengte (cm)	Bovenbeenomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
AD-kous voor het onderbeen							
S (normaal)	18 - 20	32	41		150025	3879277	10/80
S (lang)	18 - 20	32	41		150026	3879285	10/80
M (normaal)	20 - 22	32 - 37	43		150027	3879293	10/80
M (lang)	20 - 22	32 - 37	43		150028	3879301	10/80
L (normaal)	23 - 25	37 - 42	45		150029	3879319	10/80
L (lang)	23 - 25	37 - 42	45		150030	3879327	10/80
XL (normaal)	25 - 27	42 - 47	45		150031	3879335	10/80
XL (lang)	25 - 27	42 - 47	45		150032	3879343	10/80
XXL (normaal)	28 - 30	47 - 52	45		150033	3879350	10/80
XXL (lang)	28 - 30	47 - 52	45		150034	3879368	10/80
AGH-bovenbeenkous met zelfklevend band							
S (kort)	18 - 20	32	74	45 - 64	150035	3879376	10/80
S (normaal)	18 - 20	32	74 - 79	45 - 64	150036	3879384	10/80
S (lang)	18 - 20	32	79	45 - 64	150037	3879392	10/80
M (kort)	20 - 22	32 - 37	74	53 - 71	150038	3879400	10/80
M (normaal)	20 - 22	32 - 37	74 - 79	53 - 71	150039	3879418	10/80
M (lang)	20 - 22	32 - 37	79	53 - 71	150040	3879426	10/80
L (kort)	23 - 25	37 - 42	74	61 - 80	150041	3879434	10/80
L (normaal)	23 - 25	37 - 42	74 - 79	61 - 80	150042	3879442	10/80
L (lang)	23 - 25	37 - 42	79	61 - 80	150043	3879459	10/80
XL (normaal)	25 - 27	42 - 47	79	70 - 84	150044	3879467	10/80
XL (lang)	25 - 27	42 - 47	79	70 - 84	150045	3879475	10/80



Rosidal® K



Toepassingsgebieden

- voor krachtige compressie (bijvoorbeeld in de flebologie)
- voor het immobiliseren van lichaamsdelen
- voor het ondersteunen en ontlasten in de traumatologie en sportgeneeskunde
- voor het fixeren van verbanden

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 90%)
- textielelastisch dankzij getwijnde kettendraad
- luchtdoorlaatbaar
- stevige weefselstructuur
- met zelfkanten
- crèmekleurig

Productsamenstelling

100% katoen.

Opmerkingen

- 50 keer wasbaar bij maximaal 95°C (in de handel verkrijgbaar fijnwasmiddel/fijnwasprogramma)

Uitvoeringen

- Rosidal K
- Rosidal Elko : 2 Rosidal K zwachtels 10 cm breed (voor compressieverband volgens dubbelverband-techniek)

Rosidal® K

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 m (uitgerekte lengte), met banderole, individueel in vouwdoos			
4 x 5	22199	2956076	1/125
6 x 5	22200	2185338	1/108
8 x 5	22201	0188615	1/108
10 x 5	22202	0188623	1/90
12 x 5	22203	0855262	1/54
5 m (uitgerekte lengte), met banderole, los in de doos			
8 x 5	22250	1138700	10/140
10 x 5	22251	1138718	10/140
12 x 5	22252		10/120
10 m (uitgerekte lengte), met banderole, individueel in vouwdoos			
10 x 10	22206		1/60
12 x 10	22205		1/40

Elko® Rosidal K

5 m (uitgerekte lengte), met banderole, per paar in vouwdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 5	22225	2680023	1/30

Rosidal® haft

Cohesieve korterek zwachtel.



Rosidal® haft



Toepassingsgebieden

- voor compressie van de extremiteiten bij flebologische en lymfologische aandoeningen ter behandeling van oedemen
- voor het behandelen van oedeem
- voor het ondersteunen en ontlasten van het gewrichtskapsel
- na sclerosering en vaatchirurgische procedures

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 60%)
- textielelastisch dankzij getwijnde kettingdraad
- betrouwbare ondersteuning van het verband
- de compressiedruk is dankzij de hoge mate van stiffness (stijfheid van het verband) goed te verdragen
- hogere compressiedruk blijft gedurende een langere tijd behouden
- met zelfkanten

Productsamenstelling

99 % katoen, 1 % synthetisch garen, met een micropunt natuurrubberlatex-coating.

Rosidal® haft

5 m (uitgerekte lengte)

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
steriel, afzonderlijk verpakt			
8 x 5	31970		6/36
10 x 5	31971		6/36
12 x 5	31972		6/36



Rosidal® SC

Toepassingsgebieden

- ter bescherming van de huid en ter vermindering van de neiging van het verband om te verschuiven, toepasbaar als eerste compressielaag
- voor lichte compressie onder lymfologische of flebologische compressieverbanden

Eigenschappen

- zachte textiele onderzijde
- rekbaar
- lucht- en waterdampdoorlatend
- maakt gelijkmatige drukverdeling mogelijk
- reduceert de neiging van het compressieverband om te verschuiven
- lichte compressiewerking verhoogt het draagcomfort
- met knipranden
- wit

Productsamenstelling

100% polyurethaan
Textielweefsel: 60% polyamide,
40% katoen.

Opmerkingen

- tot 50 keer wasbaar bij maximaal 95°C

Rosidal® SC

individueel in vouwdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 2,5	33500	2975571	1/18
15 x 2,5	33501	2975589	1/24
10 x 3,5	33503	2974905	1/24

Rosidal® CC

Latexvrije, cohesieve compressiezwachtel.



Rosidal® CC

Toepassingsgebieden

- voor compressie (bv. in flebologie en lymfologie)
- voor het fixeren van meerlaagse verbanden
- voor het immobiliseren van lichaamsdelen

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 75 %)
- tweezijdig cohesief dankzij synthetische coating
- hoge mate van rigiditeit
- met zelfkanten
- latexvrij
- crèmekleurig

Productsamenstelling

51 % katoen, 39 % polyamide, 10 % polyurethaan, met een synthetische microcoating.

Rosidal® CC

uitgerekte lengte, individueel in vouwdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 6	33499	2974897	1/24

Rosidal® TCS

Compressiesysteem met twee componenten.



Rosidal® TCS

Toepassingsgebieden

- voor het behandelen van ulcus cruris venosum ('open been') en concomiterende aandoeningen
- voor het behandelen van oedeem

Eigenschappen

- twee componenten gebruiksklaar en handig gecombineerd in een set
- geïntegreerde huidbescherming in de eerste laag
- cohesieve tweede laag
- verband zet nauwelijks diik aan
- past moeiteloos in de schoen

Productsamenstelling

Het systeem bestaat uit:

- zachte compressiezwachtel (Rosidal SC) = eerste laag
- cohesieve compressiezwachtel (Rosidal CC) = tweede laag.

Opmerkingen

- het systeem is bedoeld voor eenmalig gebruik
- therapeutische werkingsdruk blijft meerdere dagen aanhouden
- aanleggen onder volledige trek (Safe-Loc)
- niet met natuurrubberlatex gemaakt

Rosidal® TCS

systeemcomponenten

Aantal	Component	Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	Component 1: Rosidal SC	10 x 3,5	26484	2922409	1/14
1	Component 2: Rosidal CC	10 x 6			

Rosidal® 1 C

De 3-in-1 korte-rekzwachtel.



Rosidal® 1 C

Toepassingsgebieden

- spataderen
- veneuze insufficiëntie
- tromboflebitis
- flebotrombose
- posttrombotisch syndroom
- chronische veneuze insufficiëntie graad I tot III b (volgens Widmer)
- ulcus cruris venosum en mixtum
- oedeem (flebologisch oedeem, post-traumatisch, postoperatief, tijdens de zwangerschap)
- na scleroserende therapie en na vaatchirurgische ingrepen
- contusies, distorsies, peesletsels en gewrichtsluxaties

Eigenschappen

- de 3-in-1 korte-rekzwachtel met huidcontact-, polster- en compressielaag
- betrouwbare, krachtige compressie: hoge druk bij activiteit, lage druk in rust (van ongeveer 40–60 mmHg)
- eenvoudig aan te passen en aan te brengen door dwarse elasticiteit
- tijdbesparend en snel aan te brengen door 3-in-1
- hoog draagcomfort door zachte polstering met badstofeffect

Productsamenstelling

Polyamide 48 %, katoen 42 %, polyester 6 %, elastaan 4 %.
Bevat geen latex

Opmerkingen

- in vergelijking met meercomponentsystemen kan het door een geringe dikte in de meeste soorten schoenen worden gedragen
- kan tot zeven dagen, dag en nacht, worden gedragen
- eenvoudig en veilig aan te brengen door innovatief Safe-Loc-systeem

Rosidal® 1 C

Afmetingen (cm x m uitgerekte lengte)	REF	CNK	Nummer	Verpakkingseenheid (stuks)
8 x 6	162154	4792347	1 rouleau	1/32
8 x 6**	162155	4792354	6 rouleaux	6/24
10 x 6	162156	4792362	1 rouleau	1/60
10 x 6**	162157	4792370	6 rouleaux	6/24

Rosidal® Sys

Korte-rekcompressiesysteem.



Rosidal® Sys

Toepassingsgebieden

- voor het behandelen van ulcus cruris venosum ('open been')

Eigenschappen

- effectief en economisch dankzij herbruikbaarheid van polster- en compressieverbanden (Rosidal soft en Rosidal K)
- gebruiksklaar en handig gecombineerd in een set

Productsamenstelling

- tg® buisverband - Bescherming voor de huid onder een ontswellend drukverband
- Rosidal® zachte zwachtel - Polstering onder een drukverband voor gelijkmatige verdeling van de druk en druk en ter voorkoming van vernauwingen, drukpunten en verschuiven van het verband.
- Rosidal® K Bandage - Kort rekbaar drukverband korte rek met hoge compressie - 100% katoen voor sterke compressie in de flebologie
- Porofix® - Fixatie van de uiteinden van het verband
- Moll elast® haft - Fixatie van de vulling.

Opmerkingen

- Rosidal soft en Rosidal K tot 50 keer wasbaar bij 95 °C
- systeem kan tot zeven dagen ononderbroken worden gedragen (hoge compressiedruk blijft behouden – wetenschappelijk aangetoond door prof. dr. M. Junger)

Rosidal® Sys

Korte-rekcompressiesysteem.

Rosidal® sys

Aantal	Component	Afmetingen	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
alle componenten zijn los na te bestellen (met uitzondering van de artikelen die met een * zijn aangegeven).					
1	tg® buisverband	Maat 7	16984	2173011	1/4
4	Rosidal® soft	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal® K	8 cm x 5 m			
2	Rosidal® K	10 cm x 5 m			
1	Porofix®	2,5 cm x 5 m			
1	Mollelast® haft	4 cm x 20 m			
1	Patiënteninformatie*				

tg® Buisverband

gerold in dispenserdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
rol à 20 m			
Afm. 7 (7,0 cm) voor arm (groot), been, kinderhoofd	24005	1685304	1/18

Rosidal® soft

2,0 m (ongerekte lengte), per paar in vouwdoos

Sterkte (cm)	Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
per paar in vouwdoos				
0,2	10 x 2	13016	2259661	1/23

Rosidal® K

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 m (uitgerekte lengte), individueel in vouwdoos			
8 x 5	22201	0188615	1/108
10 x 5	22202	0188623	1/90

Porofix®

rol op kunststof klikrol

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
2,5 x 5,0	143871	0181263	1/12/336


Mollelast® haft

uitgerekte lengte, individueel in vouwdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
wit			
8 x 20	30070	1288117	1/18

Rosidal® Lymph

Compressiesysteem.

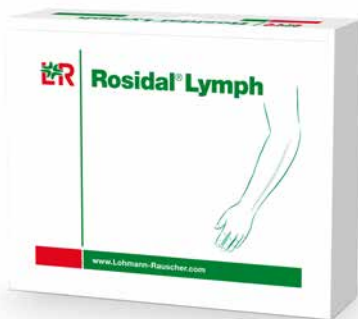

Rosidal® Lymph



Toepassingsgebieden

- voor het behandelen van lymfologische indicaties of oedeem van de bovenste en/of onderste extremiteiten

Eigenschappen

- hoge mate van therapiezeekerheid
- gebruiksklaar en handig gecombineerd in een systeem
- effectief en economisch dankzij herbruikbare producten
- compacte verpakking is beter voor het budget en het milieu
- hoge, duurzame kwaliteit

Productsamenstelling

- Moll elast
- Rosidal SC
- Rosidal K
- bande de caoutchouc mousse Komprex
- Idealbinde (uitsluitend in Rosidal Lymph, Been groot)

Opmerkingen

- Rosidal SC en Rosidal K 50 keer wasbaar op 95°C

Rosidal® Lymph

Aantal	Component	Afmetingen	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
Rosidal® Lymph been, klein					
20	Mollelast	4 m x 4 cm	33520	2263085	1
4	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal SC	15 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 8 cm			
2	Rosidal K	5 m x 10 cm			
4	Rosidal K	5 m x 12 cm			
Rosidal® Lymph been, groot					
20	Mollelast	4 m x 6 cm	33521	2263093	1
4	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal SC	15 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 8 cm			
4	Rosidal K	5 m x 10 cm			
6	Rosidal K	5 m x 12 cm			
2	Idealbinde	5 m x 20 cm			

Rosidal® Lymph

Compressiesysteem.

Rosidal® Lymph

Aantal	Componenten	Afmetingen	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
Rosidal® Lymph arm, klein					
20	Mollelast	4 m x 4 cm	33522	2263101	1
4	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5m x 10 cm			
2	Rosidal K	5 m x 12 cm			
Rosidal® Lymph arm, groot					
20	Mollelast	4 m x 6 cm	33523	2263119	1
2	Rosidal SC	10 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
2	Rosidal SC	15 cm x 2,5 m x 0,2 cm			
1	Komprex	10 cm x 1 m x 1 cm			
2	Rosidal K	5 m x 6 cm			
2	Rosidal K	5 m x 10 cm			
3	Rosidal K	5 m x 12 cm			



Panelast®

Toepassingsgebieden

- voor compressie van extremiteiten (permanente zwachtels) in de flebologie
- als basis of verankering voor tape-applicaties in traumatologie en sportgeneeskunde
- ter ondersteuning en ontlasting bij distorsies, contusies en luxaties
- in de nazorg bij fracturen

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 75%)
- elastisch in breedterichting (ca. 35%)
- lucht- en waterdampdoorlatend
- röntgenstralendoorlaatbaar
- crèmekleurig
- krachtige synthetische latexlijm, bevat zinkoxide
- met zelfkanten

Productsamenstelling

Steunweefsel: 100% katoen, synthetische latexlijm, bevat zinkoxide.

Panelast® SC

2,5 m (ongerekte lengte)

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel in vouwdoos			
6 x 2,5	30270	2185254	1/50
8 x 2,5	30271	0180786	1/50
10 x 2,5	30272	0180794	1/50

Porelast®

In de lengte elastische pleisterzwachtel.



Porelast®

Toepassingsgebieden

- als compressiezwachtels in de flebologie
- als functionele zwachtels in de sportgeneeskunde
- als steun en ontlasting bij contusies, distorsies en luxaties

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 75 %)
- met zelfkanten
- lucht- en waterdampdoorlatend
- röntgenstralendoorlaatbaar
- crèmekleurig

Productsamenstelling

Steunweefsel: 100 % katoen, synthetische latexlijm, bevat zinkoxide.

Porelast®

2,5 m (ongerekte lengte)

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel in vouwdoos			
6 x 2,5	30210	0181206	1/50
8 x 2,5	30211	0181214	1/50
10 x 2,5	30212	0181222	1/50



Varicex® S

Toepassingsgebieden

- voor toepassing van halfstarre, permanente verbanden bij oedeembehandeling, chronisch veneuze insufficiëntie, ulcus cruris, tromboflebitis
- in de nazorg bij fracturen

Eigenschappen

- zwachtels gecoat met zinklijm
- gebruiksklaar en tijdbesparend
- nauwelijks zichtbaar onder kleding
- met zelfkanten
- wit

Uitvoeringen

Varicex S

- viscose/polyamide
- bi-elastisch (elastisch in de breedte en lengterichting)
- tricot zwachtels
- voor verbanden in circulaire techniek
- stretcheffect, ook geschikt voor conische lichaamsdelen
- bijzonder eenvoudig aan te leggen

Varicex® S

uitgerekte lengte

Afmetingen (cm x m)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
afzonderlijk, in zak van aluminiumfolie		
10 x 5	20630	1/10/80
10 x 7	20631	1/10/60
10 x 10	20632	1/10/30
afzonderlijk in zak van aluminiumfolie, los in de doos		
10 x 5	20635	20
10 x 7	20636	20
10 x 10	20637	20

Dauerbinde® K

Langerek zwachtel.



Dauerbinde® K



Toepassingsgebieden

- voor het ondersteunen en ontlasten van het steun- en bewegingsapparaat
- voor het fixeren van verbanden
- voor het immobiliseren van lichaamsdelen
- voor het verminderen van hematomen
- voor compressietherapie

Eigenschappen

- hoge rustdruk, lage werkingsdruk
- stevige weefselstructuur
- crèmekleurig
- huidvriendelijk
- luchtdoorlaatbaar

Productsamenstelling

58 % katoen, 24 % polyamide,
8 % elastaan, 10 % viscose

Opmerkingen

- tot 15 keer wasbaar bij maximaal 95°C
- vanwege de hoge rustdruk moet het verband 's nachts of in rusttoestanden worden afgedaan.

Uitvoeringen

- gestructureerd oppervlak
- elastisch in lengterichting (ca. 170%).

Dauerbinde® K

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel in vouwdoos, 7 m (uitgerekte lengte)			
6 x 7	105904	3536083	1/80
8 x 7	105905	3536091	1/100
10 x 7	105900	3536042	1/80
12 x 7	105906	3536109	1/80
20 x 7	105901	3536059	1/30
10 x 14	105907	3536117	1/30
12 x 14	105902	3536067	1/30
los in de doos			
6 x 7	105908	3536125	10/180
8 x 7	105909	3536133	10/120
10 x 7	105910	3536141	10/60
12 x 7	105911	3536158	10/60
20 x 7	105903	3536075	10/30
14 m (uitgerekte lengte)			
10 x 14	105907	3536117	1/30
12 x 14	105902	3536067	1/30

Dauerbinde® F

Langerek zwachtel.



Dauerbinde® F



Toepassingsgebieden

- voor het ondersteunen en ontlasten van het steun- en bewegingsapparaat
- voor het fixeren van verbanden
- voor het immobiliseren van lichaamsdelen
- voor het verminderen van hematomen
- voor compressietherapie

Eigenschappen

- hoge rustdruk, lage werkingsdruk
- stevige weefselstructuur
- crèmekleurig
- huidvriendelijk
- luchtdoorlaatbaar

Productsamenstelling

63 % katoen, 28 % polyamide, 9 % elastaan.

Opmerkingen

- tot 15 keer wasbaar bij maximaal 95°C
- vanwege de hoge rustdruk moet het verband 's nachts of in rusttoestanden worden afgedaan

Uitvoeringen

- fijn oppervlak
- elastisch in lengterichting (ca. 160%)

Dauerbinde® F

7 m (uitgerekte lengte)

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel in vouwdoos			
6 x 7	105914	3536182	1/60
8 x 7	105916	3536208	1/88
10 x 7	105915	3536190	1/95
10 x 7	105991		1/95
12 x 7	105990		1/60
12 x 7	105917	3536216	1/60
los in de doos			
8 x 7	105912	3536166	10/70
10 x 7	105918	3536224	10/140
12 x 7	105913	3536174	10/120

Rosidal® Soft

Schuimstofverband.



Rosidal® soft

Toepassingsgebieden

- voor polstering onder lymfologische en flebologische compressiezwachtels

Eigenschappen

- elastisch in de breedte- en lengterichting
- gelijkmatige drukverdeling voor het opvangen van kleine wikkelfoutjes (bv. insnoeringen)
- verhoogt het comfort van de patiënt (bv. afpolstering van de tibia-rand)
- vermindert verschuiven van het compressieverband
- lucht- en waterdampdoorlatend
- scheurvast en rekbaar
- met knipranden
- wit

Productsamenstelling

100 % polyurethaan.

Opmerkingen

- tot 50 keer wasbaar bij maximaal 95°C
- elasticiteit en polsterwerking blijven ook na het wassen behouden

Rosidal® soft

2,0 m (ongerekte lengte), per paar in vouwdoos

Sterkte (cm)	Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
per paar in vouwdoos				
0,2	10 x 2	13016	2259661	1/23

Rosidal® soft

2,5 m (ongerekte lengte)

Sterkte (cm)	Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel in vouwdoos				
0,3	10 x 2,5	23110	2259653	1/30
0,4	15 x 2,5	23113		1/14
los in de doos				
0,3	10 x 2,5	23100		36
0,4	10 x 2,5	23101	2375764	24
0,4	12 x 2,5	23102	2259679	18

Cellona® Synthetische watten



Cellona® Synthetische watten



Toepassingsgebieden

- voor het onderpolsteren van gips-, cast- en compressieverbanden
- als polstering in de traumatologie en sportgeneeskunde
- voor het onderpolsteren van compressieverbanden

Eigenschappen

- elastisch-pluizig vliesstof
- voldoende stevig verband voor circulaire applicatie
- de vezels zijn naar believen scheurbaar onder lichte rek
- luchtdoorlaatbaar
- polyestervezel neemt nauwelijks vocht op

Productsamenstelling

100% polyestervezel zonder optische witmakers.

Cellona® Synthetische watten

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet steriel			
4 x 3	10690		108
6 x 3	10692	0398891	72
10 x 3	10694	0398909	48
15 x 3	10695	0398917	36
20 x 3	10696	0398925	24
5 x 2,7	92840	0398933	96
7,5 x 2,7	92841	0398941	72
10 x 2,7	92842	0398958	48
15 x 2,7	92843	0398966	36
20 x 2,7	92844	0398974	24

Komprex® I/II

Schuimrubberkompres, -zwachtel en -plaat, schuimstofplaat.



Komprex® I/II



Toepassingsgebieden

Komprex I

- Komprex Schuimrubberzwachtel: voor compressie bij oedeembehandeling in de flebologie en lymfologie
- Komprex Schuimrubberkompresen en schuimstofplaat: ter ondersteuning bij functionele zwachtels in de sportgeneeskunde
- voor plaatselijke drukverhoging in combinatie met andere producten voor compressie

Komprex II

- ter polstering bij compressieverband

Eigenschappen

Komprex I

- kan op maat worden geknipt
- lucht- en waterdampdoorlatend

Komprex II

- kan op maat worden geknipt
- luchtdoorlatend en slipvast
- speciaal gegolfde oppervlaktestructuur
- daardoor micromassage-effect, in het bijzonder voor patiënten met lymfoedemen

Productsamenstelling

Komprex I

- 100% synthetisch latex (styrolbutadien)

Komprex II

- smalle schuimrubber stroken ingebed in vliesstof.

Opmerkingen

- niet bedoeld voor sterilisatie

Komprex® I/II

Schuimrubberkompres, -zwachtel en -plaat, schuimstofplaat.

Komprex® Schuimrubberkompres

individueel in vouwdoos

Maat	Sterkte (mm)	Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
00 ovaal	10	9 x 6,5	22300	0844449	1/60
0 niervormig	10	9 x 5	22301	0179101	1/75
1 niervormig	12	12 x 6,5	22302	0179119	1/30

Komprex® Schuimrubberzwachtel

gerold, afzonderlijk in vouwdoos

Sterkte (mm)	Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5	8 x 1	22310		1/30
5	8 x 2	22313	0844423	1/30
10	8 x 2	22314	0844431	1/15
10	10 x 1	22312		1/20

Komprex® Schuimrubber plaat

gerold, afzonderlijk in foliezak

Sterkte (mm)	Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10	100 x 50	22320	0844456	1/10

Komprex® II Schuimplaat

gegolfd, afzonderlijk in foliezak

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
65 x 65	16985	2993426	1/6

tg® Soft

Polsterkousverband.



tg® soft

Toepassingsgebieden

- ter polstering onder gips- en synthetische castverbanden

Eigenschappen

- bijzonder rekbaar
- eenvoudig op maat te knippen
- zacht en soepel
- past zich aan de lichaamsvorm aan
- plakt aan de cast
- waterdamp- en luchtdoorlatend
- huidvriendelijk
- polstering en huidbescherming in één

Productsamenstelling

85 % katoen (ongebleekt),
15 % elastaan.

Tip

- bijzonder geschikt voor onderpolstering van gerichte immobilisatie

tg® soft

rol à 10 m in dispenserdoos

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
S voor onderarm, kinderarm, kinderbeen	13200	2667574	1/8
M voor onderarm, arm	13201	2665511	1/6
L voor been	13202	2665537	1/4



Mollelast®

Toepassingsgebieden

- voor het immobiliseren van lichaamsdelen
- voor het fixeren van verbanden
- voor compressie bij lymfologische vinger- en teenverbanden

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 100 %)
- luchtdoorlaatbaar en gripvast
- met weinig plooiën aan te leggen
- fixeert betrouwbaar ook op conische lichaamsdelen en rond gewrichten
- met zelfkanten
- wit

Productsamenstelling

56 % viscose, 44 % polyamide.

Mollelast®

uitgerekte lengte

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel verpakt			
4 x 4	14410	0846063	20/520
6 x 4	14411	0846071	20/360
8 x 4	14412	0846089	20/500
10 x 4	14413	0846097	20/360
12 x 4	14414	3879616	20/320
los in de doos			
4 x 4	19410	1162437	20/520
6 x 4	19411	1162445	20/360
8 x 4	19412	1162452	20/500
10 x 4	19413	1162460	20/360
12 x 4	19414	1162478	20/320
steriel, afzonderlijk verpakt			
6 x 4	20290	4177424	20/180
8 x 4	20291	4177432	20/180
10 x 4	20292	4177440	20/200
12 x 4	20293	4177457	20/200

Raucolast®

Elastische fixatiezwachtel.



Raucolast®



Toepassingsgebieden

- voor fixatie (bv. van wondverbanden, polstermateriaal, canules en spalken)

Productsamenstelling

100 % polyester.

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 100 %)
- luchtdoorlaatbaar en gripvast
- met weinig plooiën aan te leggen
- fixeert betrouwbaar ook op conische lichaamsdelen en rond gewrichten
- met zelfkanten
- wit

Raucolast® uitgerekte lengte

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
4 x 4	11493	4717757	20/320
6 x 4	11496	4717765	20/200
8 x 4	11499	4717773	20/200
10 x 4	11485	4717781	20/160
12 x 4	11488		20/120

Geka® Gaasverband

Starre fixatiezwachtel.



Geka® Gaasverband

Toepassingsgebieden

- voor het fixeren van verbanden
- voor het immobiliseren van lichaamsdelen

Eigenschappen

- niet-elastisch
- 20-draads
- met zelfkanten
- wit

Productsamenstelling

100 % viscose.

Geka® Gaasverband

uitgerekte lengte

Afmetingen (cm x m)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel verpakt		
4 x 4	14390	20/880
6 x 4	14391	20/600
8 x 4	14392	20/480
10 x 4	14393	20/400
los in de doos		
4 x 4	19160	20/880
6 x 4	19161	20/600
8 x 4	19162	20/480
10 x 4	19163	20/400
12 x 4	19164	20/320

Fixatiezwachtel bestaande uit hydrofiel gaas.

Toepassingsgebieden

- voor de fixatie van verbanden en andere materialen
- als voorlopig verband bij de eerste hulpverlening

Productsamenstelling

100 % katoen.

Eigenschappen

- zacht, soepel
- luchtdoorlatend

Cambric® L

Licht 21 gr/m², individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 5	37302	0234237	20/400
7 x 5	37303	0234245	20/400
10 x 5	37304	0234252	20/400
15 x 5	37305	0234260	20/400

Stella® Crepe

Steun- en fixatieverband.

Toepassingsgebieden

- voornamelijk bedoeld als steunverband en behandeling van gewonde gewrichten
- kan tevens als fixatieverband worden gebruikt, zoals een elastische, gezoomde gaaszwachtel

Eigenschappen

- comfortabel
- blijvend elastisch
- uitgerekte lengte: 4 m

Productsamenstelling

Stella Crepe niet steriel: 100% katoen

Stella Crepe S steriel: katoen, elastaan, polyester

Stella Crepe S Cello "spandex": 98% katoen / 2% elastaan (spandex)

Stella® Crepe

105 gr/m², individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 4	35154	0832576	20/800
7 x 4	35155	0832634	20/400
10 x 4	35156	0832683	20/400
15 x 4	35157	0832725	10/200
20 x 4	35158	0832758	10/200
30 x 4	35159	0832766	4/80

Stella® Crepe S

steriel

DE: double sterile packed - SE: single sterile packed

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
DE 5 x 4	20364	2679652	50
DE 7 x 4	20365	2679660	50
DE 10 x 4	20366	2679678	50
DE 15 x 4	20367	2679694	50
SE 5 x 4	20357	2679587	50
SE 7 x 4	20358	2679595	50
SE 10 x 4	20359	2679603	50
SE 15 x 4	20361	2679611	50
SE 20 x 4	20362	2679637	50
SE 30 x 4	20363	2679645	50

Stella® Crepe S Cello "spandex"

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 4	20337	3095536	20/800
7 x 4	20338	3095577	20/400
10 x 4	20339	2679983	20/400
15 x 4	20347	2680007	10/200
20 x 4	20348	3095569	10/200
30 x 4	20349	3095551	4/80

Gezoomde elastische zwachtel.

Toepassingsgebieden

- lichte zwachtel
- voor sportgebruik
- aanbevolen voor de fixatie van steriele verbanden die rechtstreeks direct op de wond

Eigenschappen

- gezoomde elastische zwachtel die zijn uitstekende rekbaarheid dankt aan het gebruik van polyamide/viscose-garens

Productsamenstelling

Stellastic viscose:

60 % polyamide, 40 % viscose

Stellastic katoen:

60 % polyamide, 40 % katoen.

Stellastic®

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel verpakt, viscose			
5 x 4	35230	0681460	20/120
7 x 4	35231	0681478	20/120
10 x 4	35232	0681486	20/120
15 x 4	35233	0681494	20/120
individueel verpakt, katoen			
5 x 4	35235	0234286	20/120
7 x 4	35236	0234294	20/120
10 x 4	35237	0234302	20/120
onverpakte windel, viscose			
5 x 4	35301	1178458	50/1000
6 x 4	35302	1536366	50/800
7 x 4	35303	1178466	50/600
8 x 4	35304	1536374	50/600
10 x 4	35305	1536382	50/400
15 x 4	35307	1178474	50/200

Mollelast® Haft

Cohesieve, bi-elastische fixatiezwachtel.



Mollelast® Haft

Toepassingsgebieden

- voor het immobiliseren van lichaamsdelen
- voor het fixeren van verbanden en katheters

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting
- dwarselastisch
- cohesief door latexpartikels
- luchtdoorlaatbaar
- zet nauwelijks dik aan
- betrouwbare ondersteuning
- spaarzaam materiaalgebruik
- met hoogwaardige, stabiele zelfkanten

Productsamenstelling

Mollelast haft:

66 % viscose, 34 % polyamide, gecoat met microfijne natuurlijke latexlijm

Mollelast haft color:

56 % viscose, 44 % polyamide, gecoat met microfijne natuurlijke latexlijm.

Uitvoeringen

■ Mollelast haft:

ca. 65 % lengterek/ca.
50 % dwarsrek

■ Mollelast haft color:

ca. 55 % lengterek/ca.
50 % dwarsrek.

Mollelast® Haft color

uitgerekte lengte, individueel in vouwdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
rood			
6 x 20	30073	1685254	1/18
8 x 20	30074	1685239	1/18
10 x 20	30075	1685247	1/18
blauw			
6 x 20	30076	1685221	1/18
8 x 20	30077	1685205	1/18
10 x 20	30078	1685213	1/18

Mollelast® haft

uitgerekte lengte, individueel in vouwdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
wit			
4 x 4	30063	1288059	1/120
6 x 4	30064	1288067	1/100
8 x 4	30065	1288075	1/120
10 x 4	30066	1288083	1/120
12 x 4	30067	4177465	1/100
4 x 20	30068	2661650	1/18
6 x 20	30069	1288109	1/18
8 x 20	30070	1288117	1/18
10 x 20	30071	1288125	1/18
12 x 20	30072	1288133	1/18

Mollelast® Haft latexvrij

Cohesieve, bi-elastische fixatiezwachtel.



Mollelast® Haft latexvrij

Toepassingsgebieden

- voor het immobiliseren van lichaamsdelen
- voor het fixeren van verbanden en katheters

Eigenschappen

- ca. 65 % elastisch in lengterichting
- min. 50 % elastisch in breedterichting
- luchtdoorlaatbaar
- zet nauwelijks dik aan
- betrouwbare ondersteuning
- spaarzaam materiaalgebruik
- met hoogwaardige, stabiele zelfkanten
- wit

Productsamenstelling

66 % viscose, 34 % polyamide, met een synthetische microcoating.

Mollelast® Haft latexvrij

uitgerekte lengte, individueel in vouwdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
4 x 4	89590	2831733	1/120
6 x 4	89591	2831766	1/100
8 x 4	89592	2831782	1/120
10 x 4	89593	2831816	1/120
12 x 4	89594	2937233	1/100
4 x 20	89595	2831824	1/18
6 x 20	89596	2831832	1/18
8 x 20	89597	2831840	1/18
10 x 20	89598	2831857	1/18
12 x 20	89599	2831873	1/18

Haftelast® Latexvrij

Cohesieve fixatiezwachtel.



Haftelast® Latexvrij



Toepassingsgebieden

- voor fixatie (bv. van wondverbanden, polstermateriaal, canules en spalken)
- voor het immobiliseren van lichaamsdelen

Eigenschappen

- in de lengterichting elastisch (crème: ong. 105 %; blauw, rood, geel: ong. 80 %)
- cohesief (zelfklevend)
- natuurlatexvrij
- luchtdoorlaatbaar
- zacht materiaal, goede modelleerbaarheid
- gemakkelijk af te rollen
- betrouwbare ondersteuning
- met zelfkanten

Productsamenstelling

60 % polyamide, 40 % katoen, met een synthetische microcoating.

Uitvoeringen

- crème
- rood
- blauw
- geel.

Haftelast® Latexvrij

Cohesieve fixatiezwachtel.

Haftelast® Latexvrij

uitgerekte lengte

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
crème, individueel in vouwdoos			
4 x 4	30820	2831949	1/120
6 x 4	30821	2831956	1/100
8 x 4	30822	2831923	1/120
10 x 4	30823	2831964	1/120
12 x 4	30824	3036266	1/100
6 x 20	30825	3036258	1/18
8 x 20	30826	3036274	1/18
10 x 20	30827	3036282	1/18
12 x 20	30828	3036290	1/18
blauw, individueel in vouwdoos			
6 x 20	30829	2831972	1/18
8 x 20	30830	2832012	1/18
rood, individueel in vouwdoos			
6 x 20	30831	2832004	1/18
8 x 20	30832	2831998	1/18
geel, individueel in vouwdoos			
6 x 20	30833	2831980	1/18
8 x 20	30834	2831931	1/18
blauw, 6 stuks los in de doos			
6 x 20	30835	3165297	6/24
8 x 20	30836	3165305	6/24
rood, 6 stuks los in de doos			
6 x 20	30837	3165289	6/24
8 x 20	30838	3165263	6/24
geel, 6 stuks los in de doos			
6 x 20	30839	3165271	6/24
8 x 20	30840	3165255	6/24



tg® Grip

Toepassingsgebieden

- voor steun- en fixatieverbanden met lichte compressie

Eigenschappen

- soepel met gelijkmatige drukwerking
- luchtdoorlaatbaar
- praktisch en handzaam
- met weinig plooiën aan te leggen
- naadloos gebreid
- dwarselastisch
- huidvriendelijk dankzij hoog katoenaandeel

Productsamenstelling

85 % katoen, elastodieën (latex), met polyamidegaren omsponnen

tg® Grip

rol à 10 m in dispenserdoos

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
A (4,6 cm) voor kinderhand, onderarm kind	24120	2259844	1/24
B (6 cm) kinderarm, onderbeen kind	24121	2259836	1/16
C (6,5 cm) voor arm (smal), kinderbeen	24122	2259828	1/16
D (7,5 cm) voor arm (middel), onderbeen	24123	2259810	1/16
E (8,75 cm) voor arm (groot), been, bovenbeen (klein)	24124	2259802	1/12
F (10 cm) voor been, bovenbeen (middel)	24125	2259794	1/12
G (12 cm) voor been, bovenbeen (groot)	24126	2259786	1/8
J (17,5 cm) voor romp (klein)	24127	2259778	1/6
K (21,5 cm) voor romp (middel)	24128	2259760	1/4
L (32,5 cm) voor romp (groot)	24129	2259752	1/4
M (37,5 cm) voor romp (extra groot)	24130	2259745	1/2

tg® Buisverband



Toepassingsgebieden

- huidbescherming onder gips- en synthetische castverbanden
- voor fixatie van wondverband op moeilijke plekken (hoofd, romp, vingers, extremiteiten)
- ter fixatie van polstermateriaal en wondverbanden

Eigenschappen

- naadloos gebreid
- huidvriendelijk
- van fijne garens
- rekbaar in breedterichting
- met weinig plooiën aan te leggen
- luchtdoorlaatbaar
- wit

Productsamenstelling

67 % katoen (gebleekt),
33 % steunweefsel: huidkleurig,
viscose.

tg® Buisverband gerold in dispenserdoos

	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
rol à 5 m				
Afm. 1	(1,4 cm) voor vingers, tenen	24020	1685353	1/80
Afm. 2	(2,3 cm) voor vingers, tenen	24021	2574754	1/50
Afm. 3	(3,0 cm) voor meerdere vingers, kinderarm	24022		1/40
Afm. 5	(5,5 cm) voor arm, onderbeen, kinderbeen	24023	2574762	1/40
Afm. 6	(6,5 cm) voor arm, been (middelgroot)	24024		1/40
Afm. 7	(7,0 cm) voor arm (groot), been, kinderhoofd	24025	2574770	1/40
rol à 20 m				
Afm. 1	(1,4 cm) voor vingers, tenen	24000	1685320	1/20
Afm. 2	(2,3 cm) voor vingers, tenen	24001	1685338	1/20
Afm. 3	(3,0 cm) voor meerdere vingers, kinderarm	24002	1685346	1/10
Afm. 5	(5,5 cm) voor arm, onderbeen, kinderbeen	24003	1685288	1/10
Afm. 6	(6,5 cm) voor arm, been (middelgroot)	24004	1685296	1/10
Afm. 7	(7,0 cm) voor arm (groot), been, kinderhoofd	24005	1685304	1/18
Afm. 9	(8,5 cm) voor bovenbeen (groot), hoofd, oksel	24006	1685312	1/12
Afm. 12	(12 cm) voor bovenbeen (extra groot), hoofd (groot), kinderromp	24007	4177473	1/12
rol à 10 m				
Afm. K1	(16 cm) voor romp (klein) < M	24030	4177481	1/10
Afm. K2	(21 cm) voor romp (groot) > L	24031	2661627	1/10

tg® Fix

Netverband.



tg® Fix



Toepassingsgebieden

- voor fixatie van wondverbanden en zalfcompressen

Eigenschappen

- wijdmazig getricoteerd
- biëlastisch
- met weinig plooiën aan te leggen
- vastmazig materiaal verhindert inscheuren van het net
- kan naar wens worden ingeknipt

Productsamenstelling

71 % polyamide (gekrept),
29 % elastodieën (latex), zonder optische witmakers.

Tip

- bij wondinspectie en kompreswisseling is enigszins optillen of wegrollen van de kous meestal voldoende
- goed geschikt voor poliklinische behandeling

tg® Fix

uitgerekte lengte

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
4 m (gerekte lengte) gerold in vouwdoos			
A voor vinger	24240	1534924	1/100
B voor kleine extremiteit (meerdere vingers/hand/voet)	24241	1534940	1/100
C voor grote extremiteit (klein hoofd/arm/been)	24242	1534965	1/98
D voor groot hoofd, kleine romp	24243	1534981	1/58
E voor grote romp, heup, oksel	24244	1535004	1/28
25 m gevouwen in dispenserdoos			
A voor vinger	24250	1534932	1/66
B voor kleine extremiteit (meerdere vingers/hand/voet)	24251	1534957	1/20
C voor grote extremiteit (klein hoofd/arm/been)	24252	1534973	1/16
D voor groot hoofd, kleine romp	24253	1534999	1/16
E voor grote romp, heup, oksel	24254	1535012	1/12

tg®-Kant-en-klaarverbanden

Kant-en-klaarverband.



tg® -Kant-en-klaarverbanden

Toepassingsgebieden

- voor het afdekken van huidaandoeningen
- fixatie van wondverbanden
- huidbescherming onder gips- en synthetische castverbanden

Eigenschappen

- eenvoudige en tijdbesparende hantering
- huidvriendelijk
- zacht en soepel
- goede pasvorm

Productsamenstelling

67 % katoen (gebleekt), 33 % viscose.

tg® -vingerling

	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
afzonderlijk in zak	24080	2204311	1/25/250
50 stuks in doos	24081	0845107	50/750

tg® -hand/voetverband

	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 stuks in doos	24085		10/200

tg® -hoofdverband

	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 stuks in doos	24083		10/200



Lenkelast®

Toepassingsgebieden

- voor ondersteuning en ontlasting
- fixatieverbanden bij de wondverzorging

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 130 %)
- gripvast, fijn
- duurzaam elastisch
- luchtdoorlaatbaar
- met weinig plooiën aan te leggen
- goede zit van het verband
- met zelfkanten

Productsamenstelling

64 % katoen, 35 % polyamide, 1 % elastaan.

Opmerkingen

- wasbaar op 60°C

Uitvoeringen

- wit

Lenkelast®

uitgerekte lengte

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel verpakt			
6 x 5	39430	0844761	1/10/250
8 x 5	39431	0844779	1/10/200
10 x 5	39432	0844787	1/10/240
12 x 5	39433	4177416	1/10/200
15 x 5	39434	0844803	1/10/160
20 x 5	39435		1/10/100
los in de doos			
6 x 5	39436		10/250
8 x 5	39437		10/200
10 x 5	39438		10/240
12 x 5	39440		10/200
15 x 5	39441		10/160
20 x 5	39442		10/100
steriel, afzonderlijk verpakt			
6 x 5	39453		10/90
8 x 5	39454		10/90
10 x 5	39455		10/100
12 x 5	39456		10/100

Lenkelast® Color

Universele zwachtel met gemiddelde rek.



Lenkelast® Color

Toepassingsgebieden

- voor ondersteuning en ontlasting
- fixatieverbanden bij de wondverzorging

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 115 %)
- gripvast, fijn
- duurzaam elastisch
- luchtdoorlaatbaar
- met weinig plooiën aan te leggen
- goede zit van het verband
- met zelfkanten

Productsamenstelling

63 % katoen, 36 % polyamide, 1 % elastaan.

Uitvoeringen

- blauw
- groen
- rood

Lenkelast® Color

uitgerekte lengte, los in de doos

Afmetingen (cm x m)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
blauw		
6 x 5	19446	10/80
8 x 5	19447	10/60
10 x 5	19448	10/60
groen		
6 x 5	19456	10/80
8 x 5	19457	10/60
10 x 5	19458	10/60
rood		
6 x 5	19466	10/80
8 x 5	19467	10/60
10 x 5	19468	10/60



Lenkideal®

Toepassingsgebieden

- ter comprimerende fixatie van wondverbanden
- voor compressie van extremiteiten in de flebologie
- voor pre-, intra- en postoperatieve trombosepreventie
- ter ondersteuning en ontlasting bij distorsies en contusies en voor sportbandages
- ter behandeling van peeschede-ontstekingen

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 85%)
- duurzaam elastisch
- luchtdoorlaatbaar
- zet niet dik aan
- met zelfkanten
- wit

Productsamenstelling

64% katoen, 34% polyamide, 2% elastaan.

Lenkideal®

uitgerekte lengte

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel verpakt			
6 x 5	14581	2991404	1/10/100
8 x 5	14582	2991412	1/10/140
10 x 5	14583	2991438	1/10/120
12 x 5	14584	2991446	1/10/120
15 x 5	14585	2991396	1/10/120
los in de doos			
4 x 5	19580		10/140
6 x 5	19581	2893386	10/100
8 x 5	19582	2893394	10/140
10 x 5	19583	2893402	10/120
12 x 5	19584	2893410	10/120
15 x 5	19585	2893360	10/120
20 x 5	19586		10/60

Idealbinde

Ideaalverband met korte rek volgens DIN.



Idealbinde

Toepassingsgebieden

- voor krachtige compressie van extremiteiten in de flebologie en lymfologie
- ter ondersteuning en ontlasting bij distorsies en contusies

Productsamenstelling

100 % katoen.

Opmerkingen

- wasbaar op 95°C

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 90%)
- textielelastisch dankzij getwijnde katoenen kettingdraad
- voldoet aan de eisen van DIN 61632
- stevige weefselstructuur
- slipvaste steun
- luchtdoorlaatbaar
- met zelfkant
- wit

Idealbinde

uitgerekte lengte

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
individueel verpakt			
6 x 5	14101	0274613	1/10/100
10 x 5	14103	0178848	1/10/60
15 x 5	14105	0274639	1/10/60
20 x 5	14106	0274647	1/35
los in de doos			
6 x 5	14111	1300490	10/100
8 x 5	14112	1300508	10/100
10 x 5	14113	1300516	10/60
12 x 5	14114	2442614	10/80
15 x 5	14115	1300524	10/60
20 x 5	14116	1300532	10/60
30 x 5	14118		10/40



Haftan®

Toepassingsgebieden

- voor gebruik als onderverband voor compressie- en tapeverband
- ter fixatie van drukversterkende kompressen en van polstermateriaal onder gips- en castverband

Eigenschappen

- dun
- open poriën, soepel
- zet niet dik aan
- hecht op zichzelf
- wit

Productsamenstelling

Polyurethaanschuim.

Haftan®

0,8 mm sterk

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7 x 27,5	22315	2087930	6/60
10 x 27,5	22316	2087948	6/60



Bandages & Orthoses

Cellacare® Cervical Classic

Anatomisch gevormde nekbrace.



Cellacare® Cervical Classic

Toepassingsgebieden

- cervicaal pijnsyndroom (cervicaal syndroom, cervicobrachiaal syndroom)
- musculaire torticollis
- artrose van de halswervelkolom zonder neurologische uitval (prolaps, protrusie, facetsyndroom)
- spondylartritis van de halswervelkolom (de ziekte van Bechterew)
- discotomie (tijdelijk na de operatie)
- distorsie van de halswervelkolom (tijdelijk na een trauma)
- stoornissen van de wervelgewrichtsfunctie (hypomobile functiestoornissen)

Productsamenstelling

Polyurethaan, katoen, elastaan, polyamide, polyester.

Opmerkingen

- overtrek: wasbaar op 60 °C
- nekbrace: handwas
- niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Uitvoeringen

- kleur: zwart/groen

Eigenschappen

Goed draagcomfort

- aangenaam lichte schuimkern die zijn vorm behoudt
- zacht, huidvriendelijk overtrek met een hoog aandeel katoen

Cellacare® Cervical Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Halsomvang (cm)	Kinhoogte (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	28 - 34	7,5	33570	3277068	1/18
1	28 - 34	9	33571	3276847	1/18
1	28 - 34	11	33572	3276730	1/18
2	34 - 42	7,5	33573	3276839	1/14
2	34 - 42	9	33574	3276896	1/14
2	34 - 42	11	33575	3276888	1/12
3	42 - 50	7,5	33576	3276870	1/14
3	42 - 50	9	33577	3276862	1/12
3	42 - 50	11	33578	3276854	1/12

Cellacare® Cervical Plus Classic

Anatomisch gevormde nekbrace met versteviging.



Cellacare® Cervical Plus Classic



Toepassingsgebieden

- cervicaal pijnsyndroom (cervicaal syndroom, cervicobrachiaal syndroom)
- musculaire torticollis
- artrose van de halswervelkolom zonder neurologische uitval (prolaps, protrusie, facetsyndroom)
- spondylartritis van de halswervelkolom (de ziekte van Bechterew)
- discotomie (tijdelijk na de operatie)
- distorsie van de halswervelkolom (tijdelijk na een trauma)
- spondylitis van de halswervelkolom

Eigenschappen

Goed draagcomfort

- aangenaam lichte schuimkern die zijn vorm behoudt
- zacht, huidvriendelijk overtrek met een hoog aandeel katoen

Betere stabilisatie

- extra stabiliserend element bij de kin
- extra slanker profiel onder de kin

Productsamenstelling

Polyurethaan, katoen, elastaan, polyamide, polyester, polyethyleen, polypropyleen.

Opmerkingen

- overtrek: wasbaar op 60 °C
- nekbrace: handwas
- niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten.

Uitvoeringen

- kleur: zwart/groen

Cellacare® Cervical Plus Classic

individueel in vouwdoos


Maat	Halsomvang (cm)	Kinhoogte (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	28 - 34	7,5	33580	3276805	1/18
1	28 - 34	9	33581	3276821	1/18
1	28 - 34	11	33582	3276763	1/18
2	34 - 42	7,5	33583	3276797	1/14
2	34 - 42	9	33584	3276748	1/14
2	34 - 42	11	33585	3276755	1/12
3	42 - 50	7,5	33586	3276813	1/14
3	42 - 50	9	33587	3276789	1/12
3	42 - 50	11	33588	3276771	1/12

Cellacare® Gilchrist Classic

Orthese voor het schoudergewricht.



Cellacare® Gilchrist Classic

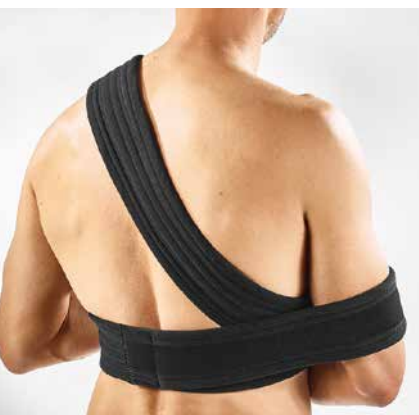

Toepassingsgebieden

- pijnlijke aandoeningen van spieren en pezen van de schouder
- acute lichte schouderinstabiliteit
- behandeling van een acute schouderluxatie
- distorsie of contusie van de schouder
- acuut letsel van de rotator cuff
- voor postoperatieve behandeling na operaties aan de rotator cuff of voor schouderluxatie
- acuut letsel van het AC-gewricht (acromioclaviculaire gewricht)

Eigenschappen

Beproefd werkingsmechanisme

- werkt volgens aan het klassieke Gilchrist- of Desault-verband
- voor het immobiliseren van de schouder en het ontlasten van het schoudergewricht
- vermindert schadelijke gewrichtsbewegingen

Goede functionaliteit

- bevestigingssysteem biedt goede ondersteuning en goede fixatie

Aangename draageigenschappen

- door het open productontwerp blijft de aangedane schouder vrij
- ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtigheidsmanagement

Productsamenstelling

Polyester, polyamide, polyurethaan.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Cellacare® Gilchrist Classic



individueel in vouwdoos

Maat	Omvang net onder de borst (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	<60	137485	3784949	1/30
2	60 - 80	137486	3784956	1/30
3	80 - 100	137487	3784964	1/30
4	100 - 120	137488	3784972	1/30

Cellacare® Gilchrist Easy

Schouder-armorthese.



Cellacare® Gilchrist Easy



Toepassingsgebieden

Conservatieve behandeling, posttraumatische en/of pre- of postoperatieve immobilisatie van schouder en bovenarm bij:

- schouderluxatie
- schouderdistorsie, contusie van de schouder en/of bovenarm
- acuut spier- en/of peesletsel van schouder en bovenarm
- fractuur van het schouderblad
- humeruskopfractuur
- letsels van het AC-gewricht
- verlamming van de bovenste extremiteiten

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- betrouwbare bewegingsbeperking waardoor het genezingsproces gunstig wordt beïnvloed
- immobilisatie van het schoudergewricht in endorotatie conform het bewezen postoperatieve/post-traumatische behandelingsprincipe (Gilchrist-principe)
- extra stabilisatie-elementen voor de bovenarm en de hand voor het behandelen van fracturen

Eenvoudig in het gebruik

- snel aan te leggen
- het design maakt zelfstandig aanleggen door de patiënt mogelijk
- revalidatietraining mogelijk zonder de orthese af te doen
- geschikt voor individuele instelling en aanpassing

Hoog draagcomfort

- licht en dun
- zachte en comfortabele binnenkant
- open handgeleiding
- ademend materiaal

Productsamenstelling

Polyester, katoen, polyurethaan, polyamide, polyacetaal, elastaan.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten.

Uitvoeringen

- kleur: zwart, groen

Cellacare® Gilchrist Easy Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Omvang net onder de borst (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stucks)
uitvoering voor rechts				
1	65 - 82	146101	4635157	1/16
2	80 - 102	146102	4635165	1/16
3	99 - 121	146103	4635173	1/16
4	115 - 134	146104	4635181	1/16
5	130 - 150	146105	4635199	1/16
uitvoering voor links				
1	65 - 82	146106	4635207	1/16
2	80 - 102	146107	4635215	1/16
3	99 - 121	146108	4635223	1/16
4	115 - 134	146109	4635231	1/16
5	130 - 150	146110	4635249	1/16

Cellacare® Gilchrist Sling Classic

Orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht.



Cellacare® Gilchrist Sling Classic

Toepassingsgebieden

- pijnlijke aandoeningen van spieren en pezen van de schouder
- acute lichte schouderinstabiliteit
- behandeling van een acute schouderluxatie
- distorsie of contusie van de schouder
- acuut letsel van de rotator cuff
- voor postoperatieve behandeling na een operatie aan de rotator cuff
- acuut letsel van het AC-gewricht (acromioclaviculaire gewricht)

Productsamenstelling

Polyamide, polyester.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Eigenschappen

Functioneel

- klittenbandsluiting voor eenvoudig en snel aanleggen
- klittenbandsluiting voor individuele aanpassing en bijstelling
- het productdesign maakt zelfstandig aanleggen en afnemen van het product mogelijk

Praktisch

- het bevestigingssysteem biedt goede ondersteuning en fixatie
- door de open productopbouw kan het ook over kleding worden gedragen
- uitgevoerd in een zwarte kleurstelling om zichtbaar vuil te verminderen

Comfortabel

- sling van gepolsterd materiaal voor aangename draageigenschappen
- ademend materiaal voor een passend temperatuur- en vochtigheidsmanagement

Cellacare® Gilchrist Sling Classic



individueel in vouwdoos

Maat	Omvang net onder de borst (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	65 - 80	140111	3687860	1/22
2	75 - 95	140112	3687886	1/22
3	90 - 110	140113	3687878	1/22
4	105 - 125	140114	3687894	1/22
5	120 - 140	140115	3687902	1/22

Cellacare® Clavicula Classic

Claviculabandage.



Cellacare® Clavicula Classic



Toepassingsgebieden

- voor conservatieve behandeling van claviculafracturen (sleutelbeenbreuken)
- voor postoperatieve en posttraumatische behandeling

Eigenschappen

Beproefd werkingsmechanisme

- kant-en-klare bandage volgens het klassieke rugzakverband
- trekt de schouders naar achteren voor het bij elkaar houden van de claviculafractuur of voor houdingsondersteuning

Praktisch in het gebruik

- eenvoudig en snel aanleggen door twee individueel verstelbare klittenbandsluitingen aan de achterkant
- de lengte van de schouderbanden kan door op maat knippen worden aangepast

Aangenaam draagcomfort

- de banden en de rugplaat zijn zacht gepolsterd
- huidvriendelijke materialen
- ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtigheidsmanagement

Productsamenstelling

Polyester, polyurethaan, polyamide.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen.

Uitvoeringen

- kleur: zwart/groen

Cellacare® Clavicula Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Omvang net onder de borst (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	50 - 75	137490	3784923	1/30
2	>75	137491	3784931	1/30

Cellacare® Epi Classic

Bandage voor het ellebooggewricht.



Cellacare® Epi Classic

Toepassingsgebieden

- behandeling van acute of chronische pijnklachten met functiestoornissen als gevolg van een verkeerde of overbelasting van de strek- en buigspieren van de onderarm met geïrriteerde pezen (tendinopathie)
- epicondylitis radialis ('tenniselleboog')
- epicondylitis humeri ulnaris ('golfer-selleboog')

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- compressietricot (compressieklasse 2) verbetert de proprioceptie
- twee pelotten hebben een intermitterend massage-effect

Aan het lichaam aangepaste pasvorm

- door de symmetrische opbouw kan de bandage zowel om de rechter- als om de linkerelleboog worden gedragen
- anatomisch gevormd

Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Productsamenstelling

Katoen, elastaan, polyamide, polyester, polyurethaan, synthetische latex.

Opmerkingen

- niet dragen tijdens langere rustfases
- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Cellacare® Epi Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Armomvang (9 cm vanaf de elleboog naar distaal) (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	19 - 21	108001	3562535	1/48
2	21 - 23	108002	3562543	1/48
3	23 - 26	108003	3562550	1/48
4	26 - 29	108004	3562568	1/48
5	29 - 32	108005	3562576	1/48

Cellacare® Epi Comfort

Actieve bandage voor het ellebooggewricht.



Cellacare® Epi Comfort



Toepassingsgebieden

- behandeling van acute of chronische pijnklachten met functiestoornissen als gevolg van een verkeerde of overbelasting van de strek- en buigspieren van de onderarm met geïrriteerde pezen (tendinopathie)
- epicondylitis radialis ('tenniselleboog')
- epicondylitis humeri ulnaris ('golfer-selleboog')

Eigenschappen

Geeft druk, masseert en stimuleert de doorbloeding van de strek- en buigspieren van de onderarm.

Eenvoudig en veilig in het gebruik

- eenvoudige bevestiging van de extra band door middel van een drukknop
- de vorm van de driehoek geeft de juiste drukkracht aan

Hoog draagcomfort

- huidvriendelijk door het microvezel-materiaal
- drukontlasting in de elleboogplooï door de geïntegreerde softcomfort-zone
- massage-effect door geïntegreerde siliconen pelottes

Aan het lichaam aangepaste pasvorm

- driedimensionaal anatomisch gevormd tricot
- langer tricot aan de achterkant voor afdekking van de triceps

Productsamenstelling

Polyamide, elastaan, katoen, polyester, polypropyleen, polyurethaan, TPU (thermoplastisch polyurethaan), roestvrij staal.

Opmerkingen

- niet dragen tijdens langere rustfases
- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de stabilisatiegordel verwijderen
- indien nodig de manchet met een vochtige doek afvegen.

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: taupe/wit

Tip

- door de afneembare stabilisatiegordel kan de compressie afhankelijk van het ziekteverloop worden verhoogd

Cellacare® Epi Comfort

individueel in vouwdoos

Maat	Armomvang (9 cm vanaf de elleboog naar distaal) (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	18 - 20	34190	3405941	1/32
2	20 - 22	34191	3406063	1/32
3	22 - 24	34192	3406071	1/32
4	24 - 27	34193	3406089	1/32
5	27 - 30	34194	3406097	1/32
6	30 - 33	34195	3406113	1/32

Cellacare® Epi Control Expert

Epicondylitis armband.



Cellacare® Epi Control Expert



Toepassingsgebieden

- epicondylitis / epicondylopathie humeri radialis (tenniselleboog)
- epicondylitis / epicondylopathie humeri ulnaris (golferseleboog)

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- circulaire klemconstructie die met een siliconen pad op de spier drukt
- anatomisch gevormde pad van siliconen
- verstelbare sluiting om de druk op de spier aan te passen

Eenvoudig in het gebruik

- eenvoudig aanleggen van de orthese dankzij het anatomische model
- eenvoudig te sluiten met klittenband verstelbare sluiting

Hoog draagcomfort

- zacht en comfortabel aan de binnenkant voor goed draagcomfort
- geribbelde pad met hoesje van textiel en antislip coating
- donkere buitenkant, eenvoudig af te wassen, vermindert vuil

Productsamenstelling

Polyester, polyurethaan, viscose, polyamide, polypropyleen, katoen, elastaan, silicone, polyacetaal.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- kleur: zwart/antraciet/oranje

Cellacare® Epi Control Expert

individueel in vouwdoos

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
U	142196	4400727	1/39

Cellacare® Manus Classic

Bandage voor het polsgewricht.



Cellacare® Manus Classic



Toepassingsgebieden

- actieve artrose of artritis van de pols
- posttraumatisch na matige tot ernstige distorsies (verstuikingen)
- peesontstekingen rondom de pols, peesschedeontstekingen (tendovaginitis)
- instabiliteit en functionele overbelasting rondom de pols
- nabehandeling van polsfracturen na operatie of gipsverband
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) in fase I

Eigenschappen

Combinatiewerking

- compressie van de pols door een combinatie van tricot, een siliconen pelotte en stabilisatieband
- stabilisatie door anatomisch gevormde spalk

Kan individueel worden aangepast

- de geïntegreerde spalk kan indien nodig thermoplastisch worden aangepast

Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Productsamenstelling

Katoen, elastaan, elastodieën, polyamide, polyester, polyurethaan, silicone.

Opmerkingen

- niet dragen tijdens langere rustfases
- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen.

Uitvoeringen

- verschillende uitvoeringen voor rechts en links
- kleur: zwart/groen

Tips

- kan door de afneembare polsgordel en uitneembare spalk worden aangepast aan het genezingsproces van de pols

Cellacare® Manus Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Polsomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
uitvoering voor rechts				
1	14 - 15	109001	3562584	1/48
2	15 - 17	109002	3562592	1/48
3	17 - 19,5	109003	3562600	1/48
4	19,5 - 22,5	109004	3562618	1/48
uitvoering voor links				
1	14 - 15	109005	3562626	1/48
2	15 - 17	109006	3562634	1/48
3	17 - 19,5	109007	3562642	1/48
4	19,5 - 22,5	109008	3562659	1/48

Cellacare® Manus Comfort

Actieve bandage voor het polsgewricht.



Cellacare® Manus Comfort



Toepassingsgebieden

- actieve artrose of artritis van de pols
- posttraumatisch na matige tot ernstige distorsies (verstuikingen)
- peesontstekingen rondom de pols, peesschedeontstekingen (tendovaginitis)
- instabiliteit en functionele overbelasting rondom de pols
- nabehandeling van polsfracturen na operatie of gipsverband
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) in fase II

Eigenschappen

Stabiliseert het polsgewricht in een functioneel neutrale stand, comprimeert en vermindert oedeemvorming.

Kan individueel worden aangepast

- de geïntegreerde spalk kan indien nodig thermoplastisch worden aangepast

Fysiologische pasvorm

- bandage van driedimensionaal anatomisch gevormd tricot
- uitsparingen in de band en de pelotte beschermen benige uitstulpingen tegen een te hoge druk

Hoog draagcomfort

- comfortabel door het aandeel microvezels
- speciaal tricot in de regio van de duim voor het doelgericht vermijden van drukplekken

Productsamenstelling

Polyamide, elastaan, katoen, polyester, polyurethaan, silicone.

Opmerkingen

- niet dragen tijdens langere rustfases
- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- vóór het wassen de gordel en spalk verwijderen.

Uitvoeringen

- verschillende uitvoeringen voor rechts en links
- kleur: taupe/wit

Tips

- kan door de afneembare polsgordel en uitneembare spalk worden aangepast aan het genezingsproces van de pols

Cellacare® Manus Comfort

individueel in vouwdoos

Maat	Polsomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
uitvoering voor rechts				
1	13 - 14,5	34611	3405966	1/28
2	14,5 - 16,5	34612	3406162	1/28
3	16,5 - 19	34613	3406170	1/28
4	19 - 23	34614	3406188	1/28
uitvoering voor links				
1	13 - 14,5	34711	3405958	1/28
2	14,5 - 16,5	34712	3406121	1/28
3	16,5 - 19	34713	3406147	1/28
4	19 - 23	34714	3406154	1/28

Cellacare® Manu Control Classic

Orthese voor het immobiliseren van de pols.



Cellacare® Manu Control Classic



Toepassingsgebieden

- posttraumatisch na matige tot ernstige distorsies (verstuikingen)
- actieve artrose of artritis van de pols
- peesontstekingen in de hand (tendinitis)
- peesschedeontstekingen (tendovaginitis)
- nabehandeling van polsfracturen na operatie of gipsverband
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) in fase I
- beginstadium van carpaaltunnelsyndroom
- instabiliteit en functionele overbelasting rondom de pols

Eigenschappen

Eenvoudig in het gebruik

- door drie onafhankelijk instelbare banden eenvoudig aan te passen
- een groene markering op het product vereenvoudigt het op de juiste manier aanbrengen van de verschillende banden

Eenvoudig omwisselen naar de andere kant

- door het gebruik van hetzelfde materiaal aan de binnen- en buitenkant kan de orthese zowel rechts als links worden gedragen
- de pijl op de palmaire stabilisatiestaaf vereenvoudigt het correct positioneren van de staaf

Draagcomfort

- zacht, comfortabel basismateriaal

Productsamenstelling

Polyamide, polyurethaan, polyester, katoen, polyacetaal, aluminium.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen
- vóór het wassen de palmaire aluminium spalken verwijderen en alle klittenbandsluitingen sluiten

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Cellacare® Manu Control Classic

individueel in vouwdoos



Maat	Polsomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	13,5 - 17,5	108745	3586278	1/30
2	16,5 - 20,5	108746	3586260	1/30
3	19,5 - 25	108747	3586286	1/30

Cellacare® Manu Control Comfort

Orthese voor het immobiliseren van de pols.



Cellacare® Manu Control Comfort

Toepassingsgebieden

- posttraumatisch na matige tot ernstige distorsies (verstuikingen)
- actieve artrose en/of artritis van de pols
- peesontstekingen in de hand (tendinitis)
- peesschedeontstekingen (tendovaginitis)
- nabehandeling van polsfracturen na operatie of gipsverband
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) in fase I
- beginstadium van carpaaltunnelsyndroom
- instabiliteit en functionele overbelasting rondom de pols

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- de pols wordt in een functioneel neutrale positie gestabiliseerd door de anatomisch gevormde spalk
- uitneembare palmaire stabilisatie-spalk
- individueel instelbaar door drie banden

Eenvoudig in het gebruik

- elastische band in het midden voor het reguleren van de druk
- vrij bewegelijke duim en vingers

Hoog draagcomfort

- zacht binnenmateriaal voor een goed draagcomfort
- naadloze randen
- licht, dun materiaal

Productsamenstelling

Polyamide, elastaan, polyester, katoen, polyurethaan, aluminium, polypropyleen, polyacetaal.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen
- vóór het wassen de palmaire aluminium spalken verwijderen en alle klittenbandsluitingen sluiten

Uitvoeringen

- verschillende uitvoeringen voor rechts en links
- kleur: taupe/wit

Cellacare® Manu Control Comfort

individueel in vouwdoos

Maat	Polsomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
uitvoering voor rechts				
1	13 - 16,5	140141	4221123	1/32
2	15,5 - 19,5	140142	4221131	1/32
3	18,5 - 22,5	140143	4221149	1/32
4	21,5 - 26	140547	4221156	1/32
uitvoering voor links				
1	13 - 16,5	140144	4221164	1/32
2	15,5 - 19,5	140145	4221172	1/32
3	18,5 - 22,5	140146	4221180	1/32
4	21,5 - 26	140548	4221198	1/32



Cellacare® Rhizo Classic

Toepassingsgebieden

- immobilisatie bij posttraumatische en postoperatieve toestanden van het basis- en/of het zadelgewricht van de duim
- immobilisatie bij letsels van de ulnaire banden ('skiduim')
- immobilisatie bij chronische instabiliteit van de duimgewrichten
- immobilisatie bij degeneratieve veranderingen van het basis- en/of zadelgewricht van de duim (scapho-trapezio-trapezoid-artrose, rhizartrose)

Productsamenstelling

Polyamide, polyester, polyurethaan, katoen, polyacetaal, aluminium.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- immobilisatie van het zadel- en basisgewricht van de duim
- de bewegingsvrijheid van de vingers wordt behouden
- het stabilisatie-element kan indien nodig door een vakman individueel worden aangepast

Eenvoudig in het gebruik

- eenvoudig aanleggen door twee sluitingen aan duim en pols
- een langere klittenbandsluiting voorkomt dat de band uit de gesp schuift – dit vereenvoudigt het aanleggen van het product
- door een individueel verstelbare duimsluiting kan het product aan de grootte van de duim worden aangepast

Hoog draagcomfort

- dun, valt niet op onder kleding
- bestaat uit zacht, comfortabel basis-materiaal
- ademend materiaal

Cellacare® Rhizo Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Polsomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	12,5 - 17,5	137931	3946951	1/39
2	16,5 - 21,5	137932	3946969	1/39

Cellacare® Rhizocast Classic

Orthese voor het immobiliseren van de pols en de duim.



Cellacare® Rhizocast Classic



Toepassingsgebieden

- immobilisatie bij posttraumatische of postoperatieve toestanden van de pols, het basis- en/of zadelgewricht van de duim, en bij ulnaire bandletsels ('skiduim')
- immobilisatie bij degeneratieve veranderingen van het basis- en/of zadelgewricht van de duim (scapho-trapezio-trapezoid-artrose, rhizartrorse)
- immobilisatie bij ontstekings-toestanden van het peesapparaat van de hand (tendovaginitis)
- immobilisatie bij beginnend carpaal-tunnelsyndroom (CTS)

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- vermindering van belasting van de handwortelbotjes, het gewrichtskapsel en de banden
- radiale stabilisatiestaaf
- laterale stabilisatiestaaf
- palmaire stabilisatiestaaf

Eenvoudig in het gebruik

- het product is door de drie apart verstelbare banden aan de pols en de band aan de duim eenvoudig aan te passen
- door een individueel verstelbare duimsluiting kan het product aan de grootte van de duim worden aangepast
- de staven zijn anatomisch gevormd

Hoog draagcomfort

- bestaat uit zacht, comfortabel basis-materiaal
- het gedeelte van de orthese rond de duim is zacht en comfortabel uitgevoerd
- ademend materiaal

Productsamenstelling

Polyamide, polyester, polyurethaan, katoen, polyacetaal, aluminium.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- verschillende uitvoeringen voor rechts en links
- kleur: zwart/groen

Cellacare® Rhizocast Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Polsomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
uitvoering voor rechts				
1	13,5 - 17,5	137940	3946928	1/30
2	16,5 - 20,5	137941	3946936	1/30
3	19,5 - 25	137942	3946944	1/30
uitvoering voor links				
1	13,5 - 17,5	137945	2400943	1/30
2	16,5 - 20,5	137946	2400901	1/30
3	19,5 - 25	137947	2400927	1/30



Cellacare®
Manus Classic



Cellacare®
Manus Comfort



Cellacare®
Manu Control Classic



Cellacare®
Manu Control Comfort



toenemende mate van stabilisatie →



Cellacare®
Rhizo Classic



Cellacare®
Rhizocast Classic



toenemende mate van stabilisatie →

Cellacare® Dorsafit Comfort

Orthese voor het stabiliseren van de lage rug.



Cellacare® Dorsafit Comfort



Toepassingsgebieden

- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug door verkeerde of overbelasting van spieren en banden in het gebied van de lage rug en het heiligbeen
- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug bij:
 - ◆ osteochondrose in het gebied van de lage rug
 - ◆ spondylartrose in het gebied van de lage rug (facetsyndroom)
 - ◆ spondylitis deformans

Productsamenstelling

Polyamide, elastaan, polyester, polyurethaan, polyethyleen, katoen.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Uitvoeringen

- kleur: taupe/wit

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- stabiliserende werking door vier geïntegreerde staven
- compressiewerking door elastisch materiaal (>350 CN/cm)

Eenvoudig in het gebruik

- gebruiksvriendelijke sluitsysteem
- ergonomisch lusje voor eenvoudiger aanleggen van de orthese

Aangenaam gevoel op de huid

- zacht en comfortabel materiaal aan de binnenkant voor goed draagcomfort
- dun en ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtigheidsmanagement

Cellacare® Dorsafit Comfort

individueel in vouwdoos

Maat	Tailleomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	65 - 80	108740	3555562	1/26
2	80 - 95	108741	3555570	1/26
3	95 - 110	108742	3558467	1/26
4	110 - 125	108743	3558475	1/26

Cellacare® Dorsal Classic

Orthese met pelotte voor het stabiliseren van de lage rug.



Cellacare® Dorsal Classic



Toepassingsgebieden

- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug door verkeerde of overbelasting van spieren en banden in het gebied van de lage rug en het heiligbeen
- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug bij:
 - ◆ osteochondrose in het gebied van de lage rug
 - ◆ spondylartrose in het gebied van de lage rug (facetsyndroom)

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- geïntegreerde staven stabiliseren de lage rug door ondersteuning van de buik- en rugmusculatuur
- uitneembare pelotte verhoogt de compressie in het gebied van de lage rug

Aan het lichaam aangepaste pasvorm

- universele pasvorm voor dames en heren
- door klittenbandsluiting individueel in te stellen

Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Productsamenstelling

Katoen, elastaan, elastodieën, polyamide, polyester, polyethyleen, polyurethaan.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Uitvoeringen

- kleur: zwart/groen

Cellacare® Dorsal Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Tailleomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	65 - 85	109011	3562667	1/11
2	85 - 110	109012	3562675	1/11
3	110 - 140	109013	3562683	1/11

Cellacare® Dorsal F/M Comfort

Orthese met pelotte voor het stabiliseren van de lage rug.



Cellacare® Dorsal F/M Comfort



Toepassingsgebieden

- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug door verkeerde of overbelasting van spieren en banden in het gebied van de lage rug en het heiligbeen
- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug bij:
 - ◆ osteochondrose in het gebied van de lage rug
 - ◆ spondylartrose in het gebied van de lage rug (facetsyndroom)

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- uitneembare, drukversterkende pelotte
- de WaveTec-pelotte past zich door het elastische materiaal aan de vorm van het lichaam aan
- de noppenstructuur van de pelotte zorgt voor drukverdeling

Eenvoudig in het gebruik

- handlussen vereenvoudigen het aanleggen van de orthese
- het sluitsysteem is eenvoudig te gebruiken
- door klittenbandsluiting individueel in te stellen

Aangenaam draaggevoel

- zacht en comfortabel tricot
- het geïntegreerde X-vormige plaatje voorkomt het oprollen tijdens het dragen

Productsamenstelling

Polyamide, katoen, elastaan, polyester, polyurethaan, polyurethaan lijn, polypropyleen, polyethyleen.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Uitvoeringen

- Dorsal F Comfort en Dorsal M Comfort, respectievelijk aangepast aan vrouwelijke en mannelijke anatomie
- kleur: taupe/wit

Cellacare® Dorsal F/M Comfort

individueel in vouwdoos

Maat	Tailleomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
Cellacare Dorsal F Comfort (gedetailleerde uitvoering voor vrouwen)				
1	70 - 90	136930	3759990	1/11
2	90 - 110	136931	3760006	1/11
3	110 - 130	136932	3760014	1/11
4	130 - 150	136933	3760022	1/11
5	150 - 170	136934	3760030	1/11
Cellacare Dorsal M Comfort (rechte uitvoering voor mannen)				
1	70 - 90	136935	3760048	1/11
2	90 - 110	136936	3760055	1/11
3	110 - 130	136937	3760063	1/11
4	130 - 150	136938	3760071	1/11
5	150 - 170	136939	3760089	1/11

Cellacare® Materna Classic

Orthese voor het stabiliseren van de lendenwervelkolom tijdens de zwangerschap.



Cellacare® Materna Classic

Toepassingsgebieden

- door een verkeerde houding of overbelasting veroorzaakte, specifieke pijnklachten van de lendenwervelkolom en in de regio van het heiligbeen tijdens de zwangerschap

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- twee geïntegreerde staven dragen bij aan het stabiliseren van de lage rug
- extra trekelementen maken een individuele aanpassing mogelijk

Eenvoudig in het gebruik

- de extra banden laten zich eenvoudig instellen
- eenvoudig te gebruiken sluitsysteem

Aantrekkelijk design

- anatomisch gevormd
- geïntegreerd gebloemd dessin voor een vrouwelijke uitstraling

Productsamenstelling

Polyamide, polyurethaan, katoen, polyester, elastodieën, elastaan, polyethyleen.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Uitvoeringen

- kleur: zwart/groen

Cellacare® Materna Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Heupomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	80 - 125	137008	3687910	1/12

Cellacare® Materna Comfort

Orthese voor het stabiliseren van de lendenwervelkolom tijdens de zwangerschap.



Cellacare® Materna Comfort



Toepassingsgebieden

- door een verkeerde houding of overbelasting veroorzaakte, aspecifieke pijnklachten van de lendenwervelkolom en in de regio van het heiligbeen tijdens de zwangerschap

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- vier geïntegreerde staven dragen bij aan het stabiliseren van de lage rug
- door geïntegreerde trekelementen kan de stabiliserende werking van de orthese individueel worden ingesteld

Eenvoudig in het gebruik

- door de speciale vorm van de sluiting aan de voorkant blijft de orthese beter zitten
- de trekelementen kunnen door de handlussen eenvoudig worden ingesteld
- platte kleefvlakken voor eenvoudiger openen van de sluitingen

Aangenaam gevoel op de huid

- zacht binnenmateriaal voor een hoog draagcomfort
- de randen zijn zacht uitgevoerd
- niet met natuurrubberlatex gemaakt

Productsamenstelling

Polyamide, polyester, katoen, polyisopreen, elastaan, polyurethaan, polyethyleen.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Uitvoeringen

- kleur: taupe/wit

Cellacare® Materna Comfort

individueel in vouwdoos

Maat	Heupomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	80 - 95	129901	3703675	1/16
2	95 - 110	129902	3703683	1/16
3	110 - 125	129903	3703691	1/16
4	125 - 140	129904	3703709	1/16

Cellacare® Lumbal Classic

Orthese met pelotte voor het stabiliseren van de lage rug.



Cellacare® Lumbal Classic



Toepassingsgebieden

- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug, veroorzaakt door een verkeerde belasting (abnormale biomechanische stress) of een te hoge spanning (door belasting veroorzaakt) van de spieren en banden van de lage rug en het sacrum
- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug bij:
 - ◆ osteochondrose in het gebied van de lage rug
 - ◆ spondylartrose in het gebied van de lage rug

Productsamenstelling

Polyester, elastaan, elastodieën (latex), polyamide, polyethyleen-vinylacetataat-copolymeer, polyurethaan, staal met polyethyleen- of epoxy-polyestercoating.

Opmerkingen

- wasbaar op 30 °C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- orthese voor het ontlasten en stabiliseren van de lage rug
- stabiliserende werking door vier geïntegreerde staven
- uitneembare, drukversterkende pelotte

Eenvoudig in het gebruik

- de orthese kan eenvoudig worden aangelegd
- het openen en sluiten van de klittenbandsluitingen wordt vereenvoudigd door handlussen
- de klittenbandsluitingen kunnen eenvoudig worden losgemaakt
- de trekelementen kunnen eenvoudig worden ingesteld

Goed draagcomfort

- ademend en vochtregulerend materiaal
- door klittenbandsluitingen individueel in te stellen
- door de trekelementen kan de orthese individueel worden aangepast

Uitvoeringen

- kleur: zwart/groen

Cellacare® Lumbal Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Heup-/Tailleomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	65 - 75	146931	4769568	1/16
2	75 - 90	146932	4769576	1/16
3	90 - 105	146933	4770236	1/16
4	105 - 120	146934	4770244	1/16
5	120 - 135	146935	4770251	1/16



Cellacare®
Dorsal
Classic



Cellacare®
Dorsal F/M
Comfort



Cellacare®
Lumbal
Classic



Cellacare®
Dorsafit
Comfort



Cellacare®
Dotop
Comfort

toenemende mate van stabilisatie →



Cellacare®
Materna
Classic/Comfort

Cellacare® Thorax F/M Classic

Thoraxbandage.



Cellacare® Thorax F



Cellacare® Thorax M

Toepassingsgebieden

- voor postoperatieve drukverlichting na thoracale chirurgie
- conservatieve behandeling van ribfracturen en thoracale contusies

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- beschermt de ribben bij elke ademhaling
- F met speciale uitsparing voor de borsten om bij de vrouwelijke anatomie te passen
- M met rechte pasvorm

Eenvoudig in het gebruik

- eenvoudig aan te trekken
- een brede klittenbandsluiting maakt nauwkeurige aanmeting en instelling van de compressie mogelijk

Hoog draagcomfort

- huidvriendelijk materiaal met katoen en zonder natuurrubberlatex
- versie M in grote maten verkrijgbaar voor een borstomvang van maximaal 145 cm
- nauwelijks te zien onder kleding

Productsamenstelling

Katoen, elastaan.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Uitvoeringen

- Thorax F Classic en Thorax M Classic, respectievelijk aangepast aan vrouwelijke en mannelijke anatomie
- kleur: wit

Cellacare® Thorax F Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Afmetingen (cm)	Omvang net onder de borst (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	15	65 - 100	190970	4177168	1/48
2	15	95 - 125	190971	4177192	1/48

Cellacare® Thorax M Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Afmetingen (cm)	Omvang net onder de borst (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	24	75 - 110	190972	4177176	1/30
2	24	105 - 145	190973	4177184	1/30

Cellacare® Abdominal Classic

Abdominale bandage.



Cellacare® Abdominal Classic

Toepassingsgebieden

- zwakte van de buikspieren
- na chirurgische ingrepen aan de buik
- peritoneale letsels
- voor zwakte bindweefsel in het gebied van de buik en onderbuik
- na liposuctie en buikwandcorrectie

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- verdeelt de druk gelijkmatig over het gehele bereik
- aangename ventrale polstering rond het letsel- of wondgebied
- ondersteunt de terugkeer naar het oude figuur na de bevalling

Eenvoudig in het gebruik

- verstelbare sluiting
- een brede klittenbandsluiting maakt nauwkeurige aanmeting en instelling van de compressie mogelijk
- maakt snel en eenvoudig wisselen mogelijk

Hoog draagcomfort

- huidvriendelijk materiaal met katoen en zonder natuurrubberlatex
- nauwelijks te zien onder kleding
- in grote maten verkrijgbaar voor een buikomvang van maximaal 150 cm

Productsamenstelling

Katoen, elastaan.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Cellacare® Abdominal Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Buikomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	65 - 85	190961	4176384	1/30
2	70 - 95	190962	4176392	1/30
3	90 - 110	190963	4176400	1/30
4	105 - 125	190964	4176418	1/30
5	120 - 150	190965	4176426	1/30

Cellacare® Genu Classic

Bandage voor het kniegewricht.



Cellacare® Genu Classic

Toepassingsgebieden

Behandeling van acute of chronische pijn- en gewrichtsklachten, evenals functiestoornissen na een letsel of operatie, en als gevolg van verkeerde of overbelasting van het kniegewricht, het kapsel, de pezen, spieren en/of banden bij:

- beginnende gonartrose of artritis met en zonder gewrichtsoedeem
- lichte mediale of laterale band-instabiliteit
- patellofemoraal pijnsyndroom in combinatie met functionele therapie
- lichte mediale of laterale meniscuspathologie (acuut-traumatisch, degeneratief) en als postoperatieve behandeling na meniscusoperaties

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- compressietricot (compressieklasse 2) verbetert de proprioceptie
- drukversterkende pelotte van elastisch materiaal

Massage-effect

- geïntegreerde ringvormige pelotte zorgt voor een intermitterend massage-effect bij bewegingen en werkt drukverdelend

Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Productsamenstelling

Elastodieën, katoen, polyamide, elastaan, polyurethaan, silicone, staal, polyester.

Opmerkingen

- niet dragen tijdens langere rustfases
- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Cellacare® Genu Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Omvang 1 (omvang 12 cm vanaf het midden van de knie naar onderen) (cm)	Omvang 2 (omvang 14 cm vanaf het midden van de knie naar boven) (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	28 - 32	38 - 42	106001	3562485	1/40
2	32 - 36	42 - 46	106002	3562493	1/40
3	36 - 40	46 - 50	106003	3562501	1/40
4	40 - 44	50 - 54	106004	3562519	1/40
5	44 - 48	54 - 58	106005	3562527	1/40

Cellacare® Genu Comfort

Actieve bandage voor het kniegewricht.



Cellacare® Genu Comfort

Toepassingsgebieden

Behandeling van acute of chronische pijn- en gewrichtsklachten, evenals functiestoornissen na een letsel of operatie, en als gevolg van verkeerde of overbelasting van het kniegewricht, het kapsel, de pezen, spieren en/of banden bij:

- beginnende gonartrose of artritis met en zonder gewrichtsoedeem
- lichte mediale of laterale band-instabiliteit
- patellofemorale pijnsyndroom in combinatie met functionele therapie
- lichte mediale of laterale meniscuspathologie (acuut-traumatisch, degeneratief) en als postoperatieve behandeling na meniscusoperaties

Eigenschappen

Geeft druk, zorgt bij beweging voor een intermitterende massage door de ringvormige pelotte en kan de proprioceptie verbeteren.

Aan het lichaam aangepaste pasvorm

- driedimensionaal anatomisch gevormd tricot
- in twee richtingen elastisch draagmateriaal

Aangenaam gevoel op de huid

- huidvriendelijk door het microvezelmateriaal
- transpiratievocht wordt naar buiten geleid

Comfortabele pasvorm

- gepatenteerde softcomfortzone in de knieholte
- bijzonder elastisch om afglijden te voorkomen

Productsamenstelling

Polyamide, elastaan, katoen, polyester, polyvinylchloride, polyurethaan, staal, silicone.

Opmerkingen

- niet dragen tijdens langere rustfases
- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: taupe/wit

Cellacare® Genu Comfort

individueel in vouwdoos

Maat	Omvang 1	Omvang 2	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
	(omvang 12 cm vanaf het midden van de knie naar onderen) (cm)	(omvang 14 cm vanaf midden van de knie naar boven) (cm)			
1	23 - 27	33 - 37	34180	3405982	1/48
2	27 - 31	37 - 41	34181	3406196	1/48
3	31 - 35	41 - 45	34182	3406204	1/48
4	35 - 39	45 - 49	34183	3406212	1/48
4+	35 - 39	49 - 53	138180	3834199	1/48
5	39 - 43	49 - 53	34184	3406220	1/48
5+	39 - 43	53 - 57	38181	3834207	1/48
6	43 - 47	53 - 57	34185	3406238	1/48
6+	43 - 47	57 - 61	138182	3834223	1/48
7	47 - 51	57 - 61	34186	3406246	1/48
7+	47 - 51	61 - 65	138183	3834231	1/48
8	51 - 55	61 - 65	34187	3406253	1/48
8+	51 - 55	65 - 69	138184	3834249	1/48

Cellacare® Genucast 0° Classic

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht - 0°.



Cellacare® Genucast 0° Classic

Toepassingsgebieden

- tijdelijke immobilisatie van het kniegewricht na letsels/operaties

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- zelfklevende banden met siliconen-coating voorkomen dat de orthese afzakt
- goede fixatie van de orthese dankzij tegenovergesteld verlopende klittenbanden
- de aan de zij- en achterkant geplaatste aluminiumstaven zijn uitneembaar en kunnen individueel worden aangepast

Praktisch in het gebruik

- wordt open geleverd om eenvoudig en snel te worden gebruikt
- kleine klittenbandgordel vereenvoudigt het aanbrengen
- uitgevoerd in een zwarte kleurstelling om zichtbaar vuil te verminderen

Goed draagcomfort

- huidvriendelijke materialen
- zachte polstering draagt bij aan het verminderen van drukplekken
- ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtigheidsmanagement

Productsamenstelling

Polyester, polyurethaan, polyoxymethyleen, aluminium, polyamide, silica.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Cellacare® Genucast 0° Classic

afzonderlijk, in foliezak

Maat	Kuitomvang (cm)	Bovenbeenomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	24 - 28	30 - 38	137500	3784816	1/22
2	28 - 32	38 - 46	137501	3784824	1/18
3	32 - 40	46 - 54	137502	3784832	1/18
4	40 - 48	54 - 68	137503	3784840	1/12

Cellacare® Genucast 20° Classic

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht - 20°.



Cellacare® Genucast 20° Classic

Toepassingsgebieden

- tijdelijke immobilisatie van het kniegewricht na letsels/operaties

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- zelfklevende banden met siliconen-coating voorkomen dat de orthese afzakt
- goede fixatie van de orthese dankzij tegenovergesteld verlopende klittenbanden
- de aan de zij- en achterkant geplaatste aluminiumstaven zijn uitneembaar en kunnen individueel worden aangepast

Praktisch in het gebruik

- wordt open geleverd om eenvoudig en snel te worden gebruikt
- kleine klittenbandgordel vereenvoudigt het aanbrengen
- uitgevoerd in een zwarte kleurstelling om zichtbaar vuil te verminderen

Goed draagcomfort

- huidvriendelijke materialen
- zachte polstering draagt bij aan het verminderen van drukplekken
- ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtigheidsmanagement

Productsamenstelling

Polyester, polyurethaan, polyoxymethyleen, aluminium, polyamide, silica.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Cellacare® Genucast 20° Classic



afzonderlijk, in foliezak

Maat	Kuitomvang (cm)	Bovenbeenomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	24 - 28	30 - 38	137505	3784857	1/22
2	28 - 32	38 - 46	137506	3784865	1/18
3	32 - 40	46 - 54	137507	3784873	1/18
4	40 - 48	54 - 68	137508	3784881	1/12

Cellacare® Genucast Modular Classic

Modulaire orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht - 20°.



Cellacare® Genucast Modular Classic

Toepassingsgebieden

- tijdelijke immobilisatie van het kniegewricht na letsels/operaties

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- zelfklevende banden met siliconen-coating voorkomen dat de orthese afzakt
- goede fixatie van de orthese dankzij tegenovergesteld verlopende klittenbanden
- de aan de zij- en achterkant geplaatste aluminiumstaven zijn uitneembaar en kunnen individueel worden aangepast

Praktisch in het gebruik

- wordt open geleverd om eenvoudig en snel te worden gebruikt
- kleine klittenbandgordel vereenvoudigt het aanbrengen
- uitgevoerd in een zwarte kleurstelling om zichtbaar vuil te verminderen

Goed draagcomfort

- huidvriendelijke materialen
- zachte polstering draagt bij aan het verminderen van drukplekken
- ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtigheidsmanagement

Productsamenstelling

Polyester, polyurethaan, polyoxymethyleen, aluminium, polyamide, silica.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Cellacare® Genucast Modular Classic

afzonderlijk, in foliezak

Maat	voor lichaamslengte (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	<160	137510	3784899	1/15
2	160 - 180	137511	3784907	1/15
3	>180	137512	3784915	1/12

Cellacare® Patella Control Expert

Patellapeesbandage.



Cellacare® Patella Control Expert

Toepassingsgebieden

- tendinitis of tendopathie van de patellapees (synoniem: springersknie of patellapuntsyndroom)
- chondropathie patellae
- patellofemorale artrose
- anterieure kniepijn

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- circulair verlopende constructie onder de patella
- anatomisch gevormde pad van siliconen
- verstelbare sluiting om de druk op de patellapees aan te passen
- proprioceptie-effect en pijnvermindering

Eenvoudig in het gebruik

- eenvoudig aanleggen van de orthese dankzij het anatomische model
- eenvoudig te sluiten met klittenband
- verstelbare sluiting

Hoog draagcomfort

- zachte comfortzone in de knieholte voor goed draagcomfort
- pad met hoesje van textiel en antislip coating
- donkere buitenkant, eenvoudig af te wassen, vermindert vuil

Productsamenstelling

Polyester, polyurethaan, viscose, polyamide, polypropyleen, katoen, elastaan, silicone, polyacetaal.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- kleur: zwart/antraciet/oranje

Cellacare® Patella Control Expert

individueel in vouwdoos

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
U	142197	4400735	1/39

Cellacare® Malleo Classic

Bandage voor het enkelgewricht.



Cellacare® Malleo Classic

Toepassingsgebieden

- bandletsels boven aan de enkel (graad 1)
- lichte chronische bandinstabiliteit
- lichte plaatselijke, algemene hypermobilitéit
- artrose (ook actieve artrose), artritis
- perimalleolaire zwelling, gewrichtsoedeem, intra-articulaire overprikkeling

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- compressietricot (compressieklasse 2) verbetert de proprioceptie
- twee pelotten hebben een intermitterend massage-effect

Aan het lichaam aangepaste pasvorm

- door de symmetrische opbouw kan de bandage zowel om de rechter- als om de linker enkel worden gedragen
- anatomisch gevormd

Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Productsamenstelling

Katoen, elastaan, elastodieën, polyamide, polyester, polyurethaan, silicone.

Opmerkingen

- niet dragen tijdens langere rustfases
- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Cellacare® Malleo Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Enkelomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	18 - 21	107001	3562444	1/48
2	21 - 24	107002	3562451	1/48
3	24 - 27	107003	3562469	1/48
4	27 - 30	107004	3562477	1/48

Cellacare® Malleo Comfort

Actieve bandage voor het enkelgewricht.



Cellacare® Malleo Comfort

Toepassingsgebieden

- bandletsels boven aan de enkel (graad 1)
- lichte chronische bandinstabiliteit
- lichte plaatselijke, algemene hypermobilitéit
- artrose (ook actieve artrose), artritis
- perimalleolaire zwelling, gewrichtsoedeem, intra-articulaire overprikkeling

Eigenschappen

Geeft druk en ondersteunt het enkelgewricht, en kan de proprioceptie verbeteren.

Aan het lichaam aangepaste pasvorm

- driedimensionaal anatomisch gevormd tricot
- in twee richtingen elastisch draagmateriaal

Aangenaam gevoel op de huid

- zacht microvezelmateriaal
- transpiratievocht wordt naar buiten geleid
- de siliconen pelotten aan beide zijden hebben een massage-effect

Comfortabele pasvorm

- verminderde compressiedruk aan de randen
- gepatenteerde softcomfortzone bij de wreef

Productsamenstelling

Polyamide, elastaan, katoen, polyester, silicone.

Opmerkingen

- niet dragen tijdens langere rustfases
- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: taupe/wit

Cellacare® Malleo Comfort 
individueel in vouwdoos

Maat	Enkelomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	17 - 19	33761	3405990	1/32
2	19 - 21	33762	3406261	1/32
3	21 - 23	33763	3406279	1/32
4	23 - 26	33764	3406287	1/32
5	26 - 29	33765	3406295	1/32
6	29 - 32	33766	3406303	1/32

Cellacare® Achillo

Actieve bandage voor de achillespees.



Cellacare® Achillo



Toepassingsgebieden

- acute, chronische, posttraumatische of postoperatieve irritatie van de achillespees
- achillodynie, bursitis achillea en subachillea, peritendinitis, peritendinose, tendinitis
- postoperatief na achillespeesruptuur of gedeeltelijke achillespeesruptuur
- bij bursectomie en operatie aan glijweefsel van de achillespees

Eigenschappen

- comprimeert gewricht en achillespees
- stimuleert de doorbloeding door wrijfmassage
- lymphtec-pelotte omvat het peeskanaal van de hiel tot aan het onderbeen en stimuleert gericht de lymfedrainage
- vermindering van zwellingen en bloedingstoringen
- hoog draagcomfort
- bijzonder huidvriendelijk door hoog aandeel katoen
- anatomische pasvorm
- compressiegereduceerd weefsel rond de wreef, tegen insnoering

Productsamenstelling

Katoen, polyamide, elastodieën (natuurlatex), elastaan, silicone, polyurethaan.

Opmerkingen

- niet dragen tijdens langere rustfases
- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: blauw/zwart

Tips

- zo nodig kan ter ontlasting van de achillespees een bijgevoegde hielwig in de schoen geplaatst worden, waardoor verdere pijnvermindering kan worden bereikt. Een extra hielwig kan aan de gezonde voet worden gedragen om het beenlengteverschil te overbruggen en zo scheefstand van het bekken te verhinderen

Cellacare® Achillo

individueel in vouwdoos

Maat	Enkelomvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	17 - 19	24660	4337465	1/20
2	19 - 21	24661	4337473	1/20
3	21 - 23	24662	4337499	1/20
4	23 - 26	24663	4337507	1/20
5	26 - 29	24664	4337515	1/20
6	29 - 32	24665	4337523	1/20

Cellacare® Malleo Akut Classic

Orthese voor stabilisatie van het enkelgewricht.



Cellacare® Malleo Akut Classic



Toepassingsgebieden

- bandletsels boven aan het enkelgewricht (graad 1-2)
- actieve artrose, artritis
- chronische bandinstabiliteit
- perimalleolaire zwelling, gewrichtsoedeem, intra-articulaire overprikkeling

Eigenschappen

Stabiliseert het enkelgewricht op één niveau volgens het principe van de klassieke U-spalk.

Zeer veilig in het gebruik

- eenvoudig sluitsysteem met klittenbandsluitingen
- visuele gebruiksinstructies op het product

Eén maat voor alle patiënten

- individuele aanpassing aan de anatomie van de patiënt
- eenvoudige bevoorrading en opslag

Goed draagcomfort

- zacht en flexibel ter hoogte van de malleoli
- binnenbekleding met mesh overtrokken voor een goede ventilatie

Productsamenstelling

Polyethyleen, thermoplastisch elastomeer, polyurethaan, polyester, polyamide, acetaalhars, katoen.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/groen

Tips

- om de volledige werking te bereiken moet de orthese in combinatie met een veterschoen worden gedragen

Cellacare® Malleo Akut Classic

individueel in vouwdoos

Maat	Schoenmaat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	35 - 45	33709	3405909	1/30

Cellacare® Malleo Control Comfort

Orthese voor acute behandeling van het enkelgewricht.



Cellacare® Malleo Control Comfort



Toepassingsgebieden

- bandletsels boven aan het enkelgewricht (graad 1-2)
- actieve artrose, artritis
- chronische bandinstabiliteit
- perimalleolaire zwelling, gewrichtsoedeem, intra-articulaire overprikkeling

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- maakt dorsaal- en plantairflexie mogelijk, en biedt ondersteuning tegen een bovenmatige inversie van de enkel
- beperkt de bovenmatige bewegingsuitslag voor inversie/eversie door middel van externe stabilisatie met staven aan de binnen- en buitenkant
- de afrolbeweging wordt niet significant beperkt

Eenvoudig in het gebruik

- instructies voor het aanbrengen maken een juist gebruik mogelijk
- drie banden voor snel en correct aanbrengen
- de hielband kan tijdens het dragen van de orthese worden aangepast

Aangenaam draaggevoel

- verschillende uitvoeringen voor rechts en links voor een betere pasvorm die past bij de anatomische vorm van de enkel
- zacht, comfortabel polstermateriaal

Productsamenstelling

Polypropyleen, polyurethaan, polyester, polyamide, katoen, styrol-thermoplast.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- verschillende uitvoeringen voor rechts en links
- kleur: taupe/wit

Cellacare® Malleo Control Comfort

individueel in vouwdoos

Maat	voor lichaamslengte (m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
uitvoering voor rechts				
1	< 1,6	129911	3896305	1/26
2	> 1,6	129912	3896313	1/26
uitvoering voor links				
1	< 1,6	129913	3896321	1/26
2	> 1,6	129914	3896339	1/26

Cellacare® Malleo Control Expert

Orthese voor stabilisatie van het enkelgewricht.



Cellacare® Malleo Controle Expert

Toepassingsgebieden

- conservatieve behandeling van distorsies van het enkelgewricht (graad 1 en 2)
- chronische instabiliteit van de banden rond de enkel
- postoperatieve behandeling van het enkelgewricht na bandoperaties
- actieve artrose, reumatoïde artritis van het enkelgewricht
- plaatselijke of algemene hypermobilititeit

Eigenschappen

Betrouwbaar werkingsprincipe

- het enkelgewricht wordt aan de mediale en laterale zijde omsloten, wat resulteert in stabilisatie (U-schaaleffect)
- de band in de vorm van een acht draagt bij aan stabilisatie van de bewegingsbeperking in supinatie- en pronatierichting
- natuurlijke afwikkelingsbeweging van de hiel tot de tenen mogelijk

Eenvoudig in het gebruik

- door de brede opening is eenvoudig aan- en uittrekken mogelijk
- de circulaire band en het innovatieve koordsluitsysteem maken snel en eenvoudig sluiten mogelijk

Hoog draagcomfort

- anatomisch gevormde schalen
- zacht polstermateriaal rond de knobbels
- 'Soft Comfort Zone' op de wreef

Productsamenstelling

Polyamide, polyester, elastaan, katoen, viscose, polyethyleen, polyurethaan, polypropyleen, polyoxymethyleen, ethyleenvinylacetaat, acrylhars, messing.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet drogen in de wasdroger, niet bleken, niet chemisch reinigen

Uitvoeringen

- zowel rechts als links te dragen
- kleur: zwart/antraciet/oranje

Cellacare® Malleo Control Expert

individueel in vouwdoos

Maat	Hiel-wreef-omvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1	28 - 34	142130	4378998	1/30
2	33 - 38	142131	4379004	1/30

Cellacare® Tarsotec Expert

Orthese voor het stabiliseren en beschermen van het spronggewricht.



Cellacare® Tarsotec Expert

Toepassingsgebieden

- bij de genezingsfase passende ondersteuning bij enkeldistorsies tot fibulaire bandrupturen
- bij letsels van de calcaneocuboidale banden
- bij chronische instabiliteit van de enkel
- bij degeneratieve en door ontstekingen veroorzaakte functiestoornissen van het bovenste en onderste spronggewricht
- als profylaxe of recidiefprofylaxe in recreatie- en competitiesport
- als postoperatieve behandeling (als bescherming en voor revalidatie na bandreconstructies)

Eigenschappen

Ondersteunt de behandeling van de enkel in alle genezingsfases, van de immobilisatie en de verkorte remobilisatie tot de mobilisatie.

Kan variabel worden gebruikt

- unieke, gepatenteerde band voor de voorvoet houdt afschuiven van de talus tegen
- uitneembare verstevigingsdelen beperken de pro- en supinatie

Eenvoudig in het gebruik

- met circulaire banden en een hielband wordt de orthese op het been bevestigd
- na instructie door de patiënt zelf aan te leggen

Bij de genezingsfase passende werking

- immobilisatie door hoge stabiliteit
- remobilisatie bij gemiddelde stabiliteit
- mobilisatie en lichte ondersteuning

Productsamenstelling

Katoen, polyamide, elastaan, polyurethaan, polyester, polyethyleen, polypropyleen, silicone, polyvinylchloride.

Opmerkingen

- wasbaar op 30°C, niet strijken, niet bleken, niet drogen in de wasdroger, niet chemisch reinigen
- voorafgaand aan het wassen de klittenbandsluiting sluiten en de verstevigingsdelen uitnemen

Uitvoeringen

- verschillende uitvoeringen voor rechts en links
- kleur: zwart/antraciet/oranje

Cellacare® Tarsotec Expert

individueel in vouwdoos

Maat	Hiel-wreef-omvang (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
uitvoering voor rechts				
1	28 - 34	33510	2921914	1/24
2	34 - 40	33511	2921922	1/24
uitvoering voor links				
1	28 - 34	33512	2921930	1/24
2	34 - 40	33513	2921948	1/24



Cellacare®
Malleo
Classic



Cellacare®
Malleo
Comfort



Cellacare®
Malleo Akut
Classic



Cellacare®
Malleo Control
Comfort




Cellacare®
Malleo Control
Expert



Cellacare®
Tarsotec
Expert

— toenemende mate van stabilisatie —→

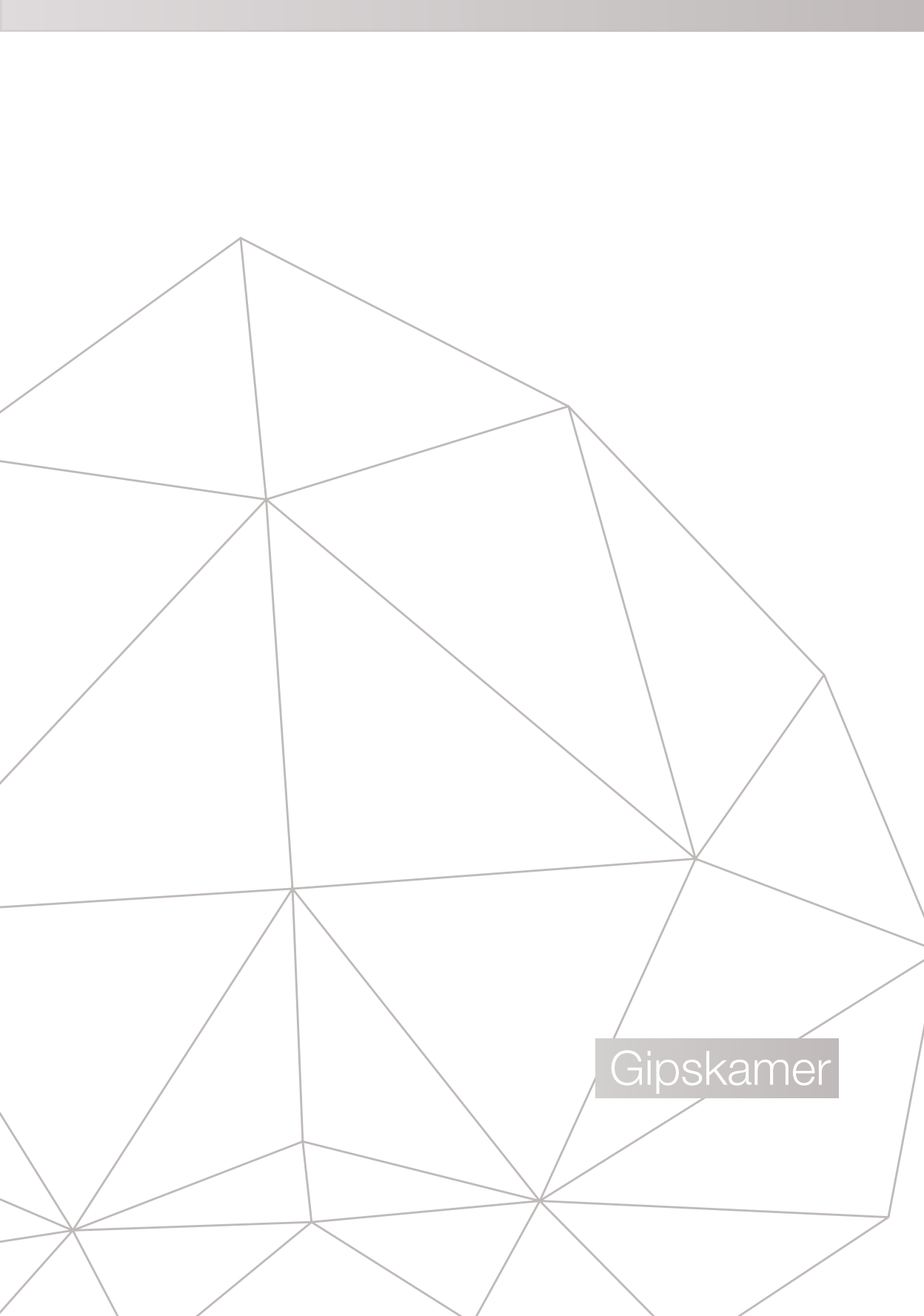

Gipskamer

Cellacast® Xtra

Voor een betrouwbare stabilisatie.



Toepassingsgebieden

- voor het immobiliseren na fracturen, operaties en orthopedische correcties, alsmede ter behandeling van gewrichts- en botaandoeningen

Eigenschappen

- rigide castverband
- goede laagstructuur
- bijzonder stabiel door glasvezel bevattend steunlaagmateriaal
- aan te passen aan iedere lichaamscontour
- luchtdoorlaatbaar
- röntgenstralendoorlaatbaar

Productsamenstelling

Glasvezelweefsel, geïmpregneerd met polyurethaanhars.

Opmerkingen

- kan op maat worden geknipt in niet-uitgeharde toestand
- kan met normaal in de handel verkrijgbare onderzoekshandschoenen worden aangelegd
- uithardingsijd 2,5 - 5 minuten na activering met water
- na 30 minuten belastbaar
- aanbevolen temperatuur van het dompelwater: 20 - 24°C

Cellacast® Xtra

Cellacast® Xtra

individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
crème			
2,5 x 1,8	139850	3747409	10/40
5 x 3,6	139851	3747417	10/40
7,5 x 3,6	139852	3747425	10/40
10 x 3,6	139853	3747433	10/40
12,5 x 3,6	139854	3747441	10/40
blauw			
5 x 3,6	139855	3747458	10/40
7,5 x 3,6	139856	3747466	10/40
10 x 3,6	139857	3747474	10/40
12,5 x 3,6	139858	3747482	10/40
rood			
5 x 3,6	139863	3946977	10/40
7,5 x 3,6	139864	3946985	10/40
10 x 3,6	139865	3946993	10/40
lila			
5 x 3,6	139867	3947033	10/40
7,5 x 3,6	139868	3947041	10/40
10 x 3,6	139869	3947058	10/40
black			
5 x 3,6	139859	3947009	10/40
7,5 x 3,6	139860	3947017	10/40
10 x 3,6	139861	3947025	10/40

Cellacast® Xtra Longuette

individueel verpakt. Niet-gepolsterde, 4-laagse cast-spalk

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
crème			
5 x 20	139730	3747359	1/15/60
7,5 x 38	139731	3747367	1/10/40
10 x 38	139732	3747375	1/10/40
10 x 96	139733	3747383	1/5/20
12,5 x 76	139734	3747391	1/5/20

Cellacast® Active

Mobiliserend steunverband.



Cellacast® Active

Toepassingsgebieden

- voor doelgerichte immobilisatie na fracturen en operaties, maar ook bij bandletsel en overbelastingsklachten
- voor het maken van mobiliserende castverbanden

Eigenschappen

- snelle behandeling met lichte, glasvezelvrije cast
- hoge flexibiliteit en mobiliteit
- bijzonder goed aanpassingsvermogen door polyesterweefsel
- onbreekbaar
- zachte randen
- luchtdoorlaatbaar
- röntgenstralendoorlaatbaar

Productsamenstelling

Polyester drager geïmpregneerd met polyurethaanhars.

Opmerkingen

- kan op maat worden geknipt in niet-uitgeharde toestand
- kan met normaal in de handel verkrijgbare onderzoekshandschoenen worden aangelegd
- uithardingsijd 2,5 - 5 minuten na activering met water
- na 30 minuten belastbaar
- aanbevolen temperatuur van het dampelwater: 20 - 24°C

Cellacast® Active

individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
crème			
2,5 x 1,8	139876	3747581	10/40
5 x 3,6	139877	3747599	10/40
7,5 x 3,6	139878	3747607	10/40
10 x 3,6	139879	3747615	10/40
12,5 x 3,6	139880	3747623	10/40
blauw			
5 x 3,6	139881	3747631	10/40
7,5 x 3,6	139882	3747649	10/40
10 x 3,6	139883	3747656	10/40
12,5 x 3,6	139884	3747664	10/40
rood			
5 x 3,6	139885	2091627	10/40
7,5 x 3,6	139886	2091635	10/40
10 x 3,6	139887	2091643	10/40
zwart			
5 x 3,6	139888	3947157	10/40
7,5 x 3,6	139889	3947165	10/40
10 x 3,6	139890	3947173	10/40
lila			
5 x 3,6	139891	3947181	10/40
7,5 x 3,6	139892	3947199	10/40
10 x 3,6	139893	3947207	10/40

Cellacast® Soft

Semirigide steunverband.



Cellacast® Soft



Toepassingsgebieden

- voor het aanmaken van semi-rigide castverbanden na fracturen, operaties en orthopedische correcties
- voor het behandelen van gewrichts- en botaandoeningen, en letsels aan banden en pezen

Eigenschappen

- gerichte immobilisatie
- kan ook zowel in uitgeharde als in niet-uitgeharde toestand op maat worden geknipt
- aan te passen aan iedere lichaamscontour
- flexibel, ook bij gebruik van meerdere lagen
- zachte randen en snijkanten
- onbreekbaar
- luchtdoorlaatbaar
- röntgenstralendoorlaatbaar

Productsamenstelling

Glasvezelweefsel, geïmpregneerd met polyurethaanhars.

Opmerkingen

- kan met normaal in de handel verkrijgbare onderzoekshandschoenen worden aangelegd
- aanbevolen temperatuur van het dompelwater: 20 - 24°C
- uithardingstijd 2,5 - 5 minuten na activering met water
- na 30 minuten belastbaar
- kan met een gipsschaar worden verwijderd

Tips

- stabiliteit kan op plaatsen gedeeltelijk worden verhoogd door combinatie met Cellacast Xtra longuette

Cellacast® Soft

individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
crème			
2,5 x 1,8	139680	3747706	10/40
5 x 3,6	139681	3747714	10/40
7,5 x 3,6	139682	3747722	10/40
10 x 3,6	139683	3747730	10/40
12,5 x 3,6	139684	3747748	10/40
blauw			
5 x 3,6	139685	3747755	10/40
7,5 x 3,6	139686	3747763	10/40
10 x 3,6	139687	3747771	10/40
12,5 x 3,6	139688	3747789	10/40
rood			
5 x 3,6	139689	3747797	10/40
7,5 x 3,6	139690	3747805	10/40
10 x 3,6	139692	3954948	10/40
lila			
5 x 3,6	139873	3947090	10/40
7,5 x 3,6	139874	3947108	10/40
10 x 3,6	139875	3947116	10/40
zwart			
5 x 3,6	139870	3947066	10/40
7,5 x 3,6	139871	3947074	10/40
10 x 3,6	139872	3947082	10/40

Cellacast® Longuette

Gepolsterde kant-en-klaarspalk, 7-laags.



Cellacast® Longuette

Toepassingsgebieden

- voor het maken van spalken voor partiële immobilisatie van lichaamsdelen
- gebruik na fracturen en operaties, maar ook voor het behandelen van gewrichtsaandoeningen

Eigenschappen

- rigide cast-spalk
- glasvezelkern met 7 afzonderlijke lagen
- afzonderlijk verzegelde op maat gesneden stukken voor de standaardverzorging
- zacht polstermateriaal
- goede laagstructuur

Productsamenstelling

- 7 lagen polyurethaan-geïmpregneerd glasvezelweefsel
- tweezijdige polstering

Cellacast® Longuette

in dispenserdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 3,6	139960	3947215	1/4
7,5 x 3,6	139961	3947223	1/2
10 x 3,6	139962	3947231	1/2
12,5 x 3,6	139963	3947249	1/2
15 x 3,6	139964	3947256	1/2

Cellacast® Longuette kant-en-klare coupures

individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 30	139965	3947264	1/10/40
7,5 x 30	139966	3947272	1/10/40
10 x 38	139967	3947280	1/10/40
10 x 76	139968	3947298	1/5/20
12,5 x 76	139969	3947306	1/5/20



Cellona® Gipszwachtel

Toepassingsgebieden

- voor het maken van immobiliserende verbanden bij lichaamsdelen na letsels en fracturen

Eigenschappen

- veelzijdige toepassing
- dompelklaar
- snel en gelijkmatig te bevochtigen
- fijncremig
- goed modelleerbaar

Productsamenstelling

17-draads katoenen gaasverband, Gipsmassa van α - en β -calcium-sulfaat-halfhydraat.

Opmerkingen

- het verband is na 30 minuten deels belastbaar
- na 12 tot 24 uur volledig uitgehard
- uithardingstijd ongeveer 3 tot 4 minuten
- aanbevolen watertemperatuur: 20 tot 25°C

Cellona® Gipszwachtel

5 - individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
6 x 2	25000	1022714	10/100
8 x 2	25001		10/100
10 x 2	25002	4167532	10/100
12 x 2	25003		10/100
15 x 2	25004	4167540	10/100
20 x 2	25005	4167557	10/50
8 x 3	25011	2088896	10/100
10 x 3	25012	1741479	10/100
12 x 3	25013	2091502	10/100
15 x 3	25014	2091510	10/50
20 x 3	25015	2091528	10/50
8 x 4	25021		10/50
10 x 4	25022		10/50
12 x 4	25023		10/50
15 x 4	25024		10/50
20 x 4	25025		10/50

Cellona® Xtra Gipszwachtel

individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7,5 x 2,7	91181	0398792	60
10 x 2,7	91182	0398800	60
15 x 2,7	91184	0398818	36
20 x 2,7	91185	0398826	36

Cellacast® Xtra

Gipszwachtel, gipslonguette.

Toepassingsgebieden

- voor het maken van immobiliserende verbanden bij lichaamsdelen na letsels en fracturen

Eigenschappen

- veelzijdige toepassing
- dompelklaar
- snel en gelijkmatig te bevochtigen
fijncremig
- goed modelleerbaar

Productsamenstelling

17-draads katoenen gaasverband, Gipsmassa van α - en β -calcium-sulfaathalfhydraat.

Opmerkingen

- het verband is na 30 minuten deels belastbaar
- na 48 uur belastbaar
- uithardingstijd ongeveer 2,5 minuut
- aanbevolen watertemperatuur: 20 tot 25°C

Cellona® Xtra Gipszwachtel

individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
6 x 3	25050		60
8 x 3	25051		60
10 x 3	25052		60
12 x 3	25053	0398776	48
15 x 3	25054		36
20 x 3	25055		30

Cellona® Xtra Longuette viervoudig over elkaar gelegd

in foliezak en dispenserdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 20	25056	0398834	1
12 x 20	25057		1
15 x 20	25058	0398842	1
20 x 20	25059	0398859	1

Cellona® Longuette, Cellona® Brede languette



Cellona® Longuette, Cellona® Brede languette



Toepassingsgebieden

- voor het maken van immobiliserende verbanden bij lichaamsdelen na letsels en fracturen.
- voor het aanleggen van spalkverbanden en ter versteviging van circulair verband

Eigenschappen

- snel geheel vochtig
- doopklare, viervoudig over elkaar gelegde banen
- verkorte aanlegduur dankzij languette-techniek
- past zich goed aan de lichaamscontouren aan
- fijncremig

Productsamenstelling

17-draads katoenen gaasverband, Gipsmassa van α - en β -calciumsulfaathalfhydraat.

Opmerkingen

- aanbevolen watertemperatuur: 20 tot 25°C
- het verband is na 30 minuten deels belastbaar
- na 36-48 uur volledig belastbaar

Cellona® Longuette

in foliezak en dispenserdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 20	25500	0398735	1
12 x 20	25501	0398743	1
15 x 20	25502	0398750	1
20 x 20	25503	0398768	1

Cellona® Brede languette

afzonderlijk, in foliezak, gerold

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
40 x 5	20301		1/10
60 x 5	20302		1/10
80 x 5	20303		1/10

tg® Buisverband



tg® Buisverband

Toepassingsgebieden

- huidbescherming onder gips- en synthetische castverbanden
- voor fixatie van wondverband op moeilijke plekken (hoofd, romp, vingers, extremiteiten)
- ter fixatie van polstermateriaal en wondverbanden

Eigenschappen

- naadloos gebreid
- huidvriendelijk
- van fijne garens
- rekbaar in breedterichting
- met weinig plooiën aan te leggen
- luchtdoorlaatbaar
- wit

Productsamenstelling

67 % katoen (gebleekt), 33 % steunweefsel: huidkleurig, viscose.

tg® Buisverband

gerold in dispenserdoos

	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
rol à 5 m				
maat 1	(1,4 cm) voor vingers, tenen	24020	1685353	1/80
maat 2	(2,3 cm) voor vingers, tenen	24021	2574754	1/50
maat 3	(3 cm) voor meerdere vingers, kinderarm	24022		1/40
maat 5	(5,5 cm) voor arm, onderbeen, kinderbeen	24023	2574762	1/40
maat 6	(6,5 cm) voor arm, been (middelgroot)	24024		1/40
maat 7	(7 cm) voor arm (groot), been, kinderhoofd	24025	2574770	1/40
rol à 20 m				
maat 1	(1,4 cm) voor vingers, tenen	24000	1685320	1/20
maat 2	(2,3 cm) voor vingers, tenen	24001	1685338	1/20
maat 3	(3 cm) voor meerdere vingers, kinderarm	24002	1685346	1/10
maat 5	(5,5 cm) voor arm, onderbeen, kinderbeen	24003	1685288	1/10
maat 6	(6,5 cm) voor arm, been (middelgroot)	24004	1685296	1/10
maat 7	(7 cm) voor arm (groot), been, kinderhoofd	24005	1685304	1/18
maat 9	(8,5 cm) voor bovenbeen (groot), hoofd, oksel	24006	1685312	1/12
maat 12	(12 cm) voor bovenbeen (extra groot), hoofd (groot), kinderromp	24007	4177473	1/12
rol à 10 m				
maat K1	(16 cm) voor romp (klein) < M	24030	4177481	1/10
maat K2	(21 cm) voor romp (groot) > L	24031	2661627	1/10



tg® Soft

Toepassingsgebieden

- ter polstering onder gips- en synthetische castverbanden

Eigenschappen

- bijzonder rekbaar
- eenvoudig op maat te knippen
- zacht en soepel
- past zich aan de lichaamsvorm aan
- plakt aan de cast
- waterdamp- en luchtdoorlatend
- huidvriendelijk
- polstering en huidbescherming in één

Productsamenstelling

85 % katoen (ongebleekt),
15 % elastaan.

Tips

- bijzonder geschikt voor onderpolstering van gerichte immobilisatie

tg® Soft

rol à 10 m in dispenserdoos

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
S voor onderarm, kinderarm, kinderbeen	13200	2667574	1/8
M voor onderarm, arm	13201	2665511	1/6
L voor been	13202	2665537	1/4

Tricotkous, tricotkouszwachtel



Tricotkous

Toepassingsgebieden

- onderverband voor gips- en synthetische castverbanden

Eigenschappen

- soepel
- huidvriendelijk
- naadloos gebreid
- elastisch tricot, vooral in de breedterichting
- kleur: ongebleekt wit

Productsamenstelling

100 % van ongebleekt wit katoen.

Tips

- tricotkousverband kan worden gebruikt als verzorging of plooiarme huidbedekking van een amputatiestomp

Tubulaire en tricot

rol à 25 m, afzonderlijk in foliezak

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
6	14820	2939122	1/10
8	14821	2939130	1/10
10	14822	2939148	1/5
12	14823	2939155	1/5
15	14824	2939163	1/6
20	14825	2939171	1/3
25	14826	2939189	1/3
30	14827	2939114	1/3

Tricotkouszwachtel

4 m, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
4	14799		1/110
6	14800		1/80
8	14801		1/48
10	14802		1/40
12	14803		1/32
15	14804		1/24
20	14805		1/20
25	14806		1/18

tg® Handschoen

Kant-en-klaarverband.



tg® Handschoen

Toepassingsgebieden

- voor gevoelige handen bijvoorbeeld om te dragen onder handschoenen van rubber of latex

Eigenschappen

- eenvoudige en tijdbesparende hantering
- zacht en soepel
- anatomisch gevormd
- goede pasvorm
- veelzijdige toepassing

Productsamenstelling

100 % ongebleekt katoen, polyester (garen).

Opmerkingen

- wasbaar, steriliseerbaar met waterdamp (134°C, 7 min.)

tg® Handschoen

per paar, in foliezak

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
voor kinderen	24749	2091213	1/100
voor volwassenen maat 6 - 7 (klein)	24750	0845073	1/50
voor volwassenen maat 7 1/2 - 8 1/2 (middelgroot)	24751	0845081	1/50
voor volwassenen maat 9 - 10 (groot)	24752	0845099	1/50



Haftan®

Toepassingsgebieden

- voor gebruik als onderverband voor compressie- en tapeverband
- ter fixatie van drukversterkende kompressen en van polstermateriaal onder gips- en castverband

Eigenschappen

- dun
- open poriën, soepel
- zet niet dik aan
- hecht op zichzelf
- wit

Productsamenstelling

Polyurethaanschuim.

Haftan®

0,8 mm sterk

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7 x 27,5	22315	2087930	6/60
10 x 27,5	22316	2087948	6/60

Crêpepapierverband



Crêpepapierverband

Toepassingsgebieden

- ter bescherming van de huid bij ongepolsterd gips- en castverband
- ter fixatie van polstermateriaal

Eigenschappen

- fijn gecrêpt
- licht rekbaar in lengterichting
- plooi vrij aan te leggen
- interne stevigheid blijft ook bij vocht behouden

Productsamenstelling

100 % cellulose.

Crêpepapierverband

Afmetingen (cm x m)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
4 x 4	14250	20/200
6 x 4	14251	20/200
8 x 4	14252	20/200
10 x 4	14253	20/200
12 x 4	14254	20/200

Cellona® Synthetische watten



Cellona® Synthetische watten



Toepassingsgebieden

- voor het onderpolsteren van gips-, cast- en compressieverbanden
- als polstering in de traumatologie en sportgeneeskunde
- voor het onderpolsteren van compressieverbanden

Eigenschappen

- elastisch-pluizig vliesstof
- voldoende stevig verband voor circulaire applicatie
- de vezels zijn naar believen scheurbaar onder lichte rek
- luchtdoorlaatbaar
- polyestervezel neemt nauwelijks vocht op

Productsamenstelling

100% polyestervezel zonder optische witmakers.

Cellona® Synthetische watten

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet-steriel			
4 x 3	10690		108
6 x 3	10692	0398891	72
10 x 3	10694	0398909	48
15 x 3	10695	0398917	36
20 x 3	10696	0398925	24
5 x 2,7	92840	0398933	96
7,5 x 2,7	92841	0398941	72
10 x 2,7	92842	0398958	48
15 x 2,7	92843	0398966	36
20 x 2,7	92844	0398974	24



Cellona® Polster

Toepassingsgebieden

- polstermateriaal voor slipvaste, soepele applicatie bij deels gepolsterd gips- en castverband op alle plekken met drukrisico

Eigenschappen

- zacht, flexibel polstermateriaal
- luchtdoorlaatbaar
- zelfklevend
- huidvriendelijk
- in stroken aangebrachte lijn

Productsamenstelling

50 % polyester, 30 % polypropyleen, 20 % viscose.

Opmerkingen

- gemaakt zonder natuurrubberlatex.

Cellona® Polster

Afmetingen	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5 mm sterk, in foliezak			
19 cm x 38 cm	50810	0312595	10/60
2 mm sterk, gerold			
58 cm x 1 m	50811	1461417	1/10
28 cm x 10 m	50813	4177408	1/11

Cellona® Randpolster



Cellona® Randpolster

Toepassingsgebieden

- polstermateriaal voor slipvaste applicatie in het randgebied van gips- en castverband op alle plekken met drukrisico

Eigenschappen

- zacht, flexibel polstermateriaal
- zelfklevend
- over het hele oppervlak aangebrachte lijm
- huidvriendelijk

Productsamenstelling

50 % polyester, 30 % polypropyleen, 20 % viscose.

Opmerkingen

- gemaakt zonder natuurrubberlatex.

Cellona® Randpolster

2 mm sterk, gerold, in dispenserdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
8 x 5	50812	1170224	1/24



Cellona® Crème

Toepassingsgebieden

- beschermende en verzorgende crème voor overbelaste huid
- bij contact met waterige oplossingen, met tensiden, zeepsop
- bij omgang met gips of niet in water oplosbare werkstoffen, zoals bijvoorbeeld oliën en lakken

Eigenschappen

- olie-in-wateremulsie
- pH-neutraal
- vetherstellend
- trekt snel in
- werkt regulerend op het vochtgehalte en de elasticiteit van de huid
- stimuleert de regeneratie
- beschermt tegen water, vloeistoffen, vuil, chemicaliën en reinigingsmiddelen

Productsamenstelling

Crème: Aqua (Water), Glyceryl Stearate SE, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmitate, Propylene Glycol, Caprylic/ Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Sodium Cetearyl Sulfate, Parfum (Fragrance), Glyceryl Ricinoleate, Benzoic Acid, Dihydroacetic Acid, Citric Acid, Ethylhexylglycerin,

Tube: aluminium,

Tubedop: polypropyleen.

Cellona® Crème

in aluminiumtube

Inhoud (ml)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
100	50814	0175182	1/12

Cellona® Shoe



Cellona® Shoe



Toepassingsgebieden

- verbandschoen te dragen over gips- en castverbanden, compressieverbanden en bandages

Eigenschappen

- als lage schoen of sandaal te gebruiken
- bescherming tegen kou en nattigheid
- individueel aan de voet aan te passen dankzij klittenband
- rechts en links te dragen

Productsamenstelling

Buitenzool (loopvlak): thermoplastisch rubber, binnenzool: schuimlaag: polyethyleen, kartonlaag: polypropyleen/chloropreen-rubberlijm, naaigaren: polyester, bovengedeelte: netweefsel (buiten): polyester, schuim (tussenlaag): polyurethaan, naaigaren: polyester, klittenbanden: polyamide.

Cellona® Shoe

afzonderlijk, in foliezak

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
voor kinderen			
P (schoenmaat 25 - 30)	16471	2242790	1/12
XS (schoenmaat 31 - 34)	16472	2242808	1/12
voor volwassenen			
S (schoenmaat 35 - 38)	16473	2242816	1/12
M (schoenmaat 39 - 41)	16474	2242824	1/12
L (schoenmaat 42 - 43)	16475	2242832	1/12
XL (schoenmaat 44 - 47)	16476	2242840	1/12
XXL (schoenmaat 48 - 51)	90347	2954394	1/12



Cellona® Gipshak

Toepassingsgebieden

- accessoires om in te werken in gips- en synthetische castverbanden
- bescherming van het verband tegen vuil en vocht van onder
- voor onmiddellijke of latere applicatie bij gips- en castverbanden

Eigenschappen

- licht
- gegoten uit synthetisch rubber
- met groeven en lussen

Productsamenstelling

Gegoten uit synthetisch rubber.

Cellona® Gipshak

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
klein	50820	2203990	1/1/20
middel	50821	2203982	1/1/20
groot	50822	2204006	1/1/10

Cellona® Shoecast



Cellona® Shoecast

Toepassingsgebieden

- loopzool om te dragen over gips- en synthetische castverbanden
- bescherming van het verband tegen vuil en vocht van onder

Eigenschappen

- anatomisch gevormd voetbed
- een hoog omsluitende hielkap
- kruislings traploos verstelbare klittenbandsluiting
- betrouwbare ondersteuning

Productsamenstelling

100 % geschuimd polyurethaan, de bindingen zijn van 100% polyamide.

Tips

- reservebindingen apart te bestellen

Cellona® Shoecast

afzonderlijk, in foliezak

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
voor kinderen			
afm. 0, links (schoenmaat 32 - 35)	50858	0248211	1/8
afm. 0, rechts	50859	0248229	1/8
voor volwassenen			
afm. 1, links (schoenmaat 36 - 38)	50860	0248252	1/10
afm. 1, rechts	50861	0491878	1/10
afm. 2, links (schoenmaat 39 - 42)	50862	0248260	1/10
afm. 2, recht	50863	0248278	1/10
afm. 3, links (schoenmaat 43 - 46)	50864	0248286	1/8
afm. 3, rechts	50865	0248294	1/8
afm. 4, links (schoenmaat > 46)	50869	1577279	1/6
afm. 4, rechts	50870	1577287	1/6

Vervangingsband met klittenbandsluiting

afzonderlijk, in foliezak

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
40 cm (voor maat 0)	50868	1461649	10/80
90 cm (voor maten 1 en 2)	50873	1461656	10/100
100 cm (voor maten 3 en 4)	50874	1461664	10/100




OK-producten

Veiligheid en efficiëntie voor uw OK

Met onze omvangrijke OK-oplossingen bieden wij u een compleet OK-assortiment dat aan hoge eisen voldoet. Of het nu gaat om Raucodrape operatie-

afdekkingen, Sentinex OK-kleding, operatieverbandstoffsensets of individueel voor u samengestelde Kitpack meercomponentensets voor

operaties: kwaliteit en functionaliteit staan bij onze producten centraal – zo zorgen wij voor meer veiligheid en efficiëntie in uw OK.

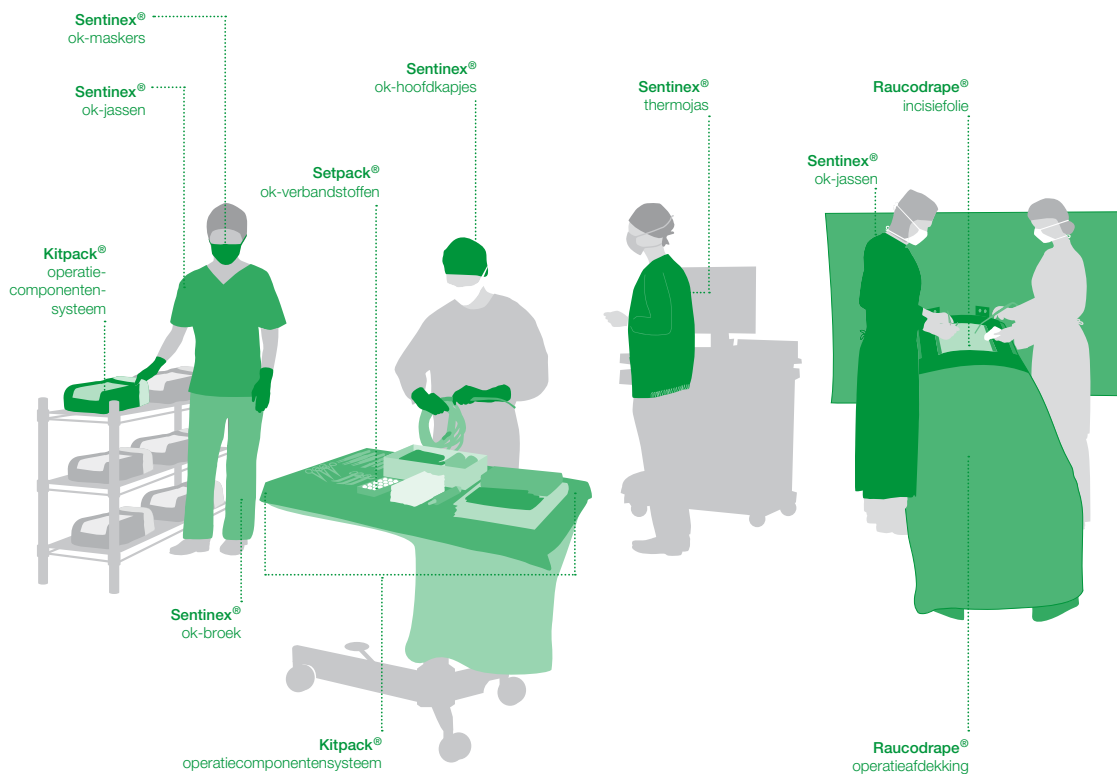




Toepassingsgebieden

- patiënt- en apparaatruafdekking bij operatieve ingrepen


Eigenschappen

- absorberen over het hele oppervlak en laten geen vocht door
- voldoen aan de high-performance-eisen volgens DIN EN 13795
- verhogen het gebruikskomfort
- maken effectieve infectiepreventie in de OK mogelijk
- zijn goed te draperen
- zijn gebruikersvriendelijk gevouwen
- duidelijke pictogrammen
- alle producten kregen een dubbel-traceerbaarheidsetiket

Productsamenstelling Raucodrape® PRO

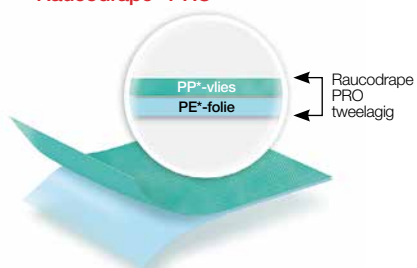


voor ingrepen met normaal
vochtverlies

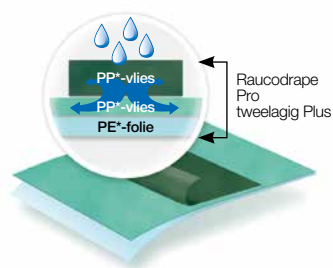


voor ingrepen met hoog vochtverlies

Raucodrape® SMART

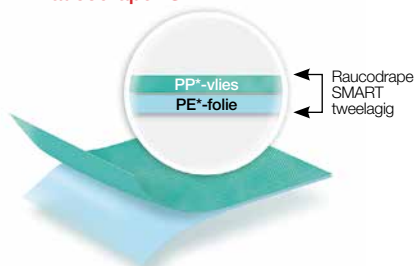

voor ingrepen met laag vochtverlies

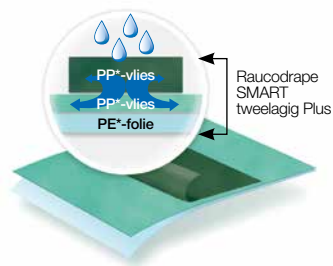

voor ingrepen met normaal
vochtverlies

* PE: polyethyleen, PP: polypropyleen

Raucodrape® Basissets

Algemene chirurgie.

Raucodrape® PRO Basisset Mini

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (sets)
1	tafelafdekking	150 x 190	33300	10/20
4	kleefdoeken, 2-laags	75 x <u>90</u>		

Raucodrape® SMART Basisset

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (sets)
1	tafelafdekking	150 x 190	33902	22
1	kleefstrip	9 x 25		
4	kleefdoeken, 2-laags	75 x <u>75</u>		

Raucodrape® PRO Basisset

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (sets)
1	tafelafdekking	150 x 190	33301	13
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
2	kleefdoeken, 2-laags	75 x <u>90</u>		
1	kleefdoek, 2-laags, kleefstrip (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	kleefdoek, 2-laags, driedelige kleefstrip (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Basissets

Algemene chirurgie.

Raucodrape® SMART Universaalset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (sets)
1	tafelafdekking	150 x 190	33801	13
4	handdoeken	30 x 20		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
2	kleefdoeken, 2-laags, kleefstrip (76 cm)	75 x <u>90</u>		
1	kleefdoek, 2-laags, kleefstrip (80 cm)	175 x <u>170</u>		
1	kleefdoeken, 2-laags, kleefstrip (80 cm)	140 x <u>240</u>		

Raucodrape® PRO Basisset Super

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (sets)
1	tafelafdekking	150 x 190	33302	11
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
2	kleefdoeken, 2-laags	90 x <u>110</u>		
1	kleefdoeken, 2-laags, driedelige kleefstrip (15 + 70 + 15 cm)	<u>190</u> x 225		
1	kleefdoeken, 2-laags, driedelige kleefstrip (20 + 80 + 20 cm)	175 x <u>300</u>		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape®-Set voor kleine ingrepen

Algemene chirurgie.

Raucodrape® PRO Set voor kleine ingrepen

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33315	22
2	handdoeken	30 x 40		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	gatdoek 2 lagen, zelfklevend, ronde, centrale opening	225 x 240 12		

Raucodrape® SMART Set voor kleine ingrepen I

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	34915	18
1	kleefstrip	9 x 25		
1	gatdoek 2 lagen, zelfklevend, ronde, centrale opening	170 x 240 12		

Raucodrape® SMART voor kleine ingrepen II

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	34916	18
1	kleefstrip	9 x 25		
1	gatdoek 2 lagen, zelfklevend, ronde, off-centre opening	170 x 240 12		

Raucodrape® Universeelsets voor kleine ingrepen

Algemene chirurgie.

Raucodrape® SMART Universeelset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33801	13
4	handdoeken	30 x 20		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
2	kleefdoeken, 2-laags, kleefstrip (76 cm)	75 x <u>90</u>		
1	kleefdoek, 2-laags, kleefstrip (80 cm)	175 x <u>170</u>		
1	zelfklevend doek 2-lagig, kleefstrip (80 cm)	140 x <u>240</u>		

Raucodrape® PRO Universeelset I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33307	13
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
2	kleefdoeken, 2-laags Plus	75 x <u>90</u>		
1	kleefdoek, 2-laags Plus, kleefstrip (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	kleefdoek, 2-laags Plus drielige kleefstrip (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>250</u>		

Raucodrape® PRO Universeelset I Super

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33309	10
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
2	kleefdoeken, 2-laags Plus	90 x <u>110</u>		
1	kleefdoek, 2-laags Plus drielige kleefstrip (15 + 70 + 15 cm)	<u>190</u> x 225		
1	anesthesiedoek, 2-laags Plus, split met armsteunafdekking	225 x <u>270</u> 45 x 65		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Universeelsets

Algemene chirurgie.

Raucodrape® PRO Algemene chirurgie II

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33305	11
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
2	kleefdoeken, 3-laags	75 x <u>90</u>		
1	kleefdoek, 3-laags, kleefstrip (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	kleefdoek, 3-laags, driedelige kleefstrip (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Splitdoektrays

Algemene chirurgie.

Raucodrape® PRO Basissplitdoektrays

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33303	15
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefdoek, 2-laags, driedelige kleefstrip (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225		
1	splitdoek, 2-laags, split	175 x <u>250</u> 10 x 65		

Raucodrape® PRO Universele splitdoektset I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33310	12
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	kleefdoek, 2-laags	75 x <u>90</u>		
1	splitdoek, 2-laags Plus, split	<u>225</u> x 260 10 x 100		
1	kleefdoek, 2-laags, driedelige kleefstrip (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

Raucodrape® SMART Universele splitdoektset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33810	12
2	handdoeken	30 x 20		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 25		
1	splitdoek, 2-laags, split	<u>200</u> x 260 10 x 80		
1	kleefdoek, 2-laags, kleefstrip (80 cm)	140 x <u>240</u>		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Splitdoektrays

Algemene chirurgie.

Raucodrape® PRO Universele splitdoektset II

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33318	11
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	splitdoek, 2-laags, split, kleefstrip (70 cm)	<u>225</u> x 300 10 x 100		
1	anesthesiedoek, 2-laags Plus, split, met armsteunafdekking	225 x <u>270</u> 45 x 65		

Raucodrape® PRO Variabele splitdoektray

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33313	15
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	splitdoek, 2-laags Plus, split	<u>225</u> x 240 20 x 20		
1	splitdoek, 2-laags, split	150 x <u>260</u> 20 x 65		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® LAP-sets

Algemene chirurgie.

Raucodrape® PRO LAP-set I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33320	14
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	LAP-doek I, voor vlakke ligging, met abdominale operatieopening, met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	260/200 x 335 28 x 32		

Raucodrape® PRO LAP-set II

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33321	12
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	LAP-doek II, met geïntegreerde leggings, met abdominale operatieopening, met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	260 x 310 125 28 x 32		

Raucodrape® PRO LAP-set III

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33322	11
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	LAP-doek III, met geïntegreerde leggings, met abdominale operatieopening, met elastische kleefolie incl. operatieopening, met instrumentenzakken met twee compartimenten, met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32		

Raucodrape® Rectumsets

Algemene chirurgie.

Raucodrape® PRO Rectumsets I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33325	11
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	rectumdoek I, met geïntegreerde leggings,	260 x 310		
	met abdominale operatieopening,	125		
	met perineale operatieopening,	28 x 32		
	met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	10 x 15		

Raucodrape® SMART Abdominaal-perineaal set

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33825	11
2	handdoeken	30 x 20		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 25		
1	abdominaal-perineaaldoek, met geïntegreerde leggings,	230/260 x 302		
	met abdominale operatieopening,	125		
	met perineale operatieopening,	28 x 32		
	met armsteunafdekking	10 x 15		

Raucodrape® PRO Rectumsets II

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33326	11
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	onderlaken	75 x 120		
1	rectumdoek II, met geïntegreerde leggings,	260 x 310		
	met abdominale operatieopening,	125		
	met elastische kleeffolie incl. operatieopening,	35 x 37		
	met perineale operatieopening,	28 x 32		
	met instrumentenzakken met twee compartimenten,	10 x 15		
	met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties			

Raucodrape® Pediatriebasisset

Pediatrie.

Raucodrape® PRO Pediatriebasisset

steriel

Contenu		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33330	14
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
2	kleefdoeken, 2-laags	75 x <u>90</u>		
1	kleefdoek, 2-laags, kleefstrip (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	kleefdoek, 2-laags, kleefstrip (80 cm)	150 x <u>240</u>		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape®-Gatdoek met incisiefolie

Pediatrie.

Raucodrape® PRO Gatdoek met incisiefolie

steriel, 2-laags, met incisiefolie

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
gatdoek, 2-laags,	120 x 150	33055	22/44
operatieopening ovaal, in lengterichting, centraal, met incisiefolie	7 x 10		

Raucodrape® Pfannenstielset

Gynaecologie/Urologie.

Raucodrape OK-Afdeksysteem

Raucodrape® PRO Pfannenstielset-steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33360	12
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop,	80 x 145		
1	pfannenstieldoek,	260 x 310		
	met geïntegreerde leggings,	125		
	met abdominale operatieopening,	35 x 37		
	met elastische kleeffolie incl. operatieopening,	24 x 29		
	met armsteunafdekking,			
	met geïntegreerde slangfixaties			

Raucodrape® Rectumsets

Gynaecologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Rectumset I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33325	11
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	rectumdoek I, met geïntegreerde leggings, met abdominale operatieopening, met perineale operatieopening, met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	260 x 310 125 28 x 32 10 x 15		

Raucodrape® SMART Abdomino-perineaalset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33825	11
2	handdoeken	30 x 20		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 25		
1	abdominaal-perineaaldoek, met geïntegreerde leggings, met abdominale operatieopening, met perineale operatieopening, met armsteunafdekking	230/260 x 302 125 28 x 32 10 x 15		

Raucodrape® SMART Rectumset II

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33326	11
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	onderlaken	75 x 120		
1	rectumdoek II, met geïntegreerde leggings, met abdominale operatieopening, met elastische kleeffolie incl. operatieopening, met perineale operatieopening, met instrumentenzakken met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32 10 x 15		

Raucodrape® Sectio-afdekkingen

Gynaecologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Sectiodoek

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
sectiodoek, voor vlakke ligging,	260/200 x 335	33359	8/16
met abdominale operatieopening,	27 x 33		
met elastische kleefolie incl. operatieopening,	14 x 20		
met geïntegreerd vochtopvangzakje inclusief drainagepoorten, met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties			

Raucodrape® babydoek

stérile

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
babydoek, vochtabsorberende non woven stof	90 x 100	33160	18/72

Raucodrape® Sectiotray I

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1 tafelaafdekking	150 x 190	33361	11
4 handdoeken	30 x 40		
1 instrumententafelsloop	80 x 145		
1 babydoek, vochtabsorberende non woven stof	90 x 100		
1 sectiodoek I, voor vlakke ligging, met abdominale operatieopening, met elastische kleefolie incl. operatieopening, met geïntegreerd vochtopvangzakje inclusief drainagepoorten, met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	260/200 x 335 27 x 33 14 x 20		

Raucodrape® SMART Sectionset

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1 tafelaafdekking	150 x 190	33861	12
4 handdoeken	30 x 20		
1 instrumententafelsloop	80 x 145		
1 kleefstrip	9 x 50		
1 babydoek, vochtabsorberende non woven stof	90 x 90	33861	12
1 sectiodoek, voor vlakke ligging, met abdominale operatieopening, met geïntegreerde incisiefolie, met geïntegreerd vochtopvangzakje inclusief drainagepoorten, met armsteunafdekking	230/200 x 312 27 x 33		

Raucodrape® Sectio-afdekkingen

Gynaecologie/Urologie.

Raucodrape® Sectioset II

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33362	11
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	babydoek, vochtabsorberende non woven stof	90 x 100		
1	sectiodoek II, met geïntegreerde leggings, met abdominale operatieopening, met elastische kleeffolie incl. operatieopening, met geïntegreerd vochttopvangzakje inclusief drainagepoorten, met armsteunafdekking	260 x 310 125 27 x 33		

Raucodrape® Gynaecologie-cystoscopie-afdekkingen

Gynaecologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Gynaecologie cystoscopieset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	120 x 140	33363	8/16
2	beenovertrekken	75 x 120		
1	gynaecologie-cystoscopiedoek, met perineale operatieopening, centraal	90 x 175 9 x 15		

Raucodrape® SMART Cystoscopieset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	120 x 140	33863	40
2	beenovertrekken	75 x 120		
1	cystoscopiedoek, met perineale operatieopening, centraal	90 x 175 9 x 15		

Raucodrape® PRO Gynaecologie cystoscopiedoek

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
	gynaecologie-cystoscopiedoek, met perineale operatieopening, centraal	90 x 175 9 x 15	33039	35/70

Raucodrape® Lithotomieset

Gynaecologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Lithotomieset

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33366	21
2	handdoeken	30 x 40		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	onderlaken, 2-laags	75 x 120		
1	lithotomiedoek, met geïntegreerde leggings, met perineale operatieopening	175/260 x 210 125 10 x 15		

Raucodrape® Gynaecologie-urologie sets

Gynaecologie/Urologie.

Raucodrape® PRO Gynaecologie set

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33364	14
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	klittenbandsluiting	2,5 x 20/24		
1	kleefdoek, PE-folie	50 x 50		
1	gynaecologiedoek I, met geïntegreerde leggings, met perineale operatieopening	240/260 x 230 125 10 x 15		

Raucodrape® Gynaecologie/urologieset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33866	24
2	handdoeken	30 x 20		
1	kleefdoek, PE-folie	50 x 50		
1	gynaecologiedoek, met geïntegreerde leggings, met perineale operatieopening	175/260 x 210 125 10 x 15		

Raucodrape® Gynaecologieset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33365	14
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	kleefdoek, PE-folie	50 x 50		
1	gynaecologiedoek II, met geïntegreerde leggings, met perineale operatieopening, met versterkingszone om het operatieveld, met geïntegreerde vochttopvangzak inclusief zeef en drainagepoort	240/260 x 230 125 10 x 15		

Raucodrape® TUR-sets

Gynaecologie/Urologie.

Raucodrape® PRO TUR-set I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33376	21
2	handdoeken	30 x 40		
1	klittenbandsluiting	2,5 x 20/24		
1	TUR-doek I, met geïntegreerde leggings, met perineale operatieopening, met suprapubische opening, met geïntegreerde vochttopvangzak inclusief zeef en drainagepoort, met latexvrije vingercondoom	225/260 x 210 125 5 8		

Raucodrape® PRO TUR-set

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33867	29
4	handdoeken	30 x 20		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	TUR-doek, met geïntegreerde leggings, met perineale operatieopening, met suprapubische opening, met geïntegreerde vochttopvangzak inclusief zeef en drainagepoort, met latexvrije vingercondoom	175/260 x 210 125 5 8		

Raucodrape® Pro TUR-set II

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33368	18
2	handdoeken	30 x 40		
1	klittenbandsluiting	2,5 x 20/24		
1	TUR-doek II, met geïntegreerde leggings, met perineale operatieopening, met suprapubische opening, met geïntegreerde zeef, met latexvrije vingercondoom	175/260 x 245 125 7 x 10 8		

Raucodrape® Universele splitdoekset

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Universele splitdoekset

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33310	12
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	kleefdoek, 2-laags	75 x <u>90</u>		
1	splitdoek, 2-laags Plus, split	<u>225</u> x 260 10 x 100		
1	kleefdoek, 2-laags, driedelige kleefstrip (15 + 70 +15 cm)	150 x <u>240</u>		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Orthopedie-/heupsets

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® SMART Orthopedieset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33841	10
4	handdoeken	30 x 20		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	orthopedische stockinette	33 x 110		
2	foliekleefstrip	10 x 50		
1	OK-afdekdoek 2-laags splitdoek,	150 x 150		
1	splitdoek, 2-laags Plus, split	200 x 240 10 x 80		
1	kleefdoek, 2-laags, kleefstrip (80 cm)	175 x 260		

Raucodrape® PRO Heupset I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33387	9
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	kleefdoek, 2-laags	75 x 90		
1	OK-afdekdoek 2-laags	150 x 180		
1	splitdoek, 2-laags Plus, split	225 x 260 10 x 100		
1	anesthesiedoek, 2-laags Plus, split, met armsteunafdekking met geïntegreerde slangfixaties	225 x 270 45 x 65		

Raucodrape® PRO Heupset II

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33388	8
4	handdoeken	30 x 40		
1	overzettafelsloop Special	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	kleefdoek, 2-laags	75 x 90		
1	OK-afdekdoek 2-laags	150 x 180		
1	orthopedische stockinette	33 x 110		
2	foliekleefstrip	10 x 50		
1	splitdoek, 2-laags Plus, split	225 x 280 10 x 100	33388	8
1	anesthesiedoek, 2-laags Plus, split, met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	225 x 270 45 x 65		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Heupartroscopieset

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Heupartroscopie set

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking Special	150 x 190	33357	13
4	handdoeken	30 x 40		
1	heupartroscopiedoek, 2-laags, operatieopening,	288 x 360		
	met elastische kleeffolie incl. operatieopening, met geïntegreerde vochttopvangzak	30 x 30		
	inclusief zeef en drainagepoort, met twee instrumentenzakken	20 x 20		

Raucodrape® Extremitensets

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Extremitenset I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33343	11
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefdoek, 2-laags	75 x 75		
1	OK-afdekdoek 2-laags	150 x 180		
1	extremitendoek, 2-laags Plus, met elastische operatieopening, met geïntegreerde slangfixaties	225 x 320 7		

Raucodrape® PRO Extremitenset II

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33344	11
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	OK-afdekdoek 2-laags	150 x 180		
1	orthopedische stockinette	33 x 55		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	extremitendoek, 2-laags Plus, met elastische operatieopening, met geïntegreerde slangfixaties	225 x 320 7		

Raucodrape® SMART Extremitenset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33844	12
4	handdoeken	30 x 20		
1	OK-afdekdoek 2-laags	150 x 150		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	orthopedische stockinette	33 x 55		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	extremitendoek, 2-laags Plus, met elastische operatieopening	200 x 305 7		

* markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Extremitensets

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Extremitenset III

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33345	10
2	handdoeken	30 x 40		
1	overzettafelsloop Special	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	OK-afdekdoek 2-laags	150 x 180		
1	extremitendoek, 2-laags Plus, met elastische operatieopening, met armsteunafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	270/200 x 335 7		

Raucodrape® PRO Extremitenset hand/voet

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33347	17
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	extremitendoek hand/voet, 2-laags Plus, met elastische operatieopening, met geïntegreerde slangfixaties	225 x 300 3		

Raucodrape® PRO Handchirurgieset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33349	14
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	handchirurgiedoek, met elastische operatieopening, met extra brede anesthesieafdekking, met geïntegreerde slangfixaties	370/175 x 285 3		

* markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Extremitendoeken

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Extremitendoeken

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
2 laags			
extremitendoek, 2-laags, elastische operatieopening, rond, centraal	200 x 300 7	33085	13/26
extremitendoek, 2-laags, elastische operatieopening, rond, centraal	225 x 320 7		
2-laags Plus, met geïntegreerde slangfixaties			
extremitendoek, 2-laags Plus, elastische operatieopening, rond, centraal, met geïntegreerde slangfixaties	225 x 320 7	33084	11/22

Raucodrape® PRO-extremitendoek, bilateraal

niet-steriel, uitsluitend voor individuele sets verkrijgbaar

Inhoud	Maat (cm)	Numéro de composant Trousses individuelles
extremitendoek, bilateraal, 2 laags Plus, elastische operatieopening, met geïntegreerde slangfixaties	225 x 320 6	2002740

Raucodrape® PRO-extremitendoek, hand/voet

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
2 laags			
extremitendoek, 2-laags, elastische operatieopening, rond, centraal	100 x 175 3	33080	20/40
extremitendoek, 2-laags, elastische operatieopening, rond, centraal	150 x 180 3		
2-laags Plus, met geïntegreerde slangfixaties			
extremitendoek, hand/voet, 2-laags Plus, elastische operatieopening, decentraal, met geïntegreerde slangfixaties	225 x 300 3	33082	10/20

Raucodrape® SMART -extremitendoek, hand/voet

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1 tafelfdekking	120 x 140	33780	19
1 extremitendoek, 2-laags, elastische operatieopening, decentraal	200 x 300 3		

Raucodrape® Artroscopie-afdekkingen

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Artroscopieset I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	omslagdoek	80 x 100	33350	23
1	instrumententafelsloop Lite	80 x 145		
1	stockinette, kort	24 x 80		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	extremiteitendoek, 2-laags, met elastische operatieopening	200 x 300 7		

Raucodrape® PRO Artroscopieset II

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	omslagdoek	80 x 100	33351	21
1	instrumententafelsloop Lite	80 x 145		
1	camerahoes, reversgevouwen	13 x 250		
1	orthopedische stockinette	33 x 55		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	extremiteitendoek, met elastische operatieopening	200 x 300 7		

Raucodrape® SMART Artroscopieset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	120 x 140	33851	17
1	camerahoes, reversgevouwen	13 x 250		
1	orthopedische stockinette	33 x 55		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 25		
1	extremiteitendoek, 2-laags, met elastische operatieopening	200 x 280 7		

Raucodrape® Artroscopie-afdekkingen

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® Artroscopieset III

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	omslagdoek	100 x 120	33352	11
2	SMMS OK-jassen Standard	150		
1	instrumententafelsloop Lite	80 x 145		
1	camerahoes, reversgevouwen	13 x 250		
1	orthopedische stockinette	33 x 55		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	extremiteitendoek, 2-laags, met elastische operatieopening	200 x 300 7		

Raucodrape® PRO Artroscopieset IV

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	omslagdoek	80 x 100	33353	15
1	SMMS OK-jassen Standard	150		
1	instrumententafelsloop Lite	80 x 145		
1	camerahoes, reversgevouwen	13 x 250		
1	orthopedische stockinette	33 x 55		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	extremiteitendoek, 2-laags, met elastische operatieopening	200 x 300 7		

Raucodrape® PRO Schouderartroscopieset I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	omslagdoek	80 x 100	33354	20
1	instrumententafelsloop Lite	80 x 145		
1	orthopedische stockinette	33 x 55		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	splitdoek, 2-laags, split	225 x 260 10 x 100		

Raucodrape® Artroscopie-afdekkingen

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Kniearthroscopieset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33348	10
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	OK-afdekdoek 2-laags	150 x 180		
1	orthopedische stockinette	33 x 55		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	kniearthroscopiedoek, met elastische operatieopeningen, met geïntegreerd vochttopvangzakje inclusief drainagepoorten, met geïntegreerde slangfixaties en klittenbandsluiting	225 x 320 6 + 7 cm		

Raucodrape® PRO Kniearthroscopiedoek

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
	kniearthroscopiedoek, met elastische operatieopeningen, met geïntegreerd vochttopvangzakje inclusief drainagepoorten, met geïntegreerde slangfixaties en klittenbandsluiting	225 x 320 6 + 7	33086	11/22

Raucodrape® PRO Schouderarthroscopieset Beach Chair

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33355	14
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	foliekleefstrip	10 x 50		
1	stockinette, kort	24 x 80		
1	schouderarthroscopiedoek, elastische, peervormige operatieopening, met geïntegreerd vochttopvangzakje inclusief drainagepoorten, met drie klittenbandsluitingen	225 x 380 11,5 x 12,5		

Raucodrape® Verticaal isolatielaken/verticaal isolatielakenset

Orthopedie/Traumatologie.

Raucodrape® PRO Verticaal isolatielakenset

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33389	10
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	verticaal isolatielaken, transparante PE-folie, met geïntegreerde incisiefolie, met geïntegreerde vochttopvangzak inclusief zeef en drainagepoort, met twee instrumentenzakken, met twee klittenbandsluitingen voor slang- en kabelfixatie	250 x 330		
		80 x 30		

Raucodrape® PRO Verticaal isolatielaken

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
	verticaal isolatielaken, transparante PE-folie, met geïntegreerde incisiefolie, met geïntegreerde vochttopvangzak inclusief zeef en drainagepoort, met twee instrumentenzakken, met twee klittenbandsluitingen voor slang- en kabelfixatie	250 x 330	137038	15
		80 x 30		

Raucodrape® SMART Verticaal laken

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	omslagdoek	90 x 100	33738	20
1	verticaal isolatielaken, transparante PE-folie, met geïntegreerde incisiefolie, met geïntegreerde vochttopvangzak inclusief zeef en drainagepoort, met twee slanghouders voor slang- en kabelfixatie	230 x 320		
		30 x 40		
1	instrumententas	20 x 30		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Cranioset

Neurochirurgie, KNO, Cranio maxillofaciaal chirurgie, Oftalmologie.

Raucodrape® PRO Cranioset

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33370	14
2	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
3	kleefdoeken, PE-folie	50 x 50		
1	craniotomiedoek, operatieopening, met geïntegreerde incisiefolie, met geïntegreerde vochttopvangzak, met zijdelingse afloopgootjes, inclusief zeef en drainagepoort, met geïntegreerde slangfixaties	225 x 280 19 x 25		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® LAP-/wervelkolomdoek

Neurochirurgie, KNO, Cranio maxillofaciaal chirurgie,
Oftalmologie.

Raucodrape® PRO LAP-/wervelkolomdoek, steriel 3-laags

Contenu	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
LAP-/wervelkolomdoek, 3-laags,	225 x 320	33051	8/16
operatieopening ovaal, in lengterichting, decentraal, zk	11 x 22		

Raucodrape® Hoofdsets

Neurochirurgie, KNO, Cranio maxillofaciaal chirurgie, Oftalmologie.

Raucodrape® PRO Hoofdsets I

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33371	16
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	OK-afdekdoek 2-laags	75 x 90		
1	splitdoek, 2-laags, split	150 x 250 10 x 80		
1	kleefdoek, 2-laags	75 x 90		

Raucodrape® PRO Hoofdsets II

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33372	13
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	kleefstrip	9 x 50		
1	tulbanddoek, 2-delig, 3-laags/2-laags	130 x 100		
1	splitdoek, 2-laags Plus, split rechthoekig, met geïntegreerde slangfixaties	225 x 300 14 x 80		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Spitdoekset/Splitdoek

Neurochirurgie, KNO, Cranio maxillofaciaal chirurgie,
Oftalmologie.

Raucodrape® PRO variabele splitdoekstray

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33313	15
4	handdoeken	30 x 40		
1	instrumententafelsloop	80 x 145		
1	splitdoek, 2-laags Plus, split	<u>225</u> x 240 20 x 20		
1	splitdoek, 2-laags, split	150 x <u>260</u> 20 x 65		

Raucodrape® PRO OK-Splitdoeken

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
2-laags				
splitdoek, 2-laags,		<u>150</u> x 250	33073	14/28
split		10 x 80		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Oorgatdoek

Neurochirurgie, KNO, Cranio maxillofaciaal chirurgie,
Oftalmologie.

Raucodrape® PRO Oorgatdoek

steriel, 2-laags, zk

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
oorgatdoek, 2-laags, operatieopening,	175 x 240	33050	11/22
ovaal, in lengterichting, decentraal	5 x 7,5		

Raucodrape® Oogdoeken

Neurochirurgie, KNO, Cranio maxillofaciaal chirurgie,
Oftalmologie.

Raucodrape® PRO Oogdoek

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
oogdoek 2-laags, operatieopening in het midden, centraal, met geperforeerde elastische kleeffolie	80 x 80	33077	30/120
	7 x 10		

Raucodrape® PRO Oogdoek

niet-steriel, uitsluitend voor individuele sets verkrijgbaar

Inhoud	Maat (cm)	Numéro de composant Trousses individuelles
oogdoek 2-laags, operatieopening, ovaal, decentraal, met aan beide zijden geïntegreerde vochttopvangzakken	120 x 150	2075963
	7 x 10	
oogdoek 2 laags, operatieopening, ovaal, centraal, met geperforeerde elastische kleeffolie	50 x 50	2063052
	7 x 10	

Raucodrape® SMART Oogdoek

niet-steriel, uitsluitend voor individuele sets verkrijgbaar

Inhoud	Maat (cm)	Maat/position de la fenêtre opératoire	Numéro de composant Trousses individuelles
oogdoek 2-laags, operatieopening, rond, centraal met elastische kleeffolie, met geïntegreerde vochttopvangzak	115 x 134	7.5 cm, rond, centraal	2078696
	7,5		
oogdoek 2-laags, operatieopening, met geperforeerde elastische kleeffolie met geïntegreerde vochttopvangzak	60 x 57.5	6 x 8 cm ovaal, decentraal	2073671
	6 x 8		

Raucodrape® PRO Oogdoek

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
oogdoek, 3-laags, operatieopening in het midden, centraal, met doorlopende elastischer kleeffolie, met geïntegreerde vochttopvangzak	150 x 150	160056	17/34
	7 x 10		

Raucodrape® Oogdoeken

Neurochirurgie, KNO, Cranio maxillofaciaal chirurgie, Oftalmologie.

Raucodrape® Oogdoek

niet-steriel, uitsluitend voor individuele sets verkrijgbaar

Inhoud	Maat (cm)	Maat/	Componentnr. Individuele sets
oogdoek 3-laags, operatieopening, ovaal, centraal, met geperforeerde elastische kleeffolie	150 x 160	7 x 10 cm, ovaal, decentraal	2110183
met geïntegreerde vochttopvangzak	7 x 10		
oogdoek 3-laags, operatieopening, ovaal, decentraal, met geperforeerde elastische kleeffolie	120 x 160	7 x 10 cm, ovaal, decentraal	2110182
met aan beide zijden geïntegreerde vochttopvangzakken met neusbeugel	7 x 10		

Raucodrape® Doek voor cranio maxillofaciaal chirurgie

Neurochirurgie, KNO, Cranio maxillofaciaal chirurgie,
Oftalmologie.

Raucodrape® PRO Doek voor cranio maxillofaciaal chirurgie

steriel, 2-laags

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	omslagdoek	75 x 90	33045	18/36
1	cranio maxillofaciaal doek, 2-laags, ruitvormige operatieopening, decentraal	112 x 150 10 x 14		

Raucodrape® Cardiovasculaire set

Cardiochirurgie/Angiografie.

Raucodrape® Cardiovasculaire set

steriel

	Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	tafelafdekking	150 x 190	33383	8
4	handdoeken	30 x 40		
2	instrumententafelsloopen	80 x 145		
2	kleefstrip	9 x 50		
2	kousenvoetjes, transparant	37,5 x 24		
1	OK-afdekdoek	150 x 180		
1	splitdoek, tweezijdig, 2-laags Plus, split, met geïntegreerde slangfixatie	175 x 260 20 x 100		
1	cardiovasculaire doek, 2-laags Plus, operatieopening, met geïntegreerde incisiefolie, met aan weerszijden instrumentenzakken met twee compartimenten, met twee extra instrumentenzakken met één compartiment, met vijf klittenbandsluitingen voor slang- en kabelfixatie	300/225 x 370 38 x 40		

Raucodrape® Cardiovasculaire doeken

Cardiochirurgie/Angiografie.

Raucodrape® PRO Angiografiedoeken I

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	omslagdoek	80 x 100	33381	11/22
1	handdoek	30 x 40		
1	kleefstrip	9 x 25		
1	angiografiedoek, 3-laags, met twee operatieopeningen, rond, decentraal	150 x 240 12		

Raucodrape® PRO Angiografiedoeken II

steriel

Inhoud		Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	omslagdoek	80 x 100	33382	8/16
1	handdoek	30 x 40		
1	kleefstrip	9 x 25		
1	angiografiedoek, 3-laags,, met versterkingszone om het operatieveld, met PE-folie aan beide zijden, met twee operatieopeningen, decentraal, met elastische kleeffolie incl. operatieopening	227 x 330		
		12 x 12 8		

Raucodrape® PRO Angiografiedoeken III

niet-steriel, uitsluitend voor individuele sets verkrijgbaar

Inhoud	Maat (cm)	Numéro de composant Trousses individuelles
angiografiedoek, 2-laags Plus, met PE-folie aan beide zijden,	240 x 335	3014694
twee femorale operatieopeningen, decentraal,	7 x 9	
twee radiale operatieopeningen, decentraal	5 x 7	

Raucodrape® Afdekdoeken
steriel, 2-laags

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
38 x 45	33001	2936433	220/880
45 x 75	33002	2936425	120/480
75 x 90	33003		65/260

Raucodrape® OK-afdekdoeken

Raucodrape® PRO OK-afdekdoeken

steriel, 2-laags

Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
75 x 90	33005	40/160
90 x 110	33190	25/100
100 x 150	33008	27/54
150 x 180	33009	13/26
150 x 240	33004	13/26

Raucodrape® SMART OK-afdekdoeken

steriel, 2-laags

Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
75 x 90	153705	46
100 x 100	153706	48
150 x 150	33707	40

Raucodrape® OK-instrumententafelafdekken

Raucodrape® OK-instrumententafelafdekken

steriel

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
OK-instrumententafelafdekken Standaard			
120 x 140	33090		26/52
150 x 190	33091		15/30
OK-instrumententafelafdekken, Special			
150 x 190	33092		11/22
OK-instrumententafelafdekken, Special XL			
200 x 250	34096		7/14
instrumententafelsloop Standard			
80 x 145	33093	2980035	35/70
instrumententafelsloop, Lite			
80 x 145	33094		40/80
overzettafelsloop Special			
80 x 145	33095		25/5

Raucodrape® OK-kleefdoeken

Raucodrape® OK-kleefdoeken

steriel

	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
2-laags			
	50 x <u>50</u>	33010	80/320
	50 x <u>75</u>	33011	60/240
	75 x <u>75</u>	33012	40/160
	75 x <u>90</u>	33013	38/152
	90 x <u>110</u>	33020	25/100
	150 x <u>180</u>	33025	20/40
	175 x <u>180</u>	33016	17/34
	150 x <u>240</u>	33018	15/30
	175 x <u>300</u>	33024	10/20
2-laags Plus			
	150 x <u>180</u>	33015	18/36
	175 x <u>180</u>	33017	15/30
	150 x <u>250</u>	33019	14/28
	190 x <u>225</u>	33021	11/22
instrumentendoek met kleeflaag, 2-laags			
	<u>90</u> x 150	33022	19/76

Raucodrape® SMART OK-kleefdoeken

steriel, 2-laags

	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
	75 x <u>90</u>	33716	120
	175 x <u>170</u>	33718	30
	140 x <u>240</u>	33717	28

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Gatdoeken

steriel, 2-laags

Afmeting / Positie operatieopening	Maat (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
6 cm, rond, centraal	45 x 75	33040	2617215	130/520
8 cm, rond, centraal	75 x 90	33042		70/280

Raucodrape® OK-gatdoeken

steriel

Afmeting / Positie operatieopening	Maat (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
epiduraalafdekdoek, transparant, zk				
10 cm, rond, centraal	75 x 100	33148		55/220
epiduraalafdekdoek, 2-laags, zk				
rond, decentraal	60 x 75	33047		68/272

Raucodrape® PRO OK-gatdoeken

steriel, 2-laags, zk

Afmeting / Positie operatieopening	Maat (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
variabel	50 x 75	33058	3421203	50/200
variabel	75 x 90	33059	3421211	30/120
6 cm, rond, centraal	50 x 60	33041		70/280
8 cm, rond, centraal	75 x 90	33043		40/160
7 x 10 cm, ovaal, in dwarsrichting, decentraal	120 x 150	33044		25/50
12 cm, rond, decentraal	150 x 200	33046		18/36

Raucodrape® SMART OK-gatdoeken

steriel, 2-laags, zk

Afmeting / Positie operatieopening	Maat (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
variabel	75 x 90	153742		40
6 cm, rond, centraal	50 x 60	153740		70
7 x 10 cm, ovaal, in dwarsrichting, decentraal	120 x 150	33741		50

Raucodrape® PRO Epiduraalafdekdoek

steriel, 2-laags, zk

Afmeting / Positie operatieopening	Maat (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 15 cm, rechthoekig, in lengterichting, decentraal	55 x 90	33049		45/180

Raucodrape® PRO Doek voor crano maxillofaciaal chirurgie

steriel, 2-laags

Afmeting / Positie operatieopening	Maat (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 14 cm, ruitvormig, decentraal	112 x 150	33045		18/36

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Gatdoeken

Raucodrape® PRO Oorgatdoek

steriel, 2-laags, zk

Afmeting / Positie operatieopening	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
5 x 7,5 cm, ovaal, in lengterichting, decentraal	175 x 240	33050	11/22

Raucodrape® PRO Gatdoek met incisiefolie

steriel, 2-laags, met incisiefolie

Afmeting / Positie operatieopening	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
7 x 10 cm, ovaal, in lengterichting, centraal	120 x 150	33055	22/44

Raucodrape® PRO LAP-/wervelkolomdoek

steriel, 3-laags

Afmeting / Positie operatieopening	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
11 x 22 cm, ovaal, in lengterichting, decentraal, zk	225 x 320	33051	8/16

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® PRO OK-Splitdoeken

steriel

Maat (cm)	Splitgrootte (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
2-laags			
75 x <u>90</u>	7 x 30	33062	35/140
125 x <u>150</u>	10 x 45	33064	28/56
150 x <u>200</u>	10 x 65	33067	14/28
<u>150</u> x 250	10 x 80	33073	14/28
<u>225</u> x 260	10 x 100	33069	13/26
3-laags			
150 x <u>200</u>	10 x 65	33068	10/20
2-laags Plus			
225 x 260	10 x 100	33071	11/22
2-laags Plus, met geïntegreerde slangfixaties			
<u>225</u> x 280	10 x 100	33060	10/20
tweezijdig 2-laags Plus, met geïntegreerde slangfixaties			
175 x 260	20 x 100	33072	13/26

Raucodrape® SMART OK-Splitdoeken

steriel, 2-laags

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
splitdoek, 2-laags,	<u>200</u> x 260	33760	18
split	10 x 80		

Raucodrape® Splitdoeken

steriel, PE-folie

Maat (cm)	Splitgrootte (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
<u>150</u> x 210	14 x 75	33066	40/80

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Apparaatafdekkingen

Raucodrape® Apparaatafdekkingen

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
stoelhoes	Ø = 75 cm	33124	30/120
C-arm cover, rond	80 cm x 90 cm	33113	40/160
C-arm cover, rond	Ø = 90 cm	33120	20/80
C-arm cover, rond	Ø = 120 cm	33121	15/60
C-arm cover, rechthoekig	80 cm x 145 cm	33112	25/100
C-arm cover, rechthoekig	80 cm x 45 cm	33122	30/120
röntgenafdekset, 3-delig –			
2 x Röntgenhoes	65 cm x 75 cm	33155	20/40
1 x afdekking C-arm	30 cm x 195 cm		
röntgenafdekset, 1-delig	90 cm x 225 cm	33115	19/38
camerahoes met ring	15 cm x 250 cm	33119	20/80
		138128	62/124
armsteunhoezen	35 cm x 73 cm	33123	46/184

Raucodrape® Accessoires

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
zelfklevende extra onderdelen voor snelle en veilige applicatie			
absorptiekussen, 2 stuks	35 cm x 50 cm	33125	80/320
absorptiekussen	50 cm x 75 cm	33126	33/132
klittenband	2,5 x 20/24 cm	33127	100/400
kleefstrip	9 cm x 50 cm	160116	200/800
kleefstrook met slangfixatie	9 cm x 11 cm	160147	220/880
instrumentenzak, 1 compartiment	38 cm x 40 cm	33109	110/440
instrumentenzak, 2 compartimenten	38 cm x 40 cm	33110	110/440
perineale afdekking	20 cm x 40 cm	33100	140/560
rectumbeschermer	60 cm x 90 cm	33775	35/70
instrumentenzak, 2 compartimenten	45 cm x 25 cm	33156	120/480
als aanvulling op de OK-kleding en ter afdekking van de patiënt			
armhoes	50 cm	33103	45/180
beenhoezen, per paar	50 cm x 110 cm	33104	26/104
beenhoezen, per paar	75 cm x 120 cm	33105	30/60
orthopedische stockinette korte, incl. 1 zelfklevende foliestrook	24 cm x 80 cm		
orthopedische stockinette medium, incl. 1 zelfklevende foliestrook	10 cm x 50 cm	33128	17/68
orthopedische stockinette medium, incl. 1 zelfklevende foliestrook	24 cm x 110 cm		
stockinette, large, incl. 2 zelfklevende foliestroken	10 cm x 50 cm	33129	12/48
stockinette, large, incl. 2 zelfklevende foliestroken	32 cm x 120 cm		
handdoeken, per paar	10 cm x 50 cm	33130	16/32
stuitlaken	30 cm x 40 cm	33108	120/480
stuitlaken	75 cm x 120 cm	33101	28/112
stuitlaken II, met opvangzak	75 cm x 100 cm	33102	35/70

Raucodrape® Babydoek

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
babydoek, vochtabsorptie, non woven	90 x 100	33160	18/72

Raucodrape® PRO Accessoires

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
orthopedische stockinette, incl. 1 zelfklevende foliestrook	33 x 55	33106	65/130
orthopedische stockinette, incl. 1 zelfklevende foliestrook	10 x 50		
orthopedische stockinette, incl. 2 zelfklevende foliestroken	33 x 110	33107	38/76
orthopedische stockinette, incl. 2 zelfklevende foliestroken	10 x 50		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Accessoires

Raucodrape® SMART Accessoires

steriel

Inhoud	Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
orthopedische stockinette, incl. 1 zelfklevende foliestrook	33 x 55 10 x 50	33770	440
orthopedische stockinette, incl. 2 zelfklevende foliestroken	33 x 110 10 x 50		

_ markeert de kant met de plakrand

Raucodrape® Incisiefolie



Toepassingsgebieden

- dient ter afdekking van het incisiegebied bij chirurgische ingrepen, om het indringen van ziektekiemen in de wond te beperken

Eigenschappen

- huidvriendelijke lijm
- elastisch en soepel
- ondoordringbaar voor bacteriën
- waterdampdoorlatend
- transparant en anti-reflecterend
- met rode grijprand voor gebruiksvriendelijke applicatie
- latexvrij

Productsamenstelling

polyurethaanfolie met een polyacryllijmcoating


Raucodrape® Incisiefolie

steriel, afzonderlijk verpakt in speciaal zakje

Maat (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
12 x 17	146440	4573986	10/80
15 x 20	146441	4573994	10/80
30 x 20	146442	4574000	10/80
45 x 20	146443	4574018	10/80
40 x 35	146444	4574026	10/80
45 x 50	146445	4574034	10/80
45 x 65	146446	4574042	10/40
55 x 80	146447	4574059	10/40
72 x 88	146448	4574067	10/40

Sentinex® OK-kleding

OK-kleding.

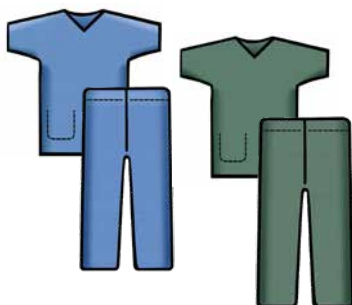

Sentinex® OK-kleding

- betrouwbare bescherming tegen het binnendringen van ziektekiemen en vloeistoffen



Sentinex® OK-kleding

- innovatieve SoftTex-structuur van textielachtig materiaal, praktische tweedelige borstzak en raglan-mouwen voor meer comfort



Sentinex® Thermojas/ Sentinex® Thermojas Soft

- de elastische sluiting aan de op de rug en de gebreide manchetten aan de mouwen manchetten zorgen voor een goede pasvorm, verhoogt de veiligheid in de operatiekamer en vermindert het risico op besmetting



Sentinex® Thermo-miniponcho, blauw

- houdt borst, nek en schouders betrouwbaar warm

Toepassingsgebieden


- niet-steriele kleding voor eenmalig gebruik die in de meest hygiënisch kritieke afdelingen van een instelling gedragen moet worden om het verspreiden van infectieveroorzakers tussen de verschillende afdelingen te minimaliseren

Eigenschappen

- luchtdoorlatend
- scheurvast
- vochtwerend
- ondoorzichtig
- gebruik van natuurrubberlatexvrije grondstoffen
- pluisarm materiaal
- beide materialen voldoen aan de standaard performance-eisen van EN 13795 aan OK-jassen in de minder kritische zone

Productsamenstelling

SMMS (polypropyleen), Spunbond (polypropyleen), polyester.

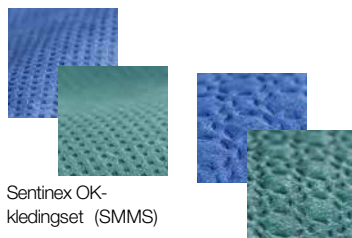

Sentinex OK-kledingset (SMMS)

Sentinex OK-kledingset Soft (Spunbond)

Maat standard

	Maat										
maten vrouw	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
maats L&R/internationaal	XS	S		M		L		XL		XXL	
maten man	–	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Sentinex® OK-kleding

OK-kleding.

Sentinex® OK-Kleding

Maat	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
OK-kledingset, groen		
XS	39501	50
S	39514	45
M	39515	40
L	39516	35
XL	39517	35
XXL	39518	30
OK-kledingset, blauw		
XS	39502	50
S	39519	45
M	39520	40
L	39521	35
XL	39522	35
XXL	39523	30
scrub shirt, groen		
XS	39503	105
S	39524	100
M	39525	90
L	39526	80
XL	39527	75
XXL	39528	70
scrub shirt, blauw		
XS	39505	105
S	39534	100
M	39535	90
L	39536	80
XL	39537	75
XXL	39538	70
scrub broek, groen		
XS	39504	80
S	39529	75
M	39530	70
L	39531	65
XL	39532	60
XXL	39533	55
scrub broek, blauw		
XS	39506	80
S	39540	75
M	39541	70
L	39542	65
XL	39543	60
XXL	39544	55
thermojas, blauw		
M	39512	40
L	39513	40
thermo-miniponcho, blauw		
uniek maat	39580	120

Sentinex® OK-kleding

OK-kleding.

Sentinex® OK-kleding Soft

Maat	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
OK-kledingset Soft, groen		
XS	39507	25
S	39545	25
M	39546	22
L	39547	20
XL	39548	20
XXL	39549	20
OK-kledingset Soft, blauw		
XS	39508	25
S	39550	25
M	39551	22
L	39552	20
XL	39553	20
XXL	39554	20
scrub shirt Soft, groen		
XS	39509	60
S	39555	55
M	39556	50
L	39557	50
XL	39558	45
XXL	39559	40
scrub shirt Soft, blauw		
XS	39576	60
S	39565	55
M	39566	50
L	39567	50
XL	39568	45
XXL	39569	40
scrub broek Soft, groen		
XS	39575	50
S	39560	45
M	39561	40
L	39562	40
XL	39563	35
XXL	39564	30
scrub broek Soft, blauw		
XS	39577	50
S	39570	45
M	39571	40
L	39572	40
XL	39573	35
XXL	39574	30
thermojas Soft, blauw		
M	39510	30
L	39511	30
XL	39611	25

PRO – maximale bescherming voor langere en complexere operaties

- breed assortiment
- breed ontwerp, zeer comfortabel om te dragen
- voldoen aan de standaard performance-eisen van EN 13795
- geschikt voor
 - ◆ ingrepen met bijvoorbeeld een gemiddelde tot hoge vloeibare stoffen
 - ◆ langdurige chirurgische ingrepen



Sentinex® PRO Operatiejas Basic

- bindjas voor kleine ingrepen en verzorgingen
- met 3 bindlinten om de operatiejas op de rug veilig te sluiten



Sentinex® PRO Operatiejas Standaard

- wikkeljas met steriele rugzone en een bijzonder brede overlapping
- ideaal voor ingrepen waarbij kleine hoeveelheden vloeibare stoffen vrijkomen



Sentinex® PRO Operatiejas Speciaal

- wikkeljas gebaseerd op de standaardversie
- met extra waterdichte versterking vooraan en op de armen
- ideaal voor ingrepen waarbij grotere hoeveelheden vloeibare stoffen vrijkomen



Sentinex® PRO Operatiejas Speciaal Plus

- wikkeljas gebaseerd op de standaardversie
- voorzien van een brede verstevigde zone

Toepassingsgebieden

- OK-jas voor eenmalig gebruik, om te dragen tijdens operatieve ingrepen
- minimalisering van de verspreiding van infectieuze deeltjes op en van de operatiewonden van patiënten

Eigenschappen

- vochtwerend polypropyleenmateriaal
- gebruik van natuurrubberlatexvrije grondstoffen
- pluisarm
- steriel achterpand (met uitzondering van Basic OK-jassen) door een bijzonder model, toepassingsgericht gevouwen
- de OK-jas 'Special' is aan de binnenkant voorzien van vloeistofdichte verstevigingen bij de armen en aan de voorkant de OK-jas 'Special Plus' is bovendien voorzien van een brede verstevigde zone 'Standard' en 'Special' verkrijgbaar met en zonder steriele overslag

Productsamenstelling

celstof/polyester fleece (Spunlace), polypropyleen, luchtdoorlatend PE-folie.



Polypropyleen



Spunlace

Sentinex® OK-kleding

OK-jassen PRO.

Sentinex® PRO OK-jassen Spunlace

steriel

Maat	Afmetingen (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
Standard met steriele overslag, incl. twee handdoeken			
S / M	120	19300	44
L	130	19301	40
XL	150	19302	36
XL lang	170	19303	32
XXL	150	19304	32
Special, met steriele overslag, incl. twee handdoeken			
S / M	120	19310	40
L	130	19311	36
XL	150	19312	32
XL lang	170	19313	28
XXL	150	19314	28
set Standard (steriel), 3 x XL			
3 x XL	150	19308	12
set Standard (steriel), 2x XL, 1x L			
2 x XL / 1 x L		19309	12

Sentinex® PRO OK-jassen SMMS

steriel

Maat	Afmetingen (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
Standard met steriele overslag, incl. twee handdoeken			
S / M	120	19340	52
L	130	19341	48
XL	150	19342	44
XL lang	170	19343	40
XXL	150	19344	40
Special, met steriele overslag, incl. twee handdoeken			
S / M	120	19350	48
L	130	19351	44
XL	150	19352	40
XL lang	170	19353	36
XXL	150	19354	36
Standard "direct" zonder steriele overslag			
S / M	120	19360	52
L	130	19361	48
XL	150	19362	44
Special "direct" zonder steriele overslag			
S / M	120	19370	48
L	130	19371	44
XL	150	19372	40
Special Plus "direct" zonder steriele overslag			
XL	150	31276	36
Basic "direct" zonder steriele overslag			
S / M	120	19380	48
L	130	19381	44
XL	150	19382	40


SMART – bescherming tijdens de korte en eenvoudige operatieve ingrepen

- specifiek assortiment
- kwaliteitsconcept
- beantwoorden aan de vereisten van de High Performance norm EN 13795
- geschikt voor
 - ♦ operaties waarbij een gemiddelde hoeveelheid vloeistof vrijkomt
 - ♦ korte chirurgische operaties, bijv. verstandskiezen, vegetaties, carpal tunnel



Sentinex® SMART-OK-jas Standard

- met steriel rugpand door bijzonder brede overlapping
- voor operaties waarbij een gemiddelde hoeveelheid vloeistof vrijkomt

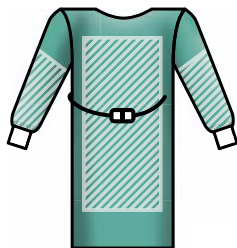

Sentinex® SMARTOK-jas Special

- OK-jas op basis van de versie Standard, maar voorkant en mouwen met extra versteviging tegen het doordringen van vloeistoffen.
- de verstevigde zones bieden een hoge weerstand tegen doorlekken en binnendringen van ziektekiemen.
- geschikt voor operaties waarbij een gemiddelde hoeveelheid vloeistof vrijkomt

Toepassingsgebieden

- OK-jas voor eenmalig gebruik, om te dragen tijdens operatieve ingrepen
- minimalisering van de verspreiding van infectieuze deeltjes op en van de operatiewonden van patiënten

Eigenschappen

- vochtwerend polypropyleenmateriaal
- gebruik van natuurrubberlatexvrije grondstoffen
- pluisarm
- steriel achterpand (met uitzondering van Basic OK-jassen) door een bijzonder model, toepassingsgericht gevouwen
- de OK-jas 'Special' is aan de binnenkant voorzien van vloeistofdichte verstevigingen bij de armen en aan de voorkant

Productsamenstelling

Polypropyleen, luchtdoorlatend PE-folie.

Sentinex® SMART OK-jassen

steriel

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
Standard met steriele overslag, incl. twee handdoeken			
M / L	33651	3421260	52
XL	33652	3421278	48
XXL	33653	3421286	44
Special met steriele overslag, incl. twee handdoeken			
M / L	33661	3421294	48
XL	33662	3421302	44
XXL	33663	3421310	40
Standard "direct" zonder steriele overslag			
M / L	109151		52
XL	109152		48
XXL	109153		44
Special "direct" zonder steriele overslag			
M / L	109161		48
XL	109162		44
XXL	109163		40

Sentinex® OK-kleding

OK-maskers.



Toepassingsgebieden

- minimaliseren van het overdragen van bacteriën en deeltjes uit de mond en het gezicht van OK-medewerkers op patiënten
- de verstevigde buitenlaag verhindert doordringen van deeltjes of vloeistofdruppels conform EN14683, Type II en Type IIR

Eigenschappen

- geurneutraal, latex- en glasvezelvrij
- drie- of viervoudig horizontaal overlappend gevouwen
- hoge bacteriële filterprestatie en daardoor een effectieve infectiepreventie voor patiënt en personeel
- extra lange neusclip
- alle Sentinex OK-maskers voldoen aan de eisen van de Europese norm DIN EN 14683

Productsamenstelling

Polypropyleen, polyester, cellulose.

Sentinex® OK-maskers

steriel

Inhoud	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
Sentinex Lite, blauw	162003	4801973	1/300
Sentinex Lite, groen	162002	4795787	1/300
Sentinex Classic EL groen	162000	4803664	1/500
Sentinex Classic Sensitive wit	162005	2661791	1/300
Sentinex Classic Extra Plus orange	162010	4802021	1/300
Sentinex Classic AntiFog groen	162004	4801981	1/300
Sentinex Classic Sensitive AntiFog wit	162006		1/300
Sentinex SafetyShield orange	162009		1/100
Sentinex Safety orange	162008	4802005	1/300

Sentinex® OK-kleding

OK-maskers.



Sentinex® Classic

- het topmodel
- biedt een zeer goed draagcomfort dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen
- prestatieniveau type II conform DIN EN 14683



Sentinex® Classic

- het topmodel
- biedt een zeer goed draagcomfort dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen
- prestatieniveau type II conform DIN EN 14683



Sentinex® Sensitive

- met soepele, zachte binnenlaag
- vrij van kleurstoffen en bindmiddelen, speciaal ontwikkeld voor gevoelige huid
- prestatieniveau type II conform DIN EN 14683



Sentinex® Extra

- zone de respiration plus grande du fait de la coupe large et des liens horizontaux.
- haleine sensiblement plus fraîche par conséquent
- convenant aussi aux barbus
- niveau de performance de type II conformément à la norme DIN EN 14683

Sentinex® OK-kleding

OK-maskers.



Sentinex® Classic AntiFog

- breed naar buiten lopende neusbeugel
- ingewerkte anti-aanslagstrepen voor het voorkomen van beslaan van brillen en microscooplenzen
- prestatieniveau type II conform DIN EN 14683



Sentinex® Sensitive

- natuurwit masker van ongebleekt materiaal
- daardoor bijzonder huidvriendelijk
- met strepen tegen beslaan
- prestatieniveau type II conform DIN EN 14683



Sentinex® SafetyShield

- met niet-beslaand vizier voor uitgebreide bescherming van het OK-personeel tegen infecties
- versterkte buitenlaag verhindert dat potentieel gevaarlijke lichaamsvloeistoffen doordringen
 - bescherming van het gehele gezicht door het niet-reflecterende en niet-beslaande vizier
 - prestatieniveau type IIR conform DIN EN 14683



Sentinex® Safety

- voor uitgebreide bescherming van het OK-personeel tegen infecties
- versterkte buitenlaag verhindert doordringen van potentieel gevaarlijke lichaamsvloeistoffen met strepen tegen beslaan
- prestatieniveau type IIR conform DIN EN 14683

Sentinex® OK-kleding

OK-hoofdkapjes.



Toepassingsgebieden

- om het overdragen van haren en huiddeeltjes te verminderen tussen medisch personeel, bezoekers en patiënten

Eigenschappen

- scheurvaste en luchtdoorlatende OK-hoofdkapjes, van pluisarm vlies
- alle Sentinex-hoofdkapjes voldoen aan hygiënische standardeisen in het ziekenhuis
- gebruik van natuurrubberlatexvrije grondstoffen

Productsamenstelling

Viscose, polypropyleen.

Sentinex® OK-hoofdkapjes

Inhoud	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
Sentinex Soft, baretkapje, groen, lucht doorlaatbaar	17420		100/600
Sentinex Astro, astromuts, groen	17421		100/600
Sentinex Astro Extra, astromuts met zweetband, groen	17422		100/600
Sentinex Fancy, hoofdkapje met middennaad, groen	17423		100/600
Sentinex Nova, hoofdkapje met bandjes, groen	17424	2661809	100/600
Sentinex Trend, hoofdkapje, lang, groen	17425		100/600
Sentinex Flex, chirurgenmuts, groen	17426	2661817	100/600
Sentinex Easy, groen, baretkapje	17427	3421245	100/600
Sentinex Easy, blauw, baretkapje	17428	0342509	100/600
Sentinex Easy, wit, baretkapje	17429	0342509	100/600

Sentinex® OK-kleding

OK-hoofdkapjes.



Sentinex® Soft

- luchtdoorlatend hoofdkapje in baret-vorm
- zit comfortabel en kan met lang of kort haar worden gedragen



voor lang haar

baretkap

voor personeel

voor patiënten



Sentinex® Astro

- veilig hoofdkapje met volledige bescherming
- in helmmodel
- met gezoomde randen
- hoofd- en halspartij zijn door een bindsluiting volledig afgedekt



astrokapje

voor personeel



Sentinex® Astro Extra

- veilig hoofdkapje met volledige bescherming, in helmmodel
- veilig en comfortabel
- de geïntegreerde, zachte zweetband absorbeert voeistof en houdt deeltjes tegen



astrokapje



met zweetband

voor personeel



Sentinex® Fancy

- speciaal voor lang haar biedt
- veel volume dankzij de middennaad
- het zachte voorhoofdsgebied zonder elastiek voorkomt drukplekken



verpleegsterkapje

voor lang haar

voor personeel

Sentinex® OK-kleding

OK-hoofdkapjes.



Sentinex® Nova

- variabel draagbaar operatiekapje
- de rand bij het voorhoofd kan comfortabel worden omgeslagen en als zweetband worden gebruikt



verpleegsterkapje



met zweetband

voor personeel



Sentinex® Trend

- precies passende, zeer goede pasvorm
- ook geschikt voor lang haar
- de elastische band in de nek zorgt voor een blijvend goede zit



verpleegsterkapje

voor lang haar

voor personeel



Sentinex® Flex

- chirurgenumts
- voor korter haar
- comfortabel en bijzonder luchtdoorlaatbaar
- goed geschikt om langer te dragen



chirurgenumts

voor kort haar

voor personeel



Sentinex® Easy

- baretkapje voor dagelijks gebruik in het ziekenhuis
- bedekt het haar volledig en betrouwbaar
- ook geschikt voor patiënten en bezoekers



baretkap

voor lang haar

voor personeel

voor patiënten

Setpack® OK-verbandstoffsysteem

Standaard.



Gepatenteerd telkaartsysteem



Binnenverpakking voor steriele waren



Gepatenteerde schuifdoos voor deppers



Setpack® Toptex lite buikdoeken RK



Setpack® gaaskompressen RK



Setpack® deppers RK



Setpack® preparatiedeppers RK

Toepassingsgebieden

- Setpack ok-verbandstoffsysteem zijn bestemd voor direct gebruik in de ok

Eigenschappen

- steriel verpakt, snel en comfortabel inzetbaar
- voorzien van röntgencontrastdraad of röntgencontrastchip
- gescheiden aangebrachte, dubbele, zelfklevende telkaarten
- doelmatige verpakkingseenheden

Uitvoeringen

- Setpack Toptex lite buikdoeken RK
- Setpack Gaaskompressen RK
- Setpack deppers RK
- Setpack preparatiedeppers RK

Avantages

- spaarzaamheid
 - ♦ zelf opwerken vervalt
 - ♦ validatie van het sterilisatieproces (volgens de wet Medische Hulpmiddelen) niet nodig
- veiligheid
 - ♦ meervoudige aantalcontrole in de Setpackproductie

Setpack® OK-verbandstoffsysteem Toptex® lite buikdoeken RK

Economisch | veilig | flexibel | gebruiksklaar.



Toepassingsgebieden

- bedoeld voor direct gebruik in de OK
- voor het vastpakken en terzijde houden van organen en lichaamsweefels
- voor bloedstelping en het afzuigen van lichaamsvloeistoffen tijdens operatieve ingrepen

Eigenschappen

- van verbandgaas volgens DIN EN 14079
- voorgewassen
- zacht en absorberend
- 20-draads
- verpakt in binnenvpakking voor steriele artikelen voor snel en veilig uittrekken van het product en voor telcontrole
- gescheiden aangebrachte, dubbele zelfklevende telkaarten

Productsamenstelling

100 % katoen, röntgencontrastchip (polyvinylchloride en bariumsulfaat)

Uitvoeringen

- wit, groen en blauw
- 4- en 6-laags

Setpack® Toptex® Lite Buikgazen X-ray

steriel

	Maat	Afmetingen (cm)	REF	Verpakkingseenheid
wit				
2	stuk, 4-laags	40 x 40	165004	20/60
5	stuk, 4-laags	40 x 40	165001	10/30
2	stuk, 6-laags	40 x 40	165012	12/36
5	stuk, 6-laags	40 x 40	165003	6/18
2	stuk, 4-laags	20 x 30	165011	30/90
5	stuk, 4-laags	20 x 30	165007	18/54
2	stuk, 4-laags	50 x 60	165014	12/36
2	stuk, 6-laags	50 x 60	165019	8/24
2	stuk, 4-laags	8 x 90	165010	26/104
groen				
2	stuk, 4-laags	40 x 40	165006	20/60
5	stuk, 4-laags	40 x 40	165002	10/30
2	stuk, 6-laags	40 x 40	165008	12/36
5	stuk, 6-laags	40 x 40	165000	6/18
2	stuk, 4-laags	20 x 30	165017	30/90
5	stuk, 4-laags	20 x 30	165005	18/54
2	stuk, 4-laags	50 x 60	165013	12/36
2	stuk, 6-laags	50 x 60	165018	8/24
2	stuk, 4-laags	8 x 90	165009	26/104
blauw				
2	stuk, 4-laags	40 x 40	15016	14/42
5	stuk, 4-laags	40 x 40	15015	6/18

Setpack® Gaaskompressen X-ray

Economisch | veilig | flexibel | gebruiksklaar.



Toepassingsgebieden

- bedoeld voor direct gebruik in de OK
- voor bloedstelping en het afzuigen van lichaamsvocht tijdens operatieve ingrepen

Eigenschappen

- van verbandgaas volgens DIN EN 14079
- zacht en absorberend
- alle zelfkanten liggen aan de binnenzijde, dus geen randdraden
- verpakt in binnenverpakking voor steriele artikelen voor snel en veilig uittrekken van het product en voor telcontrole
- gescheiden aangebrachte, dubbele zelfklevende telkaarten

Productsamenstelling

100% katoen, röntgencontrastdraad (blauw gekleurd, polypropyleen, polyester garens, bariumsulfaat).

Uitvoeringen

- 12-, 16- en 32-voudig
- 17- en 20-draads

Setpack® Gaaskompressen X-ray

steriel

Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (verpakkingen)
verpakkingen à 10 stuks, 12-voudig, 17-dra		
7,5 x 7,5	165114	22/132
10 x 10	165100	20/120
10 x 12,5	15116	20/60
10 x 20	15102	16/48
verpakkingen à 10 stuks, 16-voudig, 20-draads		
5 x 5	165110	24/240
7,5 x 7,5	15106	24/72
10 x 10	15101	20/60
10 x 12,5	15111	18/54
verpakkingen à 10 stuks, 32-voudig, 20-draads		
10 x 10	165104	12/42
verpakkingen à 20 stuks, 12-voudig, 17-draads		
7,5 x 7,5	15119	20/60
10 x 10	15103	18/54
10 x 12,5	15109	10/30
10 x 20	15108	8/24
verpakkingen à 20 stuks, 16-voudig, 17-draads		
5 x 5	15117	26/78
7,5 x 7,5	15118	16/48
10 x 10	15105	14/42
10 x 12,5	15112	8/24

Setpack® Deppers X-ray

Economisch | veilig | flexibel | gebruiksklaar.



Toepassingsgebieden

- bedoeld voor direct gebruik in de OK
- voor het absorberen van bloed en afscheiding bij operatieve ingrepen

Eigenschappen

- van verbandgaas volgens DIN EN 14079
- zacht en sterk absorberend
- met veiligheidsring van silicone
- 20-draads
- dubbele verpakking voor steriele artikelen
- gescheiden aangebrachte, dubbele zelfklevende telkaarten

Productsamenstelling

100% katoen, röntgencontrastdraad (blauw gekleurd, polypropyleen, polyester garens, bariumsulfaat), de veiligheidsring bestaat uit silicone.

Setpack® Deppers X-ray

steriel

Maat (cm)	REF	Verpakkingseenheid (verpakkingen)
verpakkingen à 5 stuks		
vuistgroot 7	22800	16/48
verpakkingen à 10 stuks		
walnootgroot 2	22801	72/144
pruimgroot 3	22802	38/114
eigroot 4	22803	26/78
extra groot 6	22804	18/54
verpakkingen à 15 stuks		
pruimgroot 3	22805	30/90
eigroot 4	22806	20/60
extra groot 6	22807	12/36
verpakkingen à 20 stuks		
pruimgroot 3	22808	26/78
eigroot 4	22809	16/48
extra groot 6	22810	6/18

Setpack® Prepareerdeppers X-ray

Economisch | veilig | flexibel | gebruiksklaar.



Toepassingsgebieden

- bedoeld voor direct gebruik in de OK
- voor het prepareren van organen, bloedvaten en weefsellagen bij operatieve ingrepen

Productsamenstelling

100 % katoen, röntgencontrastdraad (blauw gekleurd, polypropyleen, polyester garens, bariumsulfaat).

Eigenschappen

- van verbandgaas volgens DIN EN 14079
- stevig en sterk absorberend
- 24-draads
- in schuifdoos voor deppers met telkaartensysteem, voor eenvoudige aantalcontrole en handig uitnemen
- gescheiden aangebrachte, dubbele zelfklevende telkaarten

Setpack® Prepareerdeppers X-ray
steriel

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (verpakkingen)
verpakkingen à 10 stuks			
klein 2	12780	2205227	40/120
matig 3	12781		40/120
groot 4	12782		40/120
verpakkingen à 20 stuks			
klein 2	12783	2205227	40/120
matig 3	12784		40/120
groot 4	12785		40/120

Setpack® OK-verbandstoffsysteem

Individueel.



Toepassingsgebieden

- Setpack ok-verbandstofsysteem zijn bestemd voor direct gebruik in de OK

Eigenschappen

- steriel verpakt, snel en comfortabel inzetbaar
- voorzien van röntgencontrastdraad of röntgencontrastchip
- gescheiden aangebrachte, dubbele, zelfklevende telkaarten

Voordelen

- individueel samengesteld volgens instructies van de klant
- individuele behoeftenanalyse in nauwe samenspraak met de vakafdelingen van de instelling
- tijdbesparing dankzij processtandaardisatie
- economisch materiaalgebruik



Kitpack® Operatiecomponentensysteem



Toepassingsgebieden

- speciaal bestemd voor gebruik in de OK

Eigenschappen

- individueel samengesteld volgens de aanwijzingen van de klant
- bevat alle voor de OK vereiste medische producten voor eenmalig gebruik
- steriel en direct inzetbaar
- compact en op de OK afgestemd verpakt




Voordelen

- levert uitgebreide tijdbesparing op omdat de samenstelling van afzonderlijke componenten voor de operatie vervalt
- reduceert het logistieke en administratieve werk, daar het eenvoudiger bestelproces de inkoop ontlast
- zorgt voor meer veiligheid in de OK, omdat de reductie van het contaminatierisico bij het openen en doorgeven van steriele producten de infectiepreventie verbetert
- vereenvoudigt de documentatie van de in de OK gebruikte materialen, omdat slechts één etiket alle relevante informatie bevat
- verhoogt de kostentransparantie, omdat de kosten per behandelingsgeval sneller en eenvoudiger toegewezen kunnen worden dan bij afzonderlijke componenten

Kitpack® Operatiecomponentensysteem

U stelt de eisen, wij bieden de oplossing.

Raucodrape® operatieafdekkingen

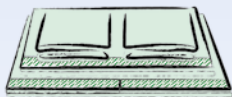

- bijzonder scheurvast en absorberend
- veilige barrièrewerking tegen vloeistof- en bacteriënpennetratie
- goed te draperen

Sentinex® ok-jassen



- betrouwbare bescherming tegen bacteriën en vloeistoffen
- zeer goed draagcomfort
- huidvriendelijk en luchtdoorlatend

Ok-verbandstoffen



- voorzien van röntgencontrastdraad of -chip
- sterk absorberend
- met dubbele, zelfklevende telkaarte



Verdere OK-componenten voor eenmalig gebruik, zoals kousen, hechtmaterialen, scalpels en injectiespuiten

- kwalitatief hoogwaardige producten
- van gerenommeerde fabrikanten





Toepassingsgebieden

- speciaal bestemd voor het gebruik in de OK

Eigenschappen

- direct leverbaar
- geen contracttermijnen
- steriel en direct te gebruiken
- tijdsbesparing bij de voor- en nabereiding van de OK
- slechts één bestelprocedure bij de inkoop
- vermindert het voorraadbeheer
- flexibel in de testfase
- kostenefficiënt samengesteld

Productsamenstelling

Kitpack start omvat de basisuitrusting met de belangrijkste gebruiksklare componenten voor eenmalig gebruik voor het desbetreffende vakgebied.

Uitvoeringen

- algemene chirurgieset
- heuptray
- extremitéentray
- vaatchirurgische splitdoektray
- sectiotray

Algemene chirurgieset

Inhoud		Maat	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	Raucodrape OK-instrumententafel-afdek	150 cm x 190 cm	28145	6
4	Raucodrape handdoeken	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape overzettafelsloop standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS standard	150 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS special	150 cm		
1	scalpel voor eenmalig gebruik afbeelding 21 ¹			
1	kom, blauw ¹	250 ml		
5	Gazin deppers X-ray ¹	Mt 6 extra groot		
10	Gazin deppers X-ray ¹	Mt 4 (eigroot)		
10	Gazin prepareerdeppers X-ray ¹	klein afm. 2		
10	Gazin gaaskompressen X-ray ¹	10 cm x 10 cm		
1	Raucodrape kleefstrip elastisch, 16-voudig	9 cm x 50 cm		
2	Raucodrape kleefdoeken 2-laags Plus	75 cm x 90 cm		
1	Raucodrape kleefdoeken 2-laags Plus	175 cm x 180 cm		
1	Raucodrape kleefdoeken 2-laags Plus	150 cm x 250 cm		

¹ componenten in vouwdoos

_ markeert de kant met de plakrand

Heuptray

	Inhoud	Maat	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	Raucodrape OK-instrumententafel-afdek	150 cm x 190 cm	28146	4
4	Raucodrape handdoeken	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS standard	150 cm		
1	Raucodrape overzettafelsloop standard	80 cm x 145 cm		
1	OK-afzuigset type Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1	Raucodrape Instrumentenzak, één compartiment	38 cm x 40 cm		
2	scalpels voor eenmalig gebruik afbeelding 21 ¹			
1	kom, blauw ¹	250 ml		
10	Gazin deppers X-ray ¹	mt 6 extra groot		
30	Gazin gaaskompressen X-ray 16-voudig ¹	10 cm x 10 cm		
2	Toptex lite buikgazen X-ray groen, 6-laags ¹	40 cm x 40 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS standard	150 cm		
2	Sentinex OK-jas SMMS special	150 cm		
1	Raucodrape OK-kleefdoek 2-laags	75 cm x 90 cm		
1	Raucodrape orthopedische stockinette, incl. 2 foliekleefstrips	33 cm x 110 cm 10 cm x 50 cm		
1	Raucodrape OK-afdekdoek 2-laags	150 cm x 180 cm		
2	Raucodrape kleefstrip elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape splitdoek 2-laags Plus, split	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1	Raucodrape anesthesiedoek 2-laags Plus	225 cm x 270 cm		

Extremitentray

	Inhoud	Maat	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	Raucodrape OK-instrumententafel-afdek	150 cm x 190 cm	28147	5
2	Raucodrape handdoeken	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS standard	150 cm		
1	Raucodrape overzettafelsloop standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS special	150 cm		
1	Raucodrape Camerahoes reversgevouwen ¹	13 cm x 250 cm		
1	kom, blauw ¹	250 ml		
3	Curapor wondverbanden ¹	5 cm x 7 cm		
5	Gazin deppers X-ray ¹	mt 6 extra groot		
1	scalpel voor eenmalig gebruik afbeelding 11 ¹			
10	Gazin gaaskompressen X-ray 16-voudig ¹	10 cm x 10 cm		
1	Lenkelast universele zwachtel ¹	12 cm x 5 m		
1	Raucodrape OK-afdekdoek 2-laags	150 cm x 180 cm		
1	Raucodrape kleefstrip elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape stockinette kort	24 cm x 80 cm		
1	Raucodrape Extremitentdoek 2-laags Plus	225 cm x 320 cm		

¹ componenten in vouwdoos

_ markeert de kant met de plakrand

Sectiontray

	Inhoud	Maat	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	Raucodrape OK-instrumententafel-afdek	150 cm x 190 cm	28148	5
4	Raucodrape handdoeken	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS standard	150 cm		
1	Raucodrape overzettafelsloop standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS standard	150 cm		
1	kom, blauw ¹	250 ml		
1	Curapor wondverband ¹	10 cm x 8 cm		
5	Gazin deppers X-ray ¹	mt 6 extra groot		
10	Gazin prepareerdeppers X-ray ¹	mt 3 middel		
1	scalpel voor eenmalig gebruik afbeelding 10 ¹			
2	scalpels voor eenmalig gebruik afbeelding 15 ¹			
30	Gazin gaaskompressen X-ray 16-voudig ¹	10 cm x 10 cm		
1	Raucodrape kleefstrip elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape splitdoek 2-laags Plus, split	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1	Raucodrape kleefdoek 2-laagss Plus	150 cm x 250 cm		

Trousse de césarienne

	Inhoud	Maat	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
1	Raucodrape OK-instrumententafel-afdek	150 cm x 190 cm	28149	4
4	Raucodrape handdoeken	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS standard	150 cm		
1	Raucodrape overzettafelsloop standard	80 cm x 145 cm		
1	OK-afzuigset type Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1	scalpel voor eenmalig gebruik afbeelding 22 ¹			
1	kom, blauw ¹	250 ml		
20	Gazin deppers X-ray ¹	mt 6 extra groot		
10	Gazin gaaskompressen X-ray 16-voudig ¹	10 cm x 10 cm		
5	Toptex lite buikgazen X-ray, groen, 4-laags ¹	40 cm x 40 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS standard	150 cm		
1	Sentinex OK-jas SMMS special	150 cm		
1	Raucodrape kleefstrip elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape babydoek	90 cm x 100 cm		
1	Raucodrape sectiedoek 2 met geïntegreerde beenovertrekken	260 cm x 310 cm		

¹ componenten in vouwdoos

_ markeert de kant met de plakrand

Toepassingsgebieden

- combinatie van compressen, deppers, disposable instrumenten, geplastificeerde velden enz. in één enkele steriele verpakking: de blister

Eigenschappen

- de verpakking is een soepele of een harde blister, met of zonder onderverdelingen volgens samenstelling en specifieke doeleinden
- de uitstekende pelabiliteit van de blisterverpakking vergemakkelijkt de steriele manipulatie en verhindert het vrijkomen van papierzak
- naargelang de toepassingen het vereisen kunnen bepaalde samenstellingen ook in papierzak verpakking bestudeerd worden. De strikte GMP productie normen en de keuze van de samenstellende producten bieden een optimale garantie voor kwaliteit en hygiëne

Uitvoeringen

- buiten het door ons aangeboden standaardgamma, kan de samenstelling van de sets aangepast worden aan de noden van de gebruiker, voor zover het aantal sets een industriële productie toelaat.

Raucoset® Verbandset N°1

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister met 3 compartimenten:				
3 + 2 gaasdeppers 62	30 - 35 mm	166833	4850962	45/45
1 anatomische pincet				
1 veld	37,5 x 46 cm			

Raucoset® Verbandset N°2

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister met 3 compartimenten:				
5 gaasdeppers 62	30 - 35 mm	166836	4850970	27/27
5 compressen 12 lagen	7,5 x 7,5 cm			
1 anatomisch pincet				
1 veld	37,5 x 46 cm			

Raucoset® Verbandset N°3

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister met 3 compartimenten:				
5 gaascompressen 8 lagen	5 x 5 cm	166841	4850988	45/45
1 anatomisch pincet				
1 veld	37,5 x 46 cm			

Raucoset® Verbandset N°4

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister met 3 compartimenten:		166 802	4851069	30/30
4 gaasdeppers 62	30 - 35 mm			
4 gaascompressen 8 lagen	5 x 5 cm			
1 anatomisch pincet				

Raucoset® Sondeerset N°1

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 soepele blister:		145892	4574752	40/40
1 veld	50 x 72,5 cm			
1 veld met split	50 x 72,5 cm			
1 veld (verpakking)	50 x 70 cm			
1 transparante PVC schaal	19,7 x 14,5 x 4,5 cm			
2 gaascompressen 8 lagen	7,5 x 10 cm			
4 vinyl handschoenen	M			
1 transparante blister 3 compartimenten	14,3 x 8,7 x 2 cm			
8 gaasdeppers 62	30 - 35 mm			
1 anatomisch pincet				

Raucoset® Sondeerset N°2

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister:		145834	4574745	60/60
1 alu maatbeker	110 ml			
5 compressen 8 lagen	5 x 5 cm			
1 veld met split	50 x 72,5 cm			
2 vinyl handschoenen	M			
1 veld	50 x 72,5 cm			

Raucoset® Anato pincet

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 soepele blister:		145893	4575007	90/90
1 anatomisch pincet				
2 non woven compressen 4 lagen	5 x 5 cm			

Raucoset® Veld 2L 38 x 45

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 soepele blister:		33001	2936433	220/880
1 veld 2 lagen geplooid	38 x 45 cm			

Raucoset® Veld 45 x 75

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 soepele blister:				
1 veld 2 lagen	45 x 75 cm	33002	2936425	120/480

Raucoset® Tongspatel

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 soepele blister:				
1 bamboe tongspatel		145912	4574760	480/480
3 non woven compressen 8 lagen	10 x 10 cm			

Raucoset® Inspuitset

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister:				
3 non woven compressen 4 lagen	5 x 5 cm	166314	4851077	180/180
2 gaascompressen 8 lagen	5 x 5 cm			

Raucoset® Set 10 gynaeco verband S2801-9

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 soepele blister:				
10 gyneco verbanden	10 x 35 cm	145034	4575023	20/20
1 handdoekje (reliëfdruk)	40 x 38 cm			

Raucoset® Set 5 gynaeco verband S2801-8

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 soepele blister:				
5 gyneco verbanden	10 x 35 cm	145035	4575015	30/30
1 handdoekje (reliëfdruk)	40 x 38 cm			

Raucoset® Verbandset N°5

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister:				
5 gaascompressen 8 lagen	5 x 5 cm	166318	4851044	70/70
1 anatomisch pincet				

Raucoset® Ontsmettingsset R3208-2

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister:				
5 gaasdeppers 62	30 - 35 mm	166844	4850996	60/60
2 non woven compressen 4 lagen	5 x 5 cm			

Raucoset® Verbandset N°6

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister:		166850	4851002	45/45
1 anatomisch pincet				
5 gaasdeppers 62 (2+3)	30 - 35 mm			

Raucoset® Set 5 deppers 62

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister:		166087	4851010	80/80
5 gaasdeppers 62	30 - 35 mm			
2 non woven compressen	5 x 5 cm			

Raucoset® Knopsonde

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 soepele blister:		145306	4574687	480/480
1 roestvrij staal knopsonde	14 cm			
2 non woven deppers	35 mm			

Raucoset® Verbandset N°7


Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister:		166573	4850954	110/110
5 gaascompressen 8 lagen	5 x 5 cm			
1 anatomisch pincet				

Raucoset® Set deppers N°9

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister:		145727	4574638	180/180
4 gaasdeppers 62	30 - 35 mm			
1 anatomisch pincet				

Raucoset® Verbandset N°8

Inhoud	Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
1 harde blister:		166618	4850913	105/105
3 gaasdeppers 62	30 - 35 mm			
3 gaascompressen 8 lagen	5 x 5 cm			
2 anatomische pincetten (1 rood, 1 blauw)				
1 veld	37,5 x 46 cm			

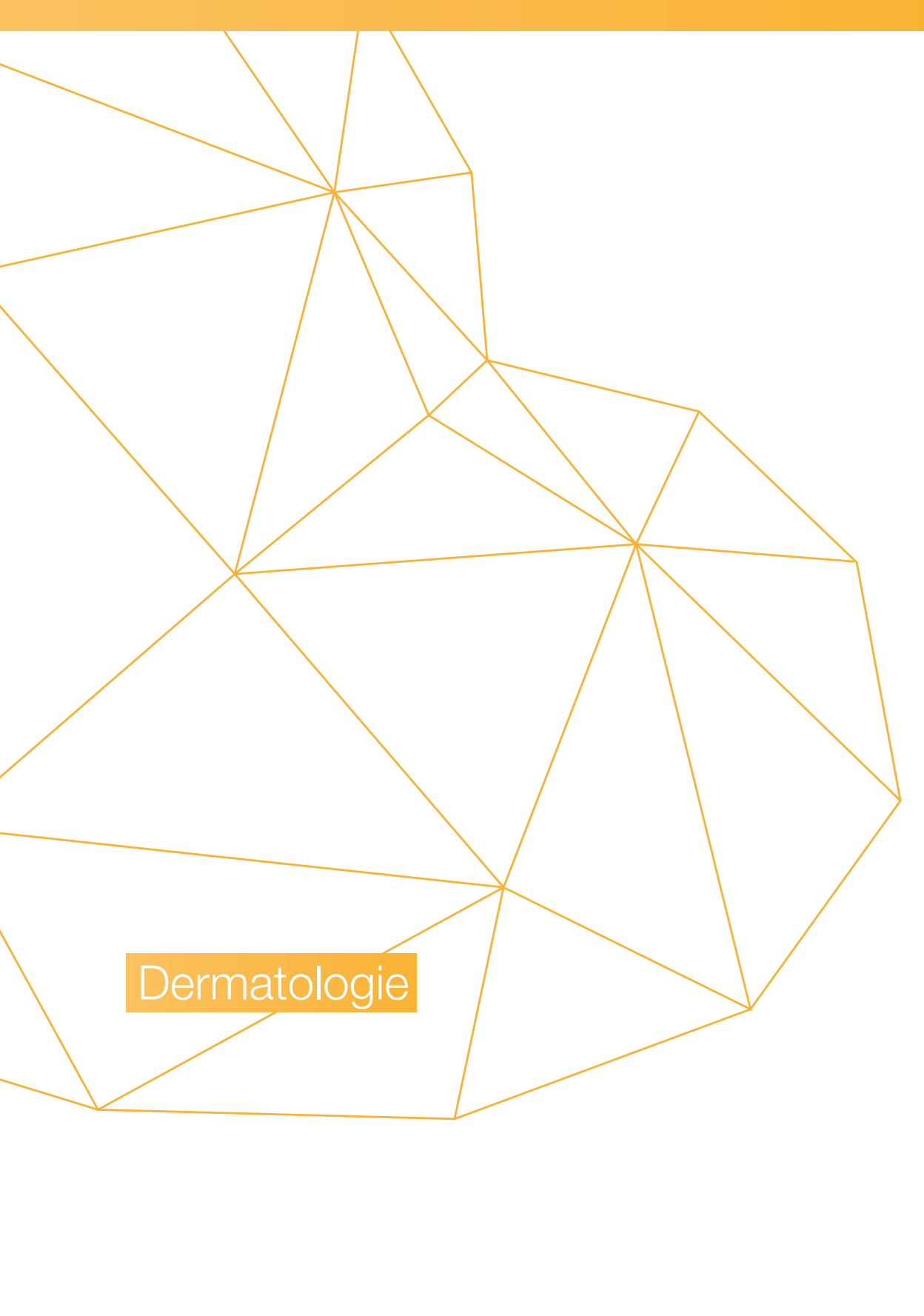

Dermatologie

Epicutaantestpleister van vliesstof.



Curatest® Epicutaantestpleister van vliesstof

Toepassingsgebieden

- voor uitvoering van epicutane tests

Eigenschappen

- eenvoudig in het gebruik bij aanbrengen en applicatie
- hecht goed en langdurig
- beschrijfbaar, verwijderbaar zijrand voor gemakkelijkere diagnostiek
- goed absorberende vlieschijfjes
- huidvriendelijk

Productsamenstelling

steunvlies: wit, 100 % polypropyleen
boord van de testkamer: polyesterfolier.

Curatest®

10 testplaatjes per pleister

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
7,5 x 12,5	163055	1461672	50/1200

tg® handschoen

Kant-en-klaarverband.



tg® handschoen

Toepassingsgebieden

- voor gevoelige handen bijvoorbeeld om te dragen onder handschoenen van rubber of latex

Eigenschappen

- eenvoudige en tijdbesparende hantering
- zacht en soepel
- anatomisch gevormd
- goede pasvorm
- veelzijdige toepassing

Productsamenstelling

100 % ongebleekt katoen, polyester (garen).

Opmerkingen

- wasbaar, steriliseerbaar met waterdamp (134 °C, 7 min.)

tg® handschoen

per paar, in foliezak

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (paar)
voor kinderen	24749	2091213	1/100
voor volwassenen maat 6 - 7 (klein)	24750	0845073	1/50
voor volwassenen maat 7 1/2 - 8 1/2 (middelgroot)	24751	0845081	1/50
voor volwassenen maat 9 - 10 (groot)	24752	0845099	1/50



Oftalmologie

Pro-ophta® Junior

Occlusiepleister.



Pro-ophta® Junior

Toepassingsgebieden

- voor het afdekken van het oog bij occlusietherapie (bijvoorbeeld bij amblyopie of strabisme)

Eigenschappen

- zichtdichte pleister
- dun en soepel materiaal
- huidvriendelijke kleebrand
- gemakkelijk en restloos te verwijderen
- kan zowel links als rechts worden gedragen

Productsamenstelling

- 100 % polyester
- 100 % weefsel katoen.

Opmerkingen

- aangenaam onder een bril te dragen

Pro-ophta® Junior Mini

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
in transparante verpakking			
5,4 x 6,5	16841		5/2000
in vouwdoos			
5,4 x 6,5	16846	2118487	50/1300
5,4 x 6,5	16843		100/2400

Pro-ophta® Junior Maxi

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
in transparante verpakking			
5,9 x 7	16840		5/2000
in vouwdoos			
5,9 x 7	16845	2118438	50/1300
5,9 x 7	16842		100/2400

Pro-ophta®-oogstaafjes

Pelottes.



Pro-ophta®-oogstaafjes



Toepassingsgebieden

- voor absorptie, deppen, verwijdering van vreemde voorwerpen, fixatie en vasthouden (weefselontziend prepareren)
- voor gebruik bij oftalmologische ingrepen en microchirurgische ingrepen in de oftalmologie

Eigenschappen

- hoog absorptievermogen
- goede capillaire werking
- hoge absorptiesnelheid
- behouden de benodigde stevigheid voor deppen en prepareren
- aan beiden kanten schuin afgewerkt

Productsamenstelling

vlies, sterk absorberend, wit, tot een staafje gerold gestabiliseerd met een absorberend omhulsel: 100 % cellulose.

Pro-ophta®-oogstaafjes

Afmetingen (mm)	Ø (mm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet-steriel, verpakt per 500 stuks				
64 x 5	5	16515	0849273	500/25000
steriel, verpakt per 20 stuks				
64 x 5	5	16516	0811364	400/1600

Pro-ophta®-lancetsteelpelottes

Pelottes.



Pro-ophta®-lancetsteelpelottes

Toepassingsgebieden

- worden ingezet voor vloeistofopname en voor prepareren bij oftalmologische en microchirurgische ingrepen
- gerichte toediening van farmaca

Eigenschappen

- neemt tot 15 maal zijn eigen gewicht aan vloeistoffen op
- bijzonder partikelarm, ook na gedeeltelijk bijsnijden van het product
- veroorzaakt nauwelijks gevoel van vreemd voorwerp

Productsamenstelling

punt: 100 % polyvinylalcohol
steel: polypropyleen.

Pro-ophta®-lancetsteelpelottes

steriel

REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
147330	4745113	1/2000

Pro-ophta®-wigpelottes



Pro-ophta®-wigpelottes

Toepassingsgebieden

- worden ingezet voor vloeistofopname en voor prepareren bij oftalmologische en microchirurgische ingrepen
- gerichte toediening van farmaca

Eigenschappen

- neemt tot 15 maal zijn eigen gewicht aan vloeistoffen op
- bijzonder partikelarm, ook na gedeeltelijk bijsnijden van het product
- veroorzaakt nauwelijks gevoel van vreemd voorwerp
- worden vastgeklemd in pincetten en pelotteklemmen

Productsamenstelling

100 % polyvinylalcohol.

Pro-ophta®-wigpelottes

steriel

REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
147331	4745121	1/2000

Pro-ophta® Oogverband S

Oogverband.



Pro-ophta® Oogverband

Toepassingsgebieden

- ter bescherming van het oog
 - ♦ na ptosisoperaties
 - ♦ bij lagofthalmie
 - ♦ bij facialisparesie
 - ♦ bij het siccasyndroom

Eigenschappen

- lichtdoorlatende, vormstabele, onbreekbare schijf
- regelmatige controle van het oog is gewaarborgd
- applicatie van farmaca is mogelijk
- huidvriendelijke lijm — geschikt voor langdurige behandeling
- snel aan te brengen
- verkrijgbaar in twee schijfgroottes

Productsamenstelling

Dwarselastisch weefsel, crèmekleurig, 70 % viscose, 30 % polyamide
Transparante schijf: polycarbonaat, helder, huidvriendelijke polyacrylaatlijm.

Pro-ophta® Oogverband S

niet-steriel, individueel verpakt

Maat	Afmetingen (cm)	Ø (cm)	Hoge schijfkromming (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
klein	10 x 7,2	4,6	0,6	34227	3237666	1/5/200
klein	10 x 7,2	4,6	0,6	34228	1754498	50/600
groot	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34229	3916780	1/5/120
groot	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34230	1754480	50/600

Pro-ophta® Oogverband D

Oogverband.



Pro-ophta® Oogverband D

Toepassingsgebieden

- ter bescherming van het oog
 - ♦ na ptosisoperaties
 - ♦ bij lagofthalmie
 - ♦ bij facialisparese
 - ♦ bij het siccasyndroom
- ter afdekking van het oog gedurende de nacht
- bijzonder geschikt voor lichtgevoelige patiënten

Eigenschappen

- lichtdichte, vormstabele, onbreekbare schijf
- geschikt voor langdurige behandeling
- betrouwbare fixatie
- snel aan te brengen

Productsamenstelling

Dwarselastisch weefsel, crèmekleurig, 70 % viscose
30 % polyamide: lichtdicht deksel, polycarbonaat, zwart, huidvriendelijke polyacrylaatlijm.

Pro-ophta® Oogverband D

niet-steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	Ø (cm)	Hoge schijfkromming (cm)	REF	Verpakkingseenheid (stuks)
10 x 7,2	4,6	0,6	34225	1/200
10 x 7,2	4,6	0,6	34226	50/600

Pro-ophta® Oogverband K

Oogverband.



Pro-ophta® Oogverband K

Toepassingsgebieden

- ter verzorging van letsel aan de buitenkant van het oog
- ter fixatie van het ooglid
- ter bescherming van de ogen tegen letsel bij operaties in buikligging (bijvoorbeeld operaties aan de wervelkolom of neurochirurgische ingrepen aan de schedel)

Eigenschappen

- past zich goed aan de gezichtscontouren aan
- de huidvriendelijke lijm fixeert betrouwbaar, ook bij langdurige behandeling
- is gemakkelijk en zonder veel restmateriaal los te maken
- snel en comfortabel aan te brengen
- hoog absorptievermogen

Productsamenstelling

Dwarselastisch weefsel, cremekleurig:
70 % viscose, 30 % polyamide
watten/gaas: 100 % katoen
netkous: 100 % viscose, huidvriendelijke polyacrylaatlijm.

Pro-ophta® Oogverband K

niet-steriel, individueel verpakt

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
11,4 x 7,8	34104	1754514	50/600

Pro-ophta® Oogkussens

Oogkompres.



Pro-ophta® Oogkussens

Toepassingsgebieden

- ter bescherming van het oog tegen mechanische invloeden
- ter applicatie van farmaca

Eigenschappen

- anatomisch gevormd
- rondom geseald
- luchtdoorlaatbaar
- zacht en soepel
- absorberend vlokkenkussen

Productsamenstelling

Binnen : sterk absorberende watten, luchtig, 60% viscose, 40% PP/PE
Buiten : zacht vliesstofomhulsel aan beide kanten, 100% polypropyleen.

Opmerkingen

- ook geschikt voor bril dragers

Pro-ophta® Oogkussens

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet-steriel, in vouwdoos			
7,2 x 6,2	13041	1300367	50/500
steriel, afzonderlijk verpakt			
7,2 x 6,2	13043	1492305	25/250

Pro-ophta®-oogkompres

Oogkompres.



Pro-ophta® Oogkompres

Toepassingsgebieden

- ter bescherming van het oog tegen mechanische invloeden
- ter applicatie van farmaca

Eigenschappen

- anatomisch gevormd
- huidvriendelijk
- aan beide zijden te gebruiken
- absorberende oogkussens

Productsamenstelling

Binnen : watten van katoen
Buiten : aan beide zijden afgedekt met verbandgaas, 100% katoen, ovaal gestanst.

Pro-ophta®-oogkompres

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet-steriel, in vouwdoos met tussenbladen van papier			
5,3 x 6,6	142021	4335220	5/250
5,3 x 6,6	142022	4335238	50/500
steriel, afzonderlijk verpakt			
5,3 x 6,6	142020	4335212	5/200
5,3 x 6,6	142025	4335261	12/480

Pro-ophta® Ooggatkompres

Oogkompres voor het polsteren van oogschijven.



Pro-ophta® Ooggatkompres



Toepassingsgebieden

- bescherming van het oog tegen mechanische invloeden onder behoud van de natuurlijke ooglid-functie
- te gebruiken voor polstering onder oogschijf met kijkgat

Eigenschappen

- kan gebruikt worden onder oog-schijven
- het kompres is fluweelzacht
- luchtdoorlaatbaar
- absorberend

Productsamenstelling

Zachte vliesstof: 67 % viscose, 33 % polyester, in 16 lagen, door stiknaad verbonden en op kompresformaat gestanst, met open centrum.

Opmerkingen

- de kunststofschiif met kijkgat is geen onderdeel van het product


Pro-ophta®-ooggatkompres

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet-steriel, in vouwdoos			
10 x 7	13015	2761112	50/300
steriel, afzonderlijk verpakt			
10 x 7	13014	4499638	50/500



Oor, neus en keel

Raucocel®-neustampons

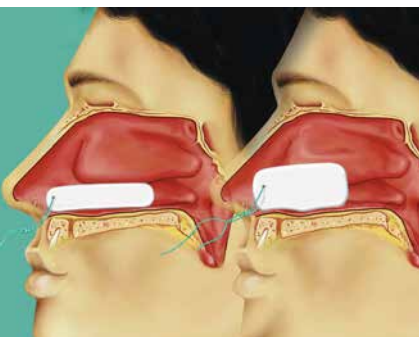

Raucocel®-neustampons

Toepassingsgebieden

- voor postoperatieve hemostase in de neusholte en neusbijholten

Eigenschappen

- fysiologische bloedstolling dankzij het principe van autocoagulatie
- kunnen indien nodig op maat worden geknipt
- nemen zeven tot twaalf keer het eigen gewicht aan vloeistof op
- snel en eenvoudig in het gebruik

Productsamenstelling

Polyvinylacetaal, vezel van nylon, Ventilatiebuisjes: siliconen rubber.

Opmerkingen


- na 24 tot 48 uur controleren of er geen sprake is van een actieve bloeding. Als dat niet het geval is, gesteriliseerd water of zoutoplossing in de neusholte injecteren om de spons te bevochtigen, en dan tien minuten wachten. Met een pincet pakken en voorzichtig verwijderen.

Raucoce[®]-neustampons

afzonderlijk steriel verzegeld, met draad

Afmetingen (mm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
geventileerd			
45	147343	4745089	10/400
80	147345	4745105	10/400
ongeventileerd			
45	147342	4745071	10/400
80	147344	4745097	10/400

Raucocel® Epistaxistamponnades

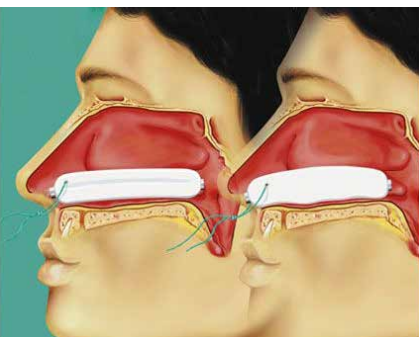

Raucocel® Epistaxistamponnades

Toepassingsgebieden

- voor het onder controle krijgen van neusbloedingen en voor postoperatieve verzorging

Eigenschappen

- fysiologische bloedstolling dankzij het principe van autocoagulatie
- tijdsbesparende en atraumatische applicatie
- kunnen indien nodig op maat worden geknipt
- nemen zeven tot twaalf keer het eigen gewicht aan vloeistof op
- snel en eenvoudig in het gebruik

Productsamenstelling

Polyvinylacetaal, vezel van nylon.

Opmerkingen

- Na 24 tot 48 uur controleren of er geen sprake is van een actieve bloeding. Als dat niet het geval is, gesteriliseerd water of zoutoplossing in de neusholte injecteren om de spons te bevochtigen, en dan tien minuten wachten. Met een pincet pakken en voorzichtig verwijderen.

Raucocel® Epistaxistamponnades

afzonderlijk steriel verzegeld, met draad

Afmetingen (mm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
55	147340	4745055	1/400
100	147341	4745063	1/400

Raucocel® Accessories

voorhoofdsband, afzonderlijk verzegeld

Lengte (mm)	Afmetingen (mm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
160	38	147957	4745139	10/400



Hygiëne en verzorging

Sentina® Ambidextrous Latex

Onderzoekshandschoenen latex.



Toepassingsgebieden

- gebruik in het ziekenhuis en in artsenpraktijken voor de professionele reiniging
- geschikt voor chemische/farmaceutische laboratoria en contact met levensmiddelen

Eigenschappen

- met rolrand
- uitstekend tastgevoel en zekere grip
- met synthetische binnencoating - voor eenvoudig en snel aantrekken
- hoge mate van scheurvastheid
- extra glad oppervlak

Productsamenstelling

Natuurlatex.

Sentina® Ambidextrous Latex

niet-steriel, in dispenserdoos, natuurlijke latex, poedervrij, met synthetische binnenlaag, wit

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
5-6 XS	141390	4353892	100/1000
6-7 S	141391	4353900	100/1000
7-8 M	141392	4353918	100/1000
8-9 L	141393	4353926	100/1000
9-10 XL	141394	4353934	90/1000

Sentina® Ambidextrous Nitrile

Onderzoekshandschoenen Nitrile.



Toepassingsgebieden

- gebruik in het ziekenhuis en in artsenpraktijken
- voor de professionele reiniging
- geschikt voor chemische/farmaceutische laboratoria en contact met levensmiddelen

Eigenschappen

- met rolrand
- uitstekend tastgevoel door optimale dikte bij hoog draagcomfort
- hoge mate van scheurvastheid
- natuurlatexvrij
- geschikt voor mensen met type 1-allergie

Productsamenstelling

Nitrilbutadiëenrubber.

Sentina® Ambidextrous Nitrile

niet-steriel, in dispenserdoos, nitrilbutadiëenrubber, zonder natuurlatex, poedervrij, lavendelblauw

Maat	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
6-7 S	220008	4154159	200/2000
7-8 M	220007	4154142	200/2000
8-9 L	220006	4154134	200/2000
9-10 XL	220009	4154167	180/1800

Overige hygiëneproducten

Nuttige helper voor de dagelijkse verzorging.



Zelleten Cellettes

kiemarmd, 500 pelottes in foliezak

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
rol met 300 deppers in een doorzichtige dispenser			
5 x 4	13349	1685262	1/20
2 rollen met 500 deppers in een zakje			
5 x 4	13356	1408749	1/20
kiemarmd, 500 pelottes in foliezak			
5 x 4	13353		1/20

Combinatiedispenser

REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
van polystyrol, glashelder, leeg, max. vulbreedte 10 cm		
23900	0398990	1

Overige hygiëneproducten

Nuttige helper voor de dagelijkse verzorging.

Raucotupf wattenstok

REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
houten stokje, wattenstok fijne tips, steriel (100 x 2 stuks)		
137431		200/20000
houten stokje, wattenstok lange tips, steriel (50 x 2 stuks)		
137434		100/1000
houten stokje, wattenstok fijne tips, steriel (100 x 5 stuks)		
137432		500/5000
houten stokje, wattenstok lange tips, steriel (3 x 50 stuks)		
137436		150/1500

Alco-prep

large reinigingsdeppers isopropylalcohol

Afmetingen (mm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
34 x 36 (ontvouwde)	139343	3466224	100/2000

Sentina®-bezoekersjassen

Jas voor medisch personeel, patiënten en bezoekers.



Toepassingsgebieden

- ter bescherming van patiënten tegen partikels en stof uit kleding van bezoekers en personeel

Productsamenstelling

Vliesstof.

Eigenschappen

- gebruik van natuurrubberlatexvrije grondstoffen
- luchtdoorlatend
- partikelarm
- vochtwerend

Sentina®-bezoekersjassen 30g/m²

luchtdoorlatend fleece, groen, met witte manchetten, ceintuur en een klittenbandsluiting in de nek

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
niet-steriel			
118	18418		60
steriel			
118	18419		30

Sentina® Beschermafdekking, brancardlaken



Toepassingsgebieden

- voor gebruik als afdekking op tafels en voor het dragen in de Eerste hulp en de OK

Eigenschappen

- absorberende celstoflagen
- vloeistofdichte PE-folie
- hoge mate van scheurvastheid
- naar keuze met draadversterking
- hoog absorptievermogen
- bescherming tegen verontreiniging en besmetting

Productsamenstelling

Combinatie van absorberende celstoflagen en een vloeistofdichte laag van PE-folie; in de lengte verwerkt nylon-garen zorgt voor de desbetreffende scheurvastheid.

Sentina® Beschermafdekking

1 laag absorberende tissue, 1 laag PE-folie

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
38 x 39	142260	4392387	1000
75 x 90	142261	4392395	200
75 x 140	142262	4392403	100
draadversterkt			
75 x 175	142263	4392411	100
75 x 210	142264	4392429	100

Sentina® Brancardlaken " Basic "

draadversterkt, zijdelingse vloeistofblokkeringen, 1 absorberende celstoflaag, 1 laag PE-folie

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
78 x 140	142270		100
78 x 175	142271		100
78 x 210	142272		100

Sentina® Brancardlaken

draadversterkt, zijdelingse vloeistofblokkeringen, 2 absorberende celstoflagen, 1 laag PE-folie

Afmetingen (cm)	REF	CNK	Verpakkingseenheid (stuks)
78 x 140	142273		100
78 x 175	142274		100
78 x 210	142275		100

